


therascreen[®] KRAS Pyro[®]-kit – Håndbog



Version 1

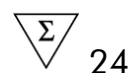

Til in vitro-diagnostisk brug



971460



1061825DA



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND

R3

MAT

1061825DA



QIAGEN prøve- og analyseteknologier

QIAGEN er den førende leverandør af innovative prøve- og analyseteknologier, der muliggør isolation og påvisning af indholdet i enhver biologisk prøve. Vore avancerede høj kvalitetsprodukter og -service garanterer succes fra prøve til resultat.

QIAGEN sætter standarder inden for:

- Oprensning af DNA, RNA og proteiner
- Nucleinsyre- og proteinanalyser
- microRNA-undersøgelser og RNAi
- Automatisering af prøve- og analyseteknologier

Vor opgave er at bringe Dem i stand til at opnå enestående succes og gennembrud. For yderligere information, se www.qiagen.com.

Indhold

Tilsligtet anvendelse	5
Opsummering og forklaring	5
Procedureprincip	6
Medfølgende materialer	8
Kit-indhold	8
Nødvendige materialer, som ikke medfølger	10
Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger	11
Sikkerhedsinformationer	11
Generelle forholdsregler	11
Opbevaring og håndtering af reagenser	13
Håndtering og opbevaring af prøver	13
Procedure	14
DNA-isolation	14
Protokoll	
■ 1: Kørselsopsætning for PyroMark Q24-systemet	15
■ 2: PCR ved hjælp af de PCR-reagenser, der medfølger i <i>therascreen</i> KRAS-kittet	17
■ 3: Immobilisering af PCR-produkter på Streptavidin Sepharose High Performance-kugler	20
■ 4: Klargøring af prøver inden pyrosekventeringsanalyse på PyroMark Q24	22
■ 5: Kørsel af PyroMark Q24-systemet	26
■ 6: Analyse af en PyroMark Q24-kørsel	28
Fortolkning af resultater	31
Fortolkning af analyseresultater og påvisning af lavniveau-mutationer	31
Fejludbedringsvejledning	36
Kvalitetskontrol	38
Begrænsninger	38
Brugsegenskaber	40
Tomgrænse og påvisningsgrænse	40
Linearitet	42
Laboratorienøjagtighed	42

Diagnostisk evaluering	43
Referencer	44
Symboler	45
Kontaktoplysninger	45
Bilag A: Opsætning af <i>therascreen</i> KRAS Pyro-analyser	46
Bilag B: Tømning af affaldsbeholder og beholdere	49
Bestillingsinformation	50

Tilsigtet anvendelse

therascreen KRAS Pyro-kittet er en nucleinsyresekvensbaseret in vitro-påvisningstest baseret på pyrosekvenseringsteknologi til kvantitativ påvisning af mutationer i codon 12, 13 og 61 i det humane KRAS-gen i genomisk DNA udledt af humane vævsprøver.

therascreen KRAS Pyro-kittet er beregnet til brug som hjælpemiddel ved udredning af, om patienter med kolorektalcancer har udsigt til gavn af anti-EGFR-behandlinger som panitumumab og cetuximab. Til in vitro-diagnostisk brug.

Kun til brug på PyroMark[®] Q24-systemet. Der findes følgende PyroMark Q24-systemer:


- PyroMark Q24-instrumentet og PyroMark Q24 MDx-instrumentet.
- PyroMark Q24 Vacuum-arbejdsstationen og PyroMark Q24 MDx Vacuum-arbejdsstationen.
- PyroMark Q24-software (version 2.0) og PyroMark Q24 MDx-software (version 2.0).

Produktet er beregnet til brug af professionelle brugere, f.eks. teknikere og læger med kvalifikationer inden for in vitro-diagnostiske procedurer, molekylærbiologiske teknikker samt PyroMark Q24-systemet.

Opsummering og forklaring

I Europa er der betydeligt fokus på KRAS-mutationsanalyse, fordi Europa-Kommissionen har udstedt en betinget markedsføringstilladelse for panitumumab og cetuximab til behandling af metastaserende koloncancer hos patienter med et ikke-muteret KRAS-gen (vildtype). Det betyder, at panitumumab og cetuximab udelukkende kan administreres til patienter, der er screenet for at fastlægge mutationsstatus for KRAS.

Det CE-IVD-mærkede *therascreen* KRAS Pyro-kit er beregnet til kvantitative målinger af mutationer i codon 12, 13 og 61 af det humane KRAS-gen. Kittet består af 2 analyser: én til påvisning af mutationer i codon 12 og 13 og én til påvisning af mutationer i codon 61 (figur 1). De to regioner forstærkes separat ved hjælp af PCR og sekvenseres i hele den definerede region. Sekvenserne omkring de definerede positioner fungerer som normaliserings- og referencespidser til kvantificering og kvalitetsvurdering af analysen.

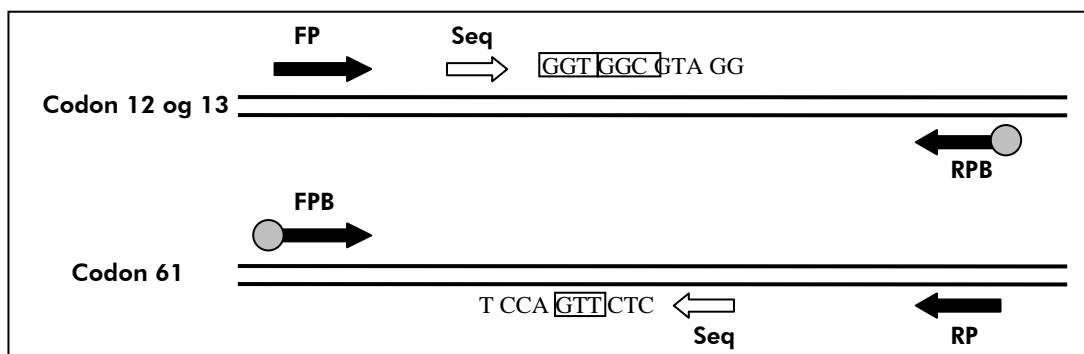

Figur 1. Illustration af KRAS-analysen. Den afbildede sekvens er den analyserede sekvens for en vildtypeprøve. **FP** og **FPB**: Forward-PCR-primere (B står for biotinylering); **RP** og **RPB**: Reverse-PCR-primere (B står for biotinylering); **Sekv.**: Sekventeringsprimere.

Bemærk: Codon 12 og 13 sekventeres forfra og codon 61 bagfra.

Produktet består af en PCR-primerblanding og en sekventeringsprimer til hver analyse. Primerne leveres i en opløsning. Hvert hætteglas indeholder 24 µl af hver primer eller primerblanding.

Procedureprincip


Rutediagrammet illustrerer analyseproceduren. Efter PCR ved hjælp af primere rettet mod codon 12/13 og codon 61 immobiliseres ampliconerne på Streptavidin Sepharose® High Performance-kugler. Der forberedes enkeltstrenget DNA, og de tilsvarende sekventeringsprimere afhædes til DNA'et. Prøverne analyseres herefter på PyroMark Q24-systemet ved hjælp af en kørselsopsætningsfil og en kørselsfil.

Det anbefales at bruge KRAS Plug-in'en Report til at analysere kørslen. KRAS Plug-in'en Report fås ved henvendelse via e-mail til pyro.plugin@qiagen.com.

Kørslen kan dog også analyseres ved hjælp af det integrerede analyseværktøj i PyroMark Q24-systemet. "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) kan tilpasses med henblik på påvisning af sjældne mutationer efter kørslen (se "Protokol 6: Analyse af en PyroMark Q24-kørsel", side 28).

Bemærk: Rutediagrammet er ændret en smule i forhold til Håndbogen til PyroMark KRAS-kit og revision R1 af håndbogen til *therascreen* KRAS Pyro-kit (se "Protokol 2: PCR ved hjælp af de PCR-reagenser, der medfølger i *therascreen* KRAS-kittet", side 17 og "Protokol 4: Klargøring af prøver inden pyrosekventeringsanalyse på PyroMark Q24", side 22).

Rutediagram for *therascreen* KRAS Pyro-procedure

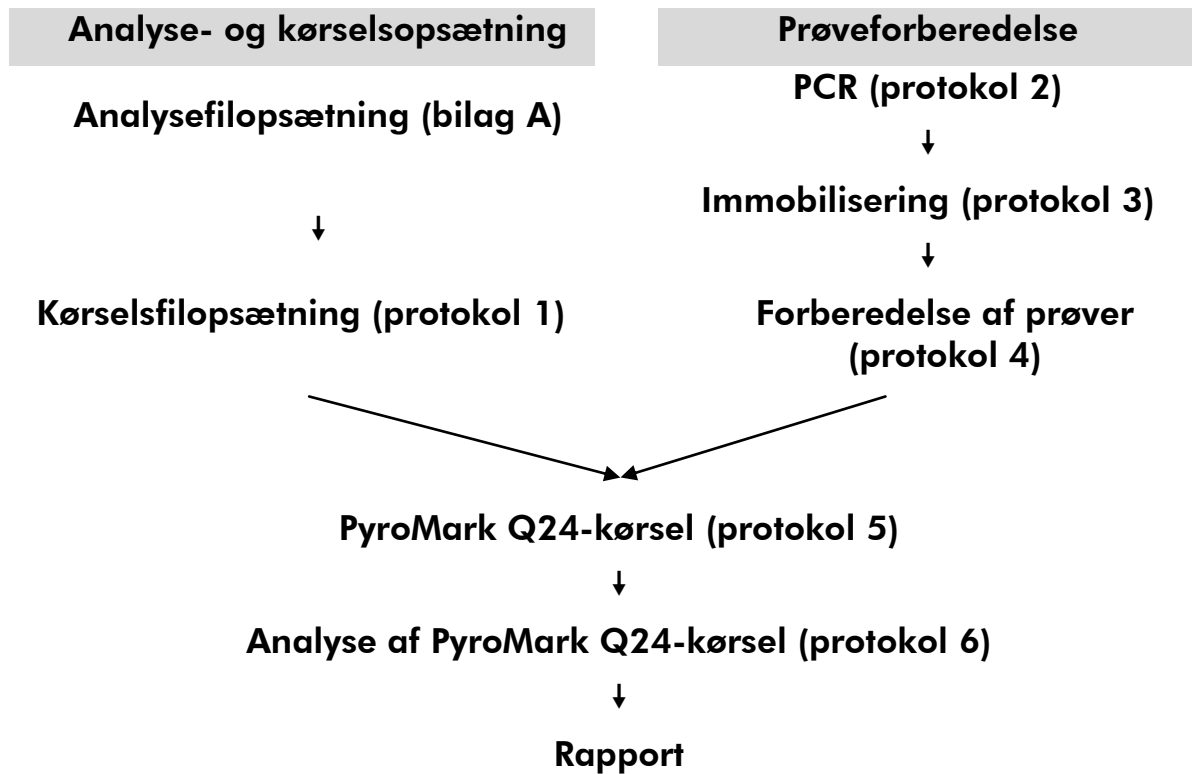

Kontroller

Kittet indeholder umethyleret kontrol-DNA som positiv kontrol til PCR og sekventeringsreaktioner. Denne kontrolprøve har en vildtype genotype i de regioner, der sekventeres med dette kit, og er påkrævet med henblik på korrekt fortolkning af resultaterne og identifikation af lavniveau-mutationer (se "Fortolkning af resultater", side 31). Medtag en prøve med umethyleret kontrol-DNA for hver analyse i hver enkelt pyrosekventeringskørsel.

Hertil kommer, at en negativ kontrol (uden skabelon-DNA) skal medtages i PCR-opsætningen af mindst én analyse.


Medfølgende materialer

Kit-indhold

therascreen KRAS Pyro-kit (æske 1/2)

<i>therascreen</i> KRAS Pyro-kit	(24)
Katalognr.	971460
Antal reaktioner	24
Sekvenseringsprimer KRAS 12/13	24 μ l
Sekvenseringsprimer KRAS 61	24 μ l
PCR-primer KRAS 12/13	24 μ l
PCR-primer KRAS 61	24 μ l
PyroMark PCR-masterblanding, 2x	850 μ l
CoralLoad [®] -koncentrat, 10x	1,2 ml
H ₂ O	3 x 1,9 ml
Umethyleret kontrol-DNA, 10 ng/ μ l	100 μ l

therascreen-buffere og -reagenser (æske 2/2)

therascreen-buffere og -reagenser		
PyroMark-bindingsbuffer		10 ml
PyroMark-afhædningsbuffer		10 ml
PyroMark-denatureringsopløsning*		250 ml
PyroMark-vaskebuffer, 10x		25 ml
Enzymblanding		1 hætteglas
Substratblanding		1 hætteglas
dATP α S		1180 μ l
dCTP		1180 μ l
dGTP		1180 μ l
dTTP		1180 μ l
Håndbog		1

* Indeholder natriumhydroxid.

Nødvendige materialer, som ikke medfølger

Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (safety data sheets, SDSs), som kan fås hos den pågældende leverandør.

- DNA-isolationskit (se "DNA-isolation", side 14)
 - Pipetter (justerbare)*
 - Sterile pipettespidser (med filtre til PCR-opsætning)
 - Bordmikrocentrifuge*
 - Termocykler* og egnede PCR-rør
 - Streptavidin Sepharose High Performance (GE Healthcare, katalognr. 175113-01; www.gelifesciences.com)
 - PyroMark Q24 (katalognr. 9001513 eller 9001514)*†
 - PyroMark Q24-software (katalognr. 9019063 eller 9019062)†
 - PyroMark Q24-plade (katalognr. 979301)†
 - PyroMark Q24-beholder (katalognr. 979302)†
 - PyroMark Q24-vakuumarbejdsstation (katalognr. 9001515 eller 9001517)*†
 - Plademikser* til immobilisering på kugler
 - Varmeblok*, som kan nå op på 80° C
 - 24-brønds PCR-plade eller strips
 - Strip-hætter
 - Rektificeret vand (Milli-Q® 18,2 MΩ x cm eller tilsvarende).
- Bemærk:** Der medfølger tilstrækkeligt vand i kittet til PCR, DNA-immobilisering og til at opløse enzymblandingen og substratblandingen. Der skal bruges yderligere rektificeret vand til fortynding af PyroMark-vaskebufferen 10x.
- Ethanol (70%)‡

* Kontrollér, at instrumenterne er kontrolleret og kalibreret i henhold til producentens anbefalinger.

† CE-IVD-mærket i henhold til EU-direktiv 98/79/EF. De øvrige produkter på listen er ikke CE-IVD-mærkede i henhold til EU-direktiv 98/79/EF.

‡ Der må ikke bruges denatureret alkohol, som indeholder andre stoffer som f.eks. metanol eller methylethylketon.

Anbefalede plademiksere

De i tabel 1 viste plademiksere anbefales til brug sammen med *therascreen* KRAS Pyro-kittet.

Table 1. Plademiksere anbefalet til brug med *therascreen* KRAS Pyro-kittet

Producent	Produkt	Katalognummer
Eppendorf	Thermomixer komfort (grundenhed)	5355 000.011
	Thermoblock til mikrotiterplader	5363 000.012
	Adapterplade til 96 x 0,2 ml PCR-rør til isætning i blokke til mikrotiterplader	5363 007.009
H+P Labortechnik GmbH	Variomag® Teleshake	51410 (115 V = 51410 U)
	Variomag Monoshake	51110 (115 V = 51110 U)

Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger

Til in vitro-diagnostisk brug

Sikkerhedsinformationer

Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. Disse er tilgængelige online i det praktiske og kompakte PDF-format på adressen www.qiagen.com/safety, hvor det er muligt at finde, få vist og udskrive et SDS til hvert enkelt QIAGEN®-kit og samtlige kitkomponenter.

Følgende farer og forholdsregler gælder for komponenterne i *therascreen* KRAS Pyro-kittet.

PyroMark Denaturation Solution



Advarsel! Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan ætse metaller. Absorber udslip for at undgå materielskade. Opbevares kun i den originale beholder. Bær beskytteshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

PyroMark Enzyme Mixture



Indeholder: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol; acetic acid. Fare! Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til GIFTINFORMATION eller en læge. Forurenede tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Bær beskyttelsehandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

PyroMark Substrate Mixture



Indeholder: acetic acid. Advarsel! Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Forurenede tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Bær beskyttelsehandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Generelle forholdsregler

Bemærk: Brugeren skal altid være opmærksom på følgende:

- Håndbogen skal følges fuldstændigt for at opnå optimale resultater. Det anbefales ikke at fortynde reagenserne, undtagen som det er beskrevet i denne håndbog, da det vil medføre tab af ydelse.
- Rutediagrammet er ændret en smule (se "Protokol 2: PCR ved hjælp af de PCR-reagenser, der medfølger i *therascreen* KRAS-kittet", side 17 og "Protokol 4: Klargøring af prøver inden pyrosekventeringsanalyse på PyroMark Q24", side 22) i forhold til håndbogen til PyroMark KRAS-kit og revision R1 af håndbogen til *therascreen* KRAS Pyro-kit.
- Komponenterne i dette produkt er tilstrækkelige til at udføre 24 reaktioner i op til 5 uafhængige kørsler.
- Brug sterile pipettespidser med filtre (til PCR-opsætning).
- Positive materialer (prøver, positive kontroller og amplikoner) skal opbevares og ekstraheres separat fra alle andre reagenser og tilsættes reaktionsblandingen på et separat sted.
- Alle komponenter skal omhyggeligt optøs til stuetemperatur (15–25 °C), inden analysen startes.
- Efter optøning skal komponenterne blandes (ved gentagen pipettering op og ned eller ved pulsvortexing) og centrifugeres kortvarigt.

- Mislykkede resultater kan ikke bruges som udgangspunkt for vurdering af mutationsstatus.

Opbevaring og håndtering af reagenser

therascreen KRAS Pyro-kittet forsendes i to æsker. *therascreen* KRAS Pyro-kittet (æske 1/2) forsendes på tøris. PyroMark PCR-masterblandingen, CoralLoad-koncentratet, det umethylerede kontrol-DNA og samtlige primere skal opbevares ved -30 til -15 °C efter modtagelsen.

therascreen buffere og reagenser (æske 2/2), der indeholder buffere, enzymblanding, substratblanding, dATP α S, dCTP, dGTP og dTTP (reagenserne til pyrosekventeringsanalyse) forsendes på køleelementer. Disse komponenter skal opbevares ved $2-8$ °C efter modtagelse. For at minimere aktivitetstab anbefales det at opbevare både enzymblandingen og substratblandingen i de leverede hætteglas.

Rekonstituerede enzym- og substratblandinger er stabile i mindst 10 dage ved $2-8$ °C. Rekonstituerede enzym- og substratblandinger kan nedfryses og opbevares i hætteglassene ved -30 til -15 °C. Frosne reagenser bør ikke udsættes for mere end tre optønings- og indfrysningscyklusser.

Bemærk: Nucleotider må ikke fryses.

therascreen KRAS Pyro-kittet er stabilt indtil udløbsdatoen ved opbevaring under disse betingelser.

Håndtering og opbevaring af prøver

Alle prøver skal behandles som potentielt infektiøst materiale.

Prøvematerialet er humant DNA ekstraheret fra blod eller fra formalinfikserede, paraffinindstøbte (FFPE) prøver.

Prøver fra personer i heparinbehandling må ikke bruges. Blodprøver, der er opsamlet i rør tilsat heparin som antikoagulationsmiddel, må ikke bruges. Heparin påvirker PCR.

Procedure

DNA-isolation

Systemets ydeevne er fastlagt ved hjælp af EZ1[®] DNA Tissue-kit og QIAamp[®] DNA FFPE Tissue-kit til ekstrahering af humant DNA fra formalinfikserede, paraffinindlejrede tumorprøver. Ydelsen for QIAamp DSP DNA Blood Mini-kitsystemet er fastlagt ved hjælp af blodprøver fra raske donorer tilsat tumorceller.

De QIAGEN[®] kit, der er vist i tabel 2, anbefales til oprensning af DNA fra de angivne humane prøvetyper til brug med *therascreen* KRAS Pyro-kittet. DNA-oprensningen skal udføres i henhold til instruktionerne i kit-håndbøgerne.

Tabel 2. DNA-oprensningskit anbefalet til brug med *therascreen* KRAS Pyro-kit

Prøvemateriale	Isolationskit til nucleinsyre	Katalognummer (QIAGEN)
Paraffinindlejret væv	QIAamp DNA FFPE Tissue-kit (50)	56404
	EZ1 DNA Tissue-kit (48)*	953034
Blod	QIAamp DSP DNA Blood Mini-kit [†]	61104

* Følg protokollen for brug med paraffinindstøbt væv. EZ1 DNA Tissue-kit skal bruges sammen med EZ1 Advanced (kat. nr. 9001410 eller 9001411) og EZ1 Advanced DNA Paraffin Section Card (kat. nr. 9018298), med EZ1 Advanced XL (kat. nr. 9001492) og EZ1 Advanced XL DNA Paraffin Section Card (kat. nr. 9018700) eller med BioRobot[®] EZ1 (kat. nr. 9000705 – fås ikke længere) og EZ1 DNA Paraffin Section Card (kat. nr. 9015862).

[†] CE-IVD-mærket i henhold til EU-direktiv 98/79/EF.

Protokol 1: Kørselsopsætning for PyroMark Q24-systemet

Vigtig anvisning før start

- Hvis det er nødvendigt, kan LOB bekræftes ved hjælp af en vildtypeprøve, så der opnås en hel plade resultater. Yderligere oplysninger fås i CLSI's retningslinje EP17-A "Protocol for determination of limits of detection and limits of quantitation; approved guideline".

Ting, der skal gøres før start

- Hvis KRAS Plug-in'en Report ikke er blevet installeret, skal der oprettes en analyseopsætning (se bilag A, side 46). Dette må kun gøres én gang før kørsel af *therascreen* KRAS Pyro-analysen første gang. I tilfælde af at KRAS Plug-in'en Report er blevet installeret, er der adgang til prædefinerede analyseopsætninger i genvejsbrowseren i PyroMark Q24-softwaren ved at følge stien "Example Files/PyroMark Setups/KRAS". KRAS Plug-in'en Report fås ved henvendelse via e-mail til pyro.plugin@qiagen.com.

Procedure

1. Klik på på værktøjslinjen.

Der oprettes en ny kørselsfil.

2. Angiv kørselsparametrene (se "Kørselsparametre", side 16).

3. Klargør pladen ved at tilføje analyser for både codon 12/13 og codon 61 i de brønde, der svarer til de prøver, som skal analyseres.

Bemærk: En negativ kontrolprøve (uden skabelon-DNA) skal medtages i PCR-opsætningen af mindst én analyse.

Bemærk: Medtag en prøve med umetyleret kontrol-DNA for hver analyse i hver enkelt pyrosekventeringskørsel (se "Kontroller", side 7).

4. Når kørslen er konfigureret og klar til at køre på PyroMark Q24-systemet, skal der udskrives en liste over de påkrævede volumener enzymblanding, substratblanding og nucleotider samt pladeopsætningen. Vælg "Pre Run Information" (Information før kørsel) i menuen "Tools" (Funktioner), og klik på , når rapporten vises.

5. Luk kørselsfilen, og kopiér den til en USB-nøgle (leveres med systemet) ved hjælp af Windows® Stifinder.

Bemærk: Den udskrevne information før kørsel kan bruges som skabelon for prøveopsætningen (se "Protokol 3: Immobilisering af PCR-produkter på Streptavidin Sepharose High Performance-kugler", side 20).

Se "Protokol 5: Kørsel af PyroMark Q24-systemet", side 26, for at køre pladen på PyroMark Q24-systemet.

Kørselsparametre

Run name (Kørselsnavn):	Navnet på kørslen angives, når filen gemmes. Hvis filen omdøbes, ændres navnet på kørslen også.
Instrument method (Instrumentmetode):	Vælg instrumentmetode ud fra den beholder, der skal bruges til kørslen. Se instruktionerne til produkterne.
Plate ID (Plade-id):	Valgfrit: Angiv id'et for PyroMark Q24-pladen.
Bar code (Stregkode):	Valgfrit: Angiv et stregkodennummer for pladen. Hvis der er en stregkodelæser tilsluttet computeren, kan du også placere markøren i feltet "Barcode" (Stregkode) ved at klikke i feltet og herefter scanne stregkoden.
Kit ID (Kit-id):	Valgfrit: Angiv lotnummeret for det <i>therascreen</i> KRAS Pyro-kit, der skal bruges. Lotnummeret fremgår af etiketten på produktet. Bemærk: Vi anbefaler at angive både reagens-id og kit-id, så eventuelle uventede problemer med reagenserne kan spores.
Run note (Kørselsbemærkning):	Valgfrit: Angiv en bemærkning om indholdet af eller formålet med kørslen.

Tilføj analysefiler

En analyse kan føjes til en brønd på en af følgende måder:

- Højreklik på brønden, og vælg "Load Assay" (Indlæs analyse) i genvejsmenuen
- Marker analysen i genvejsbrowseren, klik på den, og træk den til brønden.

En brønd har farve efter den analyse, der er anbragt i brønden.

Angiv prøve-id'er og bemærkninger

Der kan angives prøve-id'er eller bemærkninger ved at vælge den pågældende celle og indtaste teksten.

Eksisterende prøve-id'er eller bemærkninger kan redigeres ved at markere cellen (det aktuelle indhold markeres) eller dobbeltklikke på cellen.

Protokol 2: PCR ved hjælp af de PCR-reagenser, der medfølger i *therascreen* KRAS-kittet

Denne protokol er til PCR-forstærkninger af en region, der indeholder codon 12 og codon 13, samt en separat PCR-forstærkning af en region, som indeholder codon 61, ved hjælp af *therascreen* KRAS Pyro-kittet.

Vigtige anvisninger før start

- Rutediagrammet er ændret en smule i forhold til PyroMark KRAS Pyro Kit-håndbogen (trin 5).
- HotStarTaq[®] DNA-polymerasen i PyroMark-masterblandingen kræver et aktiveringstrin på **15 minutter ved 95 °C**.
- Alle reaktionsblandinger skal klargøres i et område, som er adskilt fra det område, der bruges til DNA-oprensning, tilføjelse af skabelon-DNA i PCR, PCR-produktanalyse eller klargøring af prøver inden pyrosekvenseringsanalyse.
- Brug engangspidser med hydrofobiske filtre for at minimere krydskontaminering.

Ting, der skal gøres før start

- Inden rørene med PCR-primere åbnes, skal de centrifugeres kortvarigt, så indholdet samles i bunden af rørene.
- Juster evt. koncentrationen af kontrollen og prøve-DNA'et til 0,4–2 ng/μl.

Procedure

1. Optø alle nødvendige reagenser (se tabel 3).

Bland dem godt inden brug.

2. Klargør en reaktionsblanding for hvert PCR-primersæt i henhold til tabel 3.

Reaktionsblandingen indeholder som regel alle de komponenter, der er nødvendige ved PCR, undtagen prøven.

Klargør en større mængde reaktionsblanding end den, der er nødvendig for det samlede antal PCR-analyser, som skal udføres.

Tabel 3. Klargøring af reaktionsblanding til hver PCR-primerblanding

Komponent	Volumen/reaktion (µl)
PyroMark PCR-masterblanding, 2x	12,5
CoralLoad-koncentrat, 10x	2,5
PCR-primer KRAS 12/13 eller PCR-primer KRAS 61	1,0
Vand (H ₂ O, medfølgende)	4,0
Volumen i alt	20,0

3. Bland reaktionsblandingen grundigt, og dispenser 20 µl i hvert PCR-rør.

Det er ikke nødvendigt at opbevare PCR-rørene på is, da HotStarTaq-DNA-polymerasen er inaktiv ved stuetemperatur.

4. Tilføj 5 µl skabelon-DNA (2–10 ng genomisk DNA) i de enkelte PCR-rør (se tabel 4), og bland grundigt.

Bemærk: En negativ kontrolprøve (uden skabelon-DNA) skal medtages i PCR-opstillingen af mindst én analyse.

Bemærk: Medtag en prøve med umetyleret kontrol-DNA for hver analyse i hver enkelt pyrosekventeringskørsel (se "Kontroller", side 7).

Tabel 4. Klargøring af PCR

Komponent	Volumen/reaktion (µl)
Reaktionsblanding	20
Prøve-DNA	5
Volumen i alt	25

5. Programmér termocyklere i henhold til producentens instruktioner og de betingelser, der er skitseret i tabel 5.

Tabel 5. Optimeret cyklusprotokol

			Kommentarer
Første aktiveringstrin:	15 minutter	95 °C	HotStarTaq-DNA-polymerasen aktiveres med dette opvarmningstrin.
3-trinscyklus:			
Denaturering	20 sekunder	95 °C	
Afhærdning	30 sekunder	53 °C	
Udvidelse	20 sekunder	72 °C	
Antal cyklusser	42		
Endelig udvidelse:	5 minutter	72 °C	

6. Anbring PCR-rørene i termocyklere, og start cyklusprogrammet.
7. Efter forstærkning skal der fortsættes med "Protokol 3: Immobilisering af PCR-produkter på Streptavidin Sepharose High Performance-kugler", side 20.

Protokol 3: Immobilisering af PCR-produkter på Streptavidin Sepharose High Performance-kugler

Denne protokol er til immobilisering af skabelon-DNA på Streptavidin Sepharose High Performance-kugler (GE Healthcare) inden analyse på PyroMark Q24-systemet.

Ting, der skal gøres før start

- Lad de påkrævede reagenser og opløsninger nå stuetemperatur (15–25 °C) inden start.

Procedure

1. Ryst forsigtigt flasken med Streptavidin Sepharose High Performance fra side til side, til der opnås en homogen opløsning.
2. Klargør en masterblanding til DNA-immobilisering i henhold til tabel 6. Klargør et 10 % større volumen end det, der er nødvendigt for det samlede antal reaktioner, som skal udføres.

Tabel 6. Masterblanding til DNA-immobilisering

Komponent	Volumen/prøve (µl)
Streptavidin Sepharose High Performance	2
PyroMark-bindingsbuffer	40
Vand (H ₂ O, medfølgende)	28
Volumen i alt	70

3. Tilsæt 70 µl masterblanding i brøndene på en PCR-plade eller strip med 24 brønde, som dette er defineret under kørselsopsætningen (se "Protokol 1: Kørselsopsætning for PyroMark Q24-systemet", side 15).
4. Tilsæt 10 µl biotinyleret PCR-produkt fra protokol 2 i hver brønd med masterblanding, som dette er defineret under kørselsopsætningen (se "Protokol 1: Kørselsopsætning for PyroMark Q24-systemet", side 15).

Bemærk: Det samlede volumen pr. brønd skal være 80 µl efter tilsætning af masterblanding og PCR-produkt.

5. Forsegl PCR-pladen (eller strips) med strip-hætter.

Bemærk: Kontrollér, at der ikke er risiko for lækage mellem brøndene.

- 6. Ryst PCR-pladen ved stuetemperatur (15–25 °C) i 5–10 minutter ved 1.400 o/min.**

Bemærk: Under dette trin skal PyroMark Q24-vakuumarbejdsstationen klargøres til prøveforberedelse som beskrevet i *PyroMark Q24 User Manual*.

- 7. Fortsæt straks til "Protokol 4: Klargøring af prøver inden pyrosekventeringsanalyse på PyroMark Q24", side 22.**

Bemærk: Sepharose-kugler sedimenterer hurtigt. Opfangning af kugler skal ske umiddelbart, når rystningen er færdig.

Hvis der er gået mere end 1 minut, siden pladen (eller strips) blev rystet, rystes igen i 1 minut, før kuglerne opfanges.

Protokol 4: Klargøring af prøver inden pyrosekvenseringsanalyse på PyroMark Q24

Denne protokol er til klargøring af enkeltstrenget DNA og afhærdning af sekvenseringsprimeren til skabelonen inden pyrosekvenseringsanalyse på PyroMark Q24.

Vigtige anvisninger før start

- Inden rørene med sekvenseringsprimere åbnes, skal de centrifugeres kortvarigt, så indholdet samles i bunden af rørene.
- De 2 forskellige sekvenseringsprimere skal tilsættes i det mønster, der er defineret for pladen under kørselsopsætningen (se "Protokol 1: Kørselsopsætning for PyroMark Q24-systemet", side 15), afhængigt af analyseregionen (codon 12 og 13 eller codon 61).
- Rutediagrammet er ændret en smule i forhold til revision R1 af *therascreen* KRAS Pyro Kit-håndbogen (trin 18). Undgå at afkorte nedkølingstiden efter opvarmning af prøverne til 80 °C.
- Udfør funktionstesten for filterproberne som beskrevet i PyroMark Q24-håndbogen med regelmæssige mellemrum, og udskift filterproberne, når det er påkrævet.

Ting, der skal gøres før start

- Anbring én PyroMark Q24-pladeholder på en forvarmet varmeblok ved 80 °C til brug i trin 17. Lad en anden PyroMark Q24-pladeholder stå ved stuetemperatur (15–25 °C) til brug i trin 18.
- PyroMark-vaskebufferen leveres som 10x-koncentrat. Inden den bruges for første gang, skal den fortyndes til 1x-arbejdsopløsning ved at tilsætte 225 ml rektificeret vand i 25 ml 10x PyroMark-vaskebuffer (endeligt volumen på 250 ml).

Bemærk: 1x PyroMark-vaskebufferopløsningen er stabil ved 2–8 °C indtil den anførte udløbsdato.

Procedure

- 1. Fortynd en tilstrækkelig mængde sekvenseringsprimer KRAS 12/13 og sekvenseringsprimer KRAS 61 i PyroMark-afhærdningsbuffer som vist i tabel 7.**

Klargør et større volumen fortyndet sekvenseringsprimer end det, der skal bruges til det samlede antal prøver, som skal sekvenseres (antallet af prøver + én ekstra).

Tabel 7. Eksempel på fortynding af sekvenseringsprimere

Komponent	Volumen/prøve (µl)	Volumen til 9 + 1 reaktioner (µl)
Sekvenseringsprimer KRAS 12/13 eller Sekvenseringsprimer KRAS 61	0,8	8
PyroMark- afhærdningsbuffer	24,2	242
Volumen i alt	25	250

2. Tilsæt 25 µl fortyndet sekvenseringsprimer i hver brønd på PyroMark Q24-pladen i henhold til kørselsopsætningen (se "Protokol 1: Kørselsopsætning for PyroMark Q24-systemet", side 15).

Bemærk: Lad én af PyroMark Q24-pladeholderne (leveres med PyroMark Q24-vakuumarbejdsstationen) være ved stuetemperatur (15–25 °C), og brug den som underlag under klargøring og flytning af pladen.

3. Anbring PCR-pladen (eller strips) fra protokol 3 og PyroMark Q24-pladen på arbejdsbordet (figur 2).

Bemærk: Kontroller, at pladen vender samme vej, som da prøverne blev isat.




Figur 2. Placering af PCR-plade (eller strips) og PyroMark Q24-plade på vakuumarbejdsstationen.

4. Sæt vakuum på værktøjet ved at åbne på vakuumkontakten.
5. Sænk forsigtigt filterproberne på vakuumværktøjet ned i PCR-pladen (eller strips) for at opfange kuglerne, der indeholder immobiliseret skabelon. Hold proberne på plads i 15 sekunder. Vær forsigtig, når vakuumværktøjet samles op.

Bemærk: Sepharose-kugler sedimenterer hurtigt. Opfangning af kuglerne skal ske umiddelbart efter omrystning.

Hvis der er gået mere end 1 minut, siden pladen (eller strips) blev rystet, rystes igen i 1 minut, før kuglerne opfanges.

6. Overfør vakuumværktøjet til beholderen med 40 ml 70 % ethanol (figur 2). Skyl filterproberne i 5 sekunder.
7. Overfør vakuumværktøjet til beholderen med 40 ml denatureringsopløsning (figur 2). Skyl filterproberne i 5 sekunder.
8. Overfør vakuumværktøjet til beholderen med 50 ml vaskebuffer (figur 2). Skyl filterproberne i 10 sekunder.
9. Løft vakuumværktøjet op og tilbage over 90° lodret i 5 sekunder for at dræne væsken fra filterproberne (figur 3).

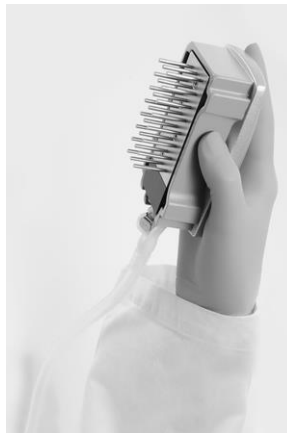

Figur 3. Illustration af vakuumværktøjet løftet til over 90° lodret.

10. Hold vakuumværktøjet over PyroMark Q24-pladen, og sluk for vakuumkontakten på værktøjet (Off).
11. Frigør kuglerne i PyroMark Q24-pladen ved at sænke filterproberne ned i den fortyndede sekventeringsprimer og bevæge værktøjet forsigtigt fra side til side.
Bemærk: Pas på ikke at beskadige overfladen på PyroMark Q24-pladen ved at ridse den med filterproberne.
12. Overfør vakuumværktøjet til beholderen med rektificeret vand (figur 2), og ryst værktøjet i 10 sekunder.
13. Vask filterproberne ved at sænke proberne ned i rektificeret vand (figur 2) og sætte vakuum på. Skyl filterproberne med 70 ml rektificeret vand.

- 14. Løft vakuumværktøjet op og tilbage over 90° lodret i 5 sekunder for at dræne væsken fra filterproberne (figur 3).**
- 15. Luk vakuumkontakten på værktøjet (Off), og sæt vakuumværktøjet i parkeringsstilling (P).**
- 16. Sluk for vakuumpumpen.**

Bemærk: Når arbejdsdagen er slut, skal flydende affald og eventuelle resterende opløsninger kasseres, og PyroMark Q24-vakuumarbejdsstationen skal kontrolleres for støv og spild. Se bilag B, side 49).
- 17. Opvarm PyroMark Q24-pladen med prøverne ved 80 °C i 2 minutter ved hjælp af den foropvarmede PyroMark Q24-pladeholder.**
- 18. Fjern PyroMark Q24-pladen fra den varme pladeholder, og anbring den på den anden PyroMark Q24-pladeholder, som blev opbevaret ved stuetemperatur (15–25 °C), for at lade prøverne køle af til stuetemperatur i 10–15 minutter.**
- 19. Fortsæt med "Protokol 5: Kørsel af PyroMark Q24-systemet", side 26.**

Protokol 5: Kørsel af PyroMark Q24-systemet

Denne protokol beskriver klargøring og isætning af PyroMark Gold Q24-reagenser i PyroMark Q24-beholderen samt start og afslutning af en kørsel på PyroMark Q24. Detaljerede oplysninger om opsætning af en kørsel findes i PyroMark Q24-håndbogen.

Vigtig anvisning før start

- Rapporten "Pre Run Information" (Information før kørsel), der findes i menuen "Tools" (Funktioner; se "Protokol 1: Kørselsopsætning for PyroMark Q24-systemet", side 15), indeholder information om den mængde nucleotider samt de enzym- og substratbufferne, som er nødvendige til en bestemt kørsel.

Ting, der skal gøres før start

- Tænd for PyroMark Q24. Tænd/sluk-knappen er placeret bag på instrumentet.

Procedure


1. **Opløs hver af de frysetørrede enzym- og substratblandinger i 620 μ l vand (H_2O , medfølger).**
2. **Bland ved at slynge hætteglasset forsigtigt rundt.**

Bemærk: Må ikke vortexes!

Bemærk: For at sikre, at blandingen er helt opløst, skal den stå ved stuetemperatur (15–25 °C) i 5–10 minutter. Sørg for, at opløsningen ikke er uklar, før PyroMark Q24-beholderen fyldes op. Hvis reagenserne ikke skal bruges med det samme, skal reagenshætteglassene lægges på is* eller sættes i køleskab.

3. **Lad reagenserne og PyroMark Q24-beholderen nå stuetemperatur (20–25 °C).**
4. **Anbring PyroMark Q24-beholderen, så etiketten vender ind mod dig.**
5. **Isæt PyroMark Q24-beholderen med de korrekte mængder nucleotider samt enzym- og substratblandinger som vist i figur 4.**
Sørg for, at der ikke overføres nogen luftbobler fra pipetten til beholderen.

* Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (safety data sheets, SDSs), som kan fås hos den pågældende leverandør.

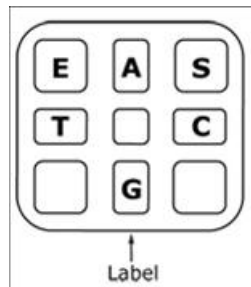

Figur 4. Illustration af PyroMark Q24-beholderen set oppefra. Forklaringerne svarer til etiketten på reagenshætteglassene. Tilføj enzymblanding (E), substratblanding (S) og nucleotider (A, T, C, G) i overensstemmelse med den volumeninformation, der er oplyst i rapporten "Pre Run Information" (Information før kørsel), som findes i menuen "Tools" (Funktioner) ved kørselsopsætningen.

6. **Åbn beholderåbningen, og isæt den fyldte reagensbeholder. Etiketten skal vende udad. Skub beholderen helt ind, og tryk den derefter nedad.**
7. **Kontrollér, at linjen er synlig foran beholderen, og luk lågen.**
8. **Åbn pladeholderrammen, og sæt pladen på varmeblokken.**
9. **Luk den ramme, der holder pladen, og instrumentets låg.**
10. **Sæt USB-nøglen (med kørselsfilen) i USB-porten på instrumentets forside.**
Bemærk: Tag ikke USB-nøglen ud, før kørslen er afsluttet.
11. **Vælg "Run" (Kør) i hovedmenuen (ved hjælp af skærmknapperne ▲ og ▼) og tryk på "OK".**
12. **Vælg kørselsfilen ved hjælp af skærmknapperne ▲ og ▼.**
Bemærk: For at se indholdet af en mappe markeres mappen, og der trykkes på "Select" (Vælg). For at vende tilbage til det foregående billede trykkes på "Back" (Tilbage).
13. **Når kørselsfilen er valgt, trykkes på "Select" (Vælg) for at starte kørslen.**
14. **Når kørslen er afsluttet, og instrumentet bekræfter, at kørselsfilen er gemt på USB-nøglen, trykkes på "Close" (Luk).**
15. **Fjern USB-nøglen.**
16. **Åbn instrumentlåget.**
17. **Åbn beholderåbningen, og tag reagensbeholderen ud ved at løfte den op og trække den ud.**
18. **Luk lemmen.**
19. **Åbn den ramme, der holder pladen, og tag pladen ud fra varmeblokken.**
20. **Luk den ramme, der holder pladen, og instrumentets låg.**
21. **Kassér pladen, og rengør beholderen i henhold til instruktionerne i produktarket til beholderen.**

22. Analysér kørslen i henhold til "Protokol 6: Analyse af en PyroMark Q24-kørsel", side 28.

Protokol 6: Analyse af en PyroMark Q24-kørsel

Denne protokol beskriver mutationsanalyse for en afsluttet KRAS-kørsel ved hjælp af PyroMark Q24-software.

Procedure


1. Sæt USB-nøglen med den behandlede kørselsfil i USB-porten på computeren.
2. Flyt kørselsfilen fra USB-nøglen til den ønskede placering på computeren ved hjælp af Windows Stifinder.
3. Åbn kørselsfilen i AQ-tilstand i PyroMark Q24-softwaren ved enten at vælge "Open" (Åbn) i menuen "File" (Filer) eller dobbeltklikke på filen (👉) i genvejsbrowseren.
4. Der findes 2 metoder til analyse af kørslen. Hvis der skal bruges KRAS Plug-in Report, skal du gå til trin 5. Hvis der skal bruges den integrerede AQ-analyse i PyroMark Q24-systemet, skal du gå til trin 6.

Bemærk: Vi anbefaler på det kraftigste, at man bruger KRAS Plug-in'en Report til fortolkning af resultaterne. KRAS Plug-in'en Report fås ved henvendelse via e-mail til pyro.plugin@qiagen.com. Denne rapport sikrer, at de respektive LOD-værdier (tabel 8) og forskellige "Sequences to Analyze" (Sekvenser, der skal analyseres) bruges til automatisk at påvise alle mutationer.

5. Sådan bruges KRAS Plug-in Report:

Vælg "AQ Add On Reports" (AQ-tilføjelsesrapporter), "KRAS" og "Codon 12 and 13" (Codon 12 og 13) eller "Codon 61" i menuen

“Reports” (Rapporter) for at oprette en rapport.

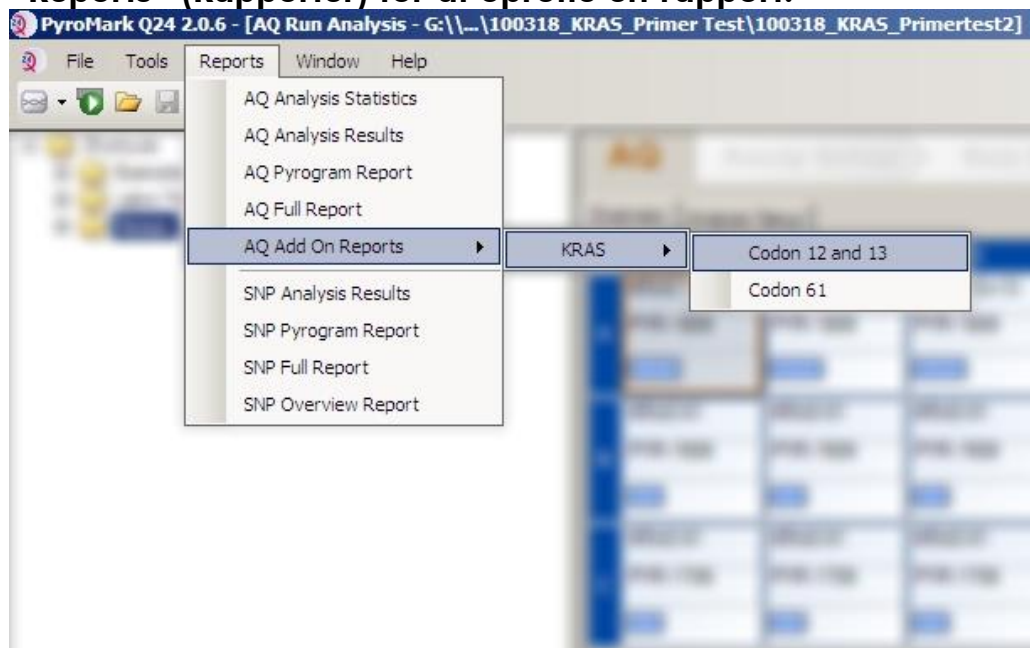

Figur 5. Skærmen AQ Run Analysis (AQ-kørselsanalyse).

Brøndene analyseres automatisk for samtlige mutationer, hvor der er angivet en LOD i tabel 8. Resultaterne præsenteres i en oversigtstabel (figur 6) efterfulgt af de detaljerede resultater, som inkluderer pyrogrammer og analysekvalitet.

Summary

NOTE: Only the mutation with the highest frequency is reported.

Well	Sample ID	Result	Frequency [% units]	Nucleotide Substitution	Amino Acid Substitution	Info
A1	106506B1	Mutation	28.8	GGT>AGT	G12S	
A2	1090814B	Wildtype				
A3	110456B2	Potential low level mutation	2.3	GGT>AGT	G12S	⚠
A4	110457B2	Wildtype				
A5	110462A2	Wildtype				
A6	110486A2	Mutation	24.9	GGT>GCT	G12A	
A7	111207A2	Mutation	31.6	GGT>GTT	G12V	
A8	111555A2	Mutation	39.7	GGT>GAT	G12D	
B1	111565A2	Mutation	37.5	GGT>GAT	G12D	
B2	111667A2	Mutation	26.7	GGT>GTT	G12V	
B3	111670A2	Wildtype				

⚠ See detailed results for further explanation.

Figur 6. Tabellen med resultatoversigt.

6. Sådan bruges AQ-analysen:

Klik på en af analyseknapperne for at analysere kørslen og få et overblik over resultaterne.



Analysér alle brønde.



Analysér den markerede brønd.

Analyseresultaterne (allelfrekvenser) og kvalitetsvurderingen vises over den variable position i Pyrogram[®]-sporingen. Yderligere oplysninger om analyse af en kørsel findes i *PyroMark Q24 User Manual*.

Vælg "AQ Full Report" (Fuld AQ-rapport) eller "AQ Analysis Results" (AQ-analyseresultater) i menuen "Reports" (Rapporter) for at oprette en rapport.

Bemærk: De hyppigste mutationer i KRAS findes ved nucleotid 35 (anden base i codon 12). "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) for analysen af KRAS-codon 12 og 13 som defineret i analyseopsætningen fokuserer derfor som standard på mutationer ved denne position (se bilag A, side 46). Hvis en prøve indeholder en mutation ved nucleotid 34 (første base i codon 12), kan "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) ændres, så mutationsstatus også analyseres ved denne position som beskrevet i bilag A. "Sequence to Analyze" kan ligeledes ændres for analysen af KRAS-codon 61 som beskrevet i bilag A.

Opdaterede hyppigheder for mutationer i det humane KRAS-gen i codon 12/13 og codon 61 er gjort tilgængelige online af Sanger Institute på adressen www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/cosmic/.

Bemærk: For at opnå pålidelige resultater anbefaler vi enkelte spidshøjder på over 30 RLU. "Required peak height for passed quality" (Påkrævet spidshøjde til godkendt kvalitet) skal indstilles til 30 RLU under analyseopsætningen (se bilag A og PyroMark Q24-håndbogen).

Bemærk: Brug rapporten "AQ Analysis Results" (AQ-analyseresultater) til dokumentation og fortolkning af allelekvantificering. De viste antal i pyrogrammet er afrundede og viser ikke den nøjagtige kvantificering.

Bemærk: Pyrogrammet skal altid sammenlignes med histogrammet, som kan vises ved at højreklikke i pyrogramvinduet. De målte spidser skal svare til højden af søjlerne i histogrammet.

Ny analyse af prøver, hvor der ikke blev påvist mutationer i nucleotid 35 (codon 12) eller 183 (codon 61), eller hvor kvalitetsvurderingen endte med "Check" (Kontrollér) eller "Failed" (Ikke godkendt).

Vi anbefaler på det kraftigste, at alle prøver, hvor der ikke blev påvist mutationer med standardindstillingen for "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres), samt prøver, hvor kvalitetsvurderingen endte med "Check" (Kontrollér) eller "Failed" (Ikke godkendt), analyseres igen. Kvalitetsvurderingerne "Check" (Kontrollér) og "Failed" (Ikke godkendt) kan

indikere, at der er en mutation i en anden position end nucleotid 35 eller 183, som resulterer i afvigelser af spidshøjder ved referencedispenseringerne. En spids i en af de første 3 dispenseringer viser f.eks., at der er en mutation ved nucleotid 34.

Analysen kan gentages for mutationer ved nucleotid 34 ved at gå til "Analysis Setup" (Analyseopsætning) og skifte indstillingen for "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) fra GNTGRCGTAGGC til NGTGRCGTAGGC. Klik på "Apply" (Anvend), og klik derefter på "To All" (På alle), når vinduet "Apply Analysis Setup" (Anvend analyseopsætning) vises.

Analysen kan gentages for mutationer ved nucleotid 182 (anden position i codon 61) ved at skifte indstillingen for "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) for codon 61-analysen til følgende sekvens.
CTCTHGACCTG

Analysen kan gentages for mutationer ved nucleotid 181 (anden position i codon 61) ved at skifte indstillingen for "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) for codon 61-analysen til følgende sekvens.
CTCTTSACCTG

Bemærk: Kontrollér, at tærskelværdien for enkelt spidshøjde er indstillet til 30 RLU efter ændring af "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres).

Bemærk: Hvis de målte spidser ikke svarer til højden af søjlerne i histogrammet, og dette ikke kan forklares med sjældne eller uventede mutationer, kan resultatet ikke bruges som basis for en vurdering af mutationsstatus. Det anbefales at køre prøven igen.

Fortolkning af resultater

Fortolkning af analyseresultater og påvisning af lavniveau-mutationer

Det anbefales på det kraftigste, at medtage umethyleret kontrol-DNA i hver enkelt kørsel til sammenligning og kontrol af baggrundsniveauer. Den målte hyppighed for kontrolprøven skal være lavere end end lig med tomgrænsen (LOB).

Alle prøver skal undersøges for så vidt angår påvisningsgrænsen (LOD, se tabel 8) og fortolkes som følger.

- Mutationshyppighed < LOD: Vildtype
- Mutationshyppighed \geq LOD og \leq LOD + 3 procentenheder: Potentiel lavniveau-mutation

Bemærk: Hvis der anvendes Plug-in Report (trin 5 under "Protokol 6:

Analyse af en PyroMark Q24-kørsel", side 28), vises der en advarsel, hvis dette sker.

Prøver med en rapporteret potentiel lavniveau-mutation må kun betragtes som positive for mutationen, hvis de kan bekræftes ved at gentage kørslen i duplikeret form sammen med en prøve med umethyleret kontrol-DNA. Resultatet af begge duplikater skal være \geq LOD og forskelligt fra kontrolprøven. I modsat fald skal prøven vurderes som vildtype.

■ Mutationshyppighed $>$ LOD + 3 procentenheder: Mutation

Hvis der anvendes KRAS Plug-in Report, gøres dette automatisk.

Bemærk: Det anbefales på det kraftigste, at bruge KRAS Plug-in'en Report til fortolkning af resultaterne. Med henblik på en nærmere undersøgelse af prøver med en rapporteret, potentiel lavniveau-mutation, anbefaler vi, at prøven yderligere analyseres manuelt i applikationens software (f.eks. for at sammenligne med kontrolprøvens mutationshyppighed).

Bemærk: En målt hyppighed over LOB i kontrolprøven antyder et højere baggrunds niveau end normalt i den pågældende kørsel, hvilket kan påvirke allelekvantificeringen især i tilfælde af lave mutationsniveauer. I dette tilfælde må de målte hyppigheder i området fra LOD (tabel 8) til LOD + 3 procentenheder ikke anvendes som grundlag for vurderingen af mutationsstatus. Det anbefales et køre prøver med en potentiel lavniveau-mutation igen.

Bemærk: LOB- og LOD-dataene blev udarbejdet ved hjælp af KRAS Plug-in Report-algoritmen. Manuel analyse ved hjælp af PyroMark applikationssoftwaren som beskrevet i protokol 6 (side 28) kan resultere i lidt andre værdier.

Bemærk: Beslutninger om behandling af cancerpatienter må aldrig baseres udelukkende på KRAS-mutationsstatus.

Tabel 8. Fastlagt LOB og LOD for specifikke mutationer


Nukleinsyre-substitution	Aminosyre-substitution	LOB (procentenheder)	LOD (procentenheder)	COSMIC-id* (V42)
Codon 12 (GGT)				
GAT	G12D	0,6	2,2	521
GTT	G12V	0,0	1,0 (7) [†]	520
TGT	G12C	0,5	2,1	516
AGT	G12S	0,4	1,9	517
GCT	G12A	0,7	2,3	522
CGT	G12R	0,3	1,8	518
Codon 13 (GGC)				
GAC	G13D	0,3	1,9	532
Codon 61 (CAA) som analyseret bagfra (TTG)				
GTG	Q61H	0,8	2,8	554
TAG	Q61L	1,2	3,1	553
TCG	Q61R	1,6	3,5	552
ATG	Q61H	0,7	2,6	555
TTC	Q61E	1,2	3,1	550

* Fra Catalogue of Somatic Mutations in Cancer, der er tilgængeligt online på Sanger Institutes websted på www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/cosmic/.


[†] Laveste mutationsniveau i en prøve, der resulterer i en målt hyppighed \geq LOD.

Repræsentative resultater ved brug af den integrerede AQ-analyse i PyroMark Q24-systemet


Figur 7–11 viser repræsentative pyrogramresultater.

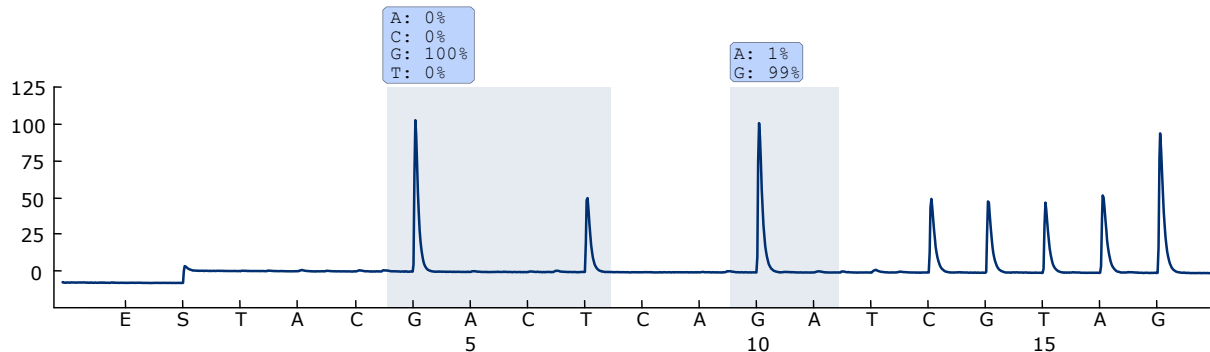


Figur 7. Pyrogramsporing opnået efter analyse af en prøve med vildtype genotype i codon 12 og 13.

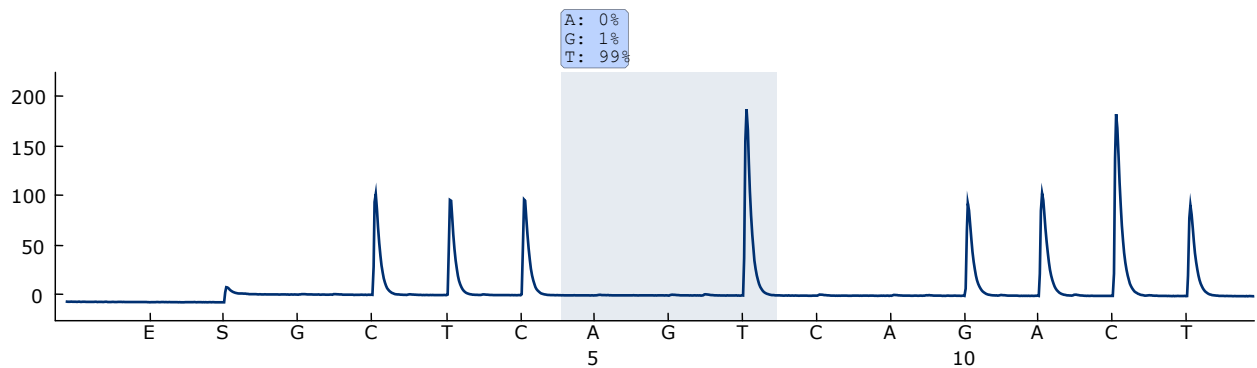


Figur 8. Pyrogramsporing opnået efter analyse af en prøve med vildtype genotype i codon 61.

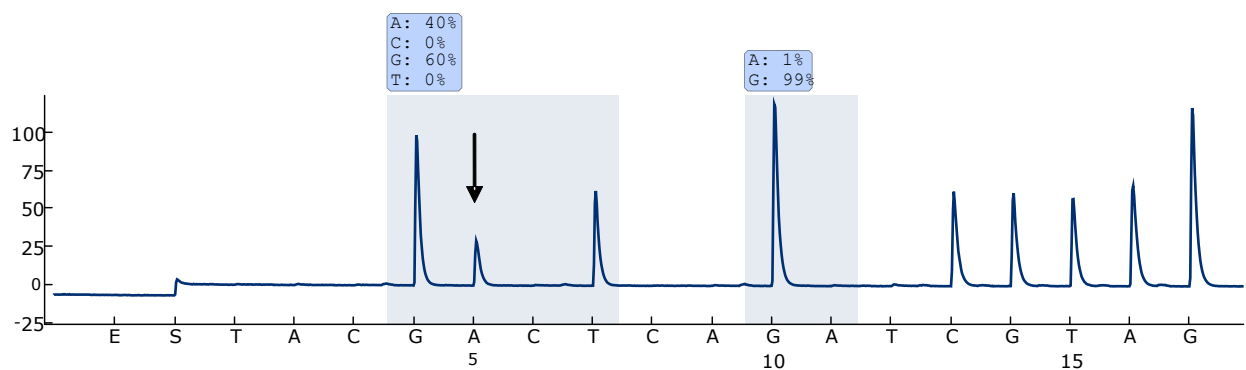

Figur 9. Pyrogramsporing opnået efter analyse af en prøve med en GGT → GAT-mutation i base 2 af codon 12 (nucleotid 35, angivet med en pil).

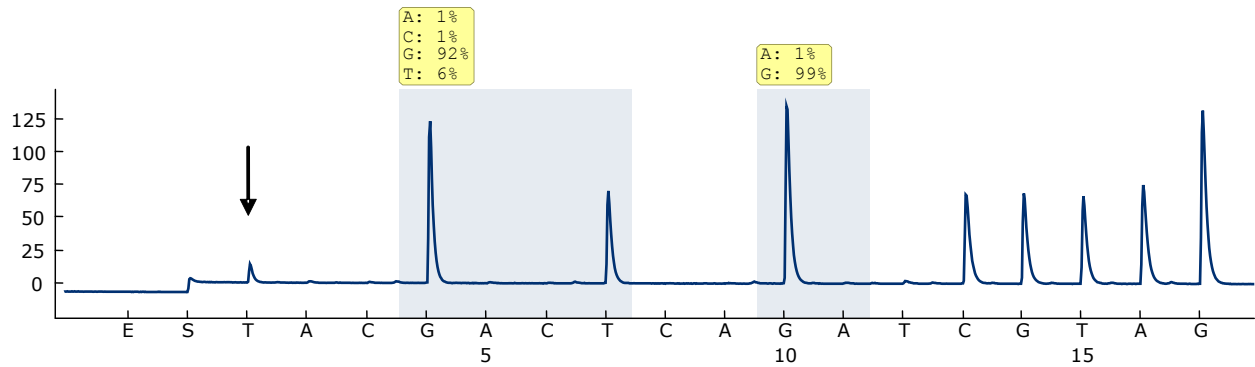

Figur 10. Pyrogramsporing opnået efter analyse af prøver med en GGT → TGT-mutation i base 1 af codon 12 (nucleotid 34, angivet med en pil), hvor "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) er GNTGRCGTAGGC ved base 2 i codon 12 (nucleotid 35). Den gule farve indikerer, at sekvensen er uventet og skal kontrolleres.

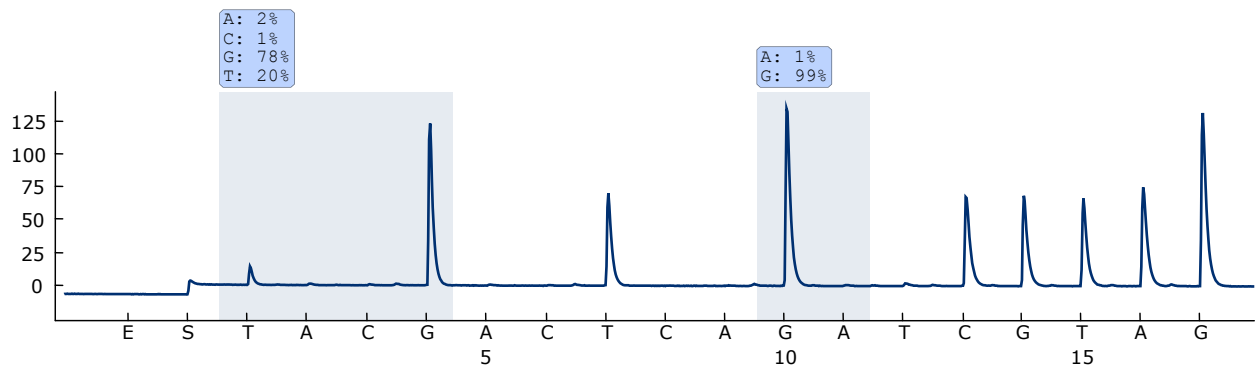

Figur 11. Pyrogramsporing og resultat opnået efter ny analyse af prøven i figur 10. Mutationen GGT → TGT blev analyseret igen, hvor "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) var NGTGRCGTAGGC ved base 1 i codon 12 (nucleotid 34).

Fejludbedringsvejledning

Denne fejlfindingsguide kan være nyttig til at afhjælpe eventuelle problemer. For yderligere information henvises også til siden "Frequently Asked Questions" (Hyppigt stillede spørgsmål) hos vores Technical Support Center: www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx. Derudover svarer personalet fra QIAGENs tekniske service gerne på spørgsmål vedrørende enten informationen og protokollerne i denne håndbog eller prøve- og analyseteknologier (kontaktinformation: se bagsiden, eller besøg www.qiagen.com).

Bemærk: Se *PyroMark Q24 User Manual* for at få en generel fejlfindingsguide for instrumentet.

Kommentarer og forslag

Der er signaler i kontrollen uden skabelon-DNA (negativ kontrol)

- | | |
|----------------------------|--|
| a) Krydstale mellem brønde | Signalet fra én brønd blev påvist i en brønd ved siden af. Undgå at placere prøver med høje signalintensiteter tæt på kontrolbrønde uden skabelon-DNA. |
| b) PCR-kontaminering | Brug sterile pipettespidser med filtre. Materialer som prøver, kontroller og amplikoner skal opbevares og ekstraheres separat fra PCR-reagenserne. |

Der blev påvist en dårlig eller uventet sekvens

- | | |
|---------------------------------|---|
| a) Genomisk DNA af lav kvalitet | Genomisk DNA af lav kvalitet kan få PCR til at mislykkes. Analysér PCR-prøverne ved hjælp af en elektroforeseteknik (f.eks. QIAxcel [®] -systemet eller agarose-gel-elektroforese) |
|---------------------------------|---|

Kommentarer og forslag

Resultatet var "Check" (Kontrollér) eller "Failed" (Ikke godkendt)

- a) Lav spidshøjde Håndteringsfejl under PCR-opsætningen eller prøveforberedelsen inden pyrosekventering kan resultere i lave spidser. Udfør funktionstesten for filterproberne som beskrevet i PyroMark Q24-håndbogen med regelmæssige mellemrum, og udskift filterproberne, når det er påkrævet.
- I tilfælde af en "Check"-advarsel skal pyrogrammet omhyggeligt sammenlignes med histogrammet, som kan vises ved at højreklikke i pyrogramvinduet. Hvis de målte spidser svarer til højden på søjlerne i histogrammet, er resultatet gyldigt. I modsat fald anbefales det at køre prøven igen.
- b) Mutation ikke defineret i "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres): Juster den sekvens, der skal analyseres, i analyseopsætningen (se bilag A, side 46), og analysér kørslen igen.
- c) Uventet, sjælden mutation Hvis kvalitetsvurderingen ender med "Check" (Kontrollér) eller "Failed" (Ikke godkendt), kan det skyldes et uventet spidsmønster. Dette kan indikere en uventet mutation, der ikke analyseres i Plug-in Report. Sådanne prøver bør analyseres manuelt ved hjælp af PyroMark Q24-softwaren og med hensyntagen til uventede mutationer.
- d) Advarsel om store afvigelser af spidshøjder ved dispensering Pyrogrammet skal omhyggeligt sammenlignes med histogrammet, som kan vises ved at højreklikke i pyrogramvinduet. I tilfælde af at de målte spidser ikke svarer til højden af søjlerne i histogrammet, og dette ikke kan forklares med sjældne mutationer, anbefales det at køre prøven igen.

Høj baggrund

- a) Nucleotider opbevaret forkert Nucleotider skal opbevares ved 2–8 °C. Opbevaring ved –15 til –25°C kan give anledning til en forøgelse af baggrunden.

Kommentarer og forslag

- | | |
|--|--|
| b) Kort afkølingstid for prøver forud for pyrosekventeringsanalyse | Lad prøverne stå på en PyroMark Q24-pladeholder ved stuetemperatur i 10–15 minutter. Undgå at afkorte nedkølingstiden. |
| c) Kontaminering af beholder | Sørg for at gøre beholderen grundigt ren som beskrevet i produktarket. Opbevar beholderen beskyttet mod lys og støv. |

Der er ingen signaler i den positive kontrol (umethyleret kontrol-DNA)

- | | |
|---|---|
| a) Utilstrækkelig enzym- eller substratblanding i alle brønde | PyroMark Q24-beholderen skal fyldes i henhold til "Pre Run Information" (Information før kørsel) i menuen "Tools" (Funktioner). |
| b) Reagenser opbevaret eller fortyndet forkert | PyroMark Q24 Gold-reagenserne skal forberedes i henhold til de instruktioner, der leveres med reagenserne. |
| c) Utilstrækkelig aktivering af HotStarTaq DNA-polymerase | HotStarTaq DNA-polymerasen i PyroMark PCR-masterblandingen kræver et aktiveringstrin på 15 minutter ved 95 °C. |
| d) Mislykket PCR eller prøveklargøring | Håndteringsfejl under PCR-opsætningen, programmering af PCR-cyklusanordningen eller prøveforberedelsen inden pyrosekventering kan resultere i manglende signal. Udfør funktionstesten for filterproberne som beskrevet i PyroMark Q24-håndbogen, og udskift filterproberne, når det er påkrævet. Gentag PCR og pyrosekventeringsanalysen. |

Kvalitetskontrol

I overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af *therascreen* KRAS Pyro-kittet efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet.

Begrænsninger

De fremkomne diagnostiske resultater skal fortolkes i forbindelse med andre kliniske fund eller laboratoriefund.

Det er brugerens ansvar at kontrollere systemets egnethed til eventuelle procedurer, der udføres i laboratoriet og ikke er omfattet af QIAGENs ydelsesundersøgelser.

Brugsegenskaber

Tomgrænse og påvisningsgrænse

Tomgrænsen (LOB) og påvisningsgrænsen (LOD) er fastlagt for en række mutationer ved hjælp af blandinger af plasmider (tabel 9). LOB og LOD er fastlagt i henhold til anbefalingerne i CLSI's (Clinical and Laboratory Standards Institute) retningslinje EP17A "Protocol for determination of limits of detection and limits of quantitation; approved guideline". α - og β -fejl (hhv. falsk-positiv- og falsk-negativ-fejl) blev indstillet til 5 %.

LOB-værdierne repræsenterer den målte hyppighed, der opnås med en vildtypeprøve. LOD-værdierne repræsenterer det laveste signal (målt hyppighed), der kan betragtes som positivt for den pågældende mutation.

Mutationen GGT → GTT i codon 12:

For denne mutation var tomme målinger konsekvent tæt på 0 procentenheder ($n=72$), hvilket resulterede i en ikke-gaussiansk fordeling. LOD blev derfor fastlagt ved hjælp af en anden metode i henhold til anbefalingerne i CLSI's retningslinje EP17-A. Det laveste signal, der indikerer tilstedeværelsen af en mutation (LOD) i denne position, blev angivet til 1 procentenhed, hvilket tydeligt er over det konsekvente baseline-niveau på 0 procentenheder. Under analyse af en prøve med et mutationsniveau på 7 % gav 95 % af resultaterne ($n = 89$) et signal, der kan betragtes som positivt (\geq LOD, dvs. ≥ 1 procentenhed).

Tabel 9. Fastlagt LOB og LOD for specifikke mutationer

Nukleinsyre-substitution	Aminosyre-substitution	LOB (procentenheder)	LOD (procentenheder)	COSMIC-id* (V42)
Codon 12 (GGT)				
GAT	G12D	0,6	2,2	521
GTT	G12V	0,0	1,0 (7) [†]	520
TGT	G12C	0,5	2,1	516
AGT	G12S	0,4	1,9	517
GCT	G12A	0,7	2,3	522
CGT	G12R	0,3	1,8	518
Codon 13 (GGC)				
GAC	G13D	0,3	1,9	532
Codon 61 (CAA) som analyseret bagfra (TTG)				
GTG	Q61H	0,8	2,8	554
TAG	Q61L	1,2	3,1	553
TCG	Q61R	1,6	3,5	552
ATG	Q61H	0,7	2,6	555
TTC	Q61E	1,2	3,1	550

* Fra Catalogue of Somatic Mutations in Cancer, der er tilgængeligt online på Sanger Institutes websted på www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/cosmic/.

[†] Laveste mutationsniveau i en prøve, der resulterer i en målt hyppighed \geq LOD.

Bemærk: Disse værdier er baseret på kørsler, hvor blandinger af plasmider, der bærer vildtype- eller mutantsekvensen, blev brugt som skabelon til PCR-amplifikation.


Bemærk: LOB- og LOD-dataene blev udarbejdet ved hjælp af KRAS Plug-in Report-algoritmen. Manuel analyse ved hjælp af PyroMark Q24-applikationssoftwaren som beskrevet i protokol 6 (side 28) kan resultere i lidt andre værdier.

Bemærk: Det anbefales, at metodens egnethed bekræftes i laboratoriet.

Linearitet

Lineariteten blev målt i henhold til CLSI's retningslinje EP6-A "Evaluation of the linearity of quantitative measurement procedures: a statistical approach; approved guideline".

Plasmider, der bærer vildtype- og mutantsekvenser, blev blandet i forhold, der gav følgende mutationsniveauer: 0, 12,5, 25, 37,5 og 50 %. Fire replikater af blandingerne blev placeret i et tilfældigt mønster på en plade og analyseret. Resultaterne for mutationen GGT → TGT i codon 12 blev analyseret ved hjælp af Analyse-it Software, Ltd., (Storbritannien) og fremgår af figur 12.

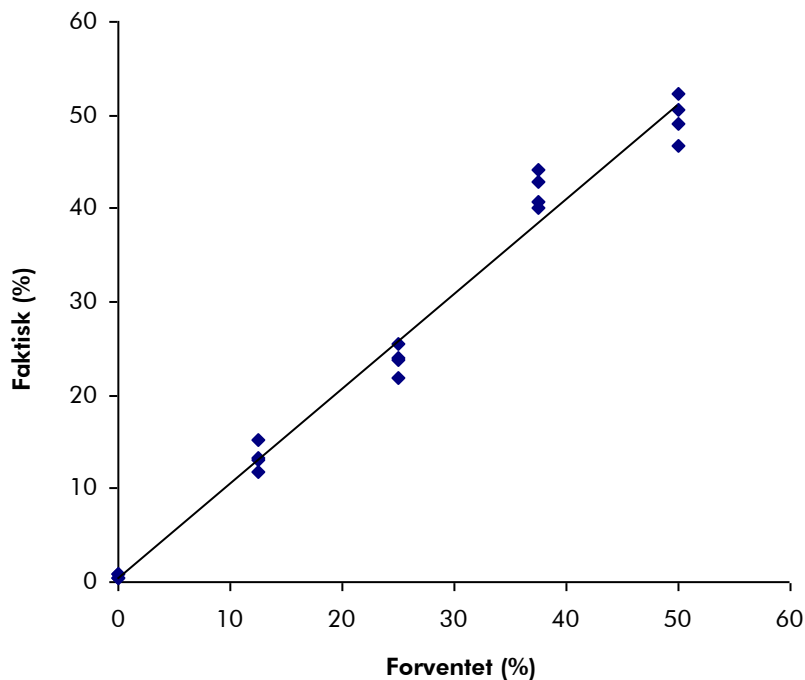

Figur 12. Linearitet for mutationen GGT → TGT i codon 12.

Den samlede repeterbarhed var 1,64 procentenheder, og resultaterne var lineære inden for en tilladt nonlinearitet på 3 procentenheder. Der blev opnået tilsvarende resultater for mutationen GGC → GAC i codon 13.

Laboratorienøjagtighed

Fastlæggelsen af lineariteten for mutationen GGT → TGT i codon 12 blev gentaget af 3 operatører på 3 forskellige dage ved hjælp af forskellige kombinationer af PyroMark Q24-instrumenter og reagenser. Resultaterne af de 3 kørsler fremgår af tabel 12.

Tabel 12. Laboratorienøjagtighed*

% muteret plasmid [†]	Kørsel 1		Kørsel 2		Kørsel 3		Opsummering	
	Gns.	SD	Gns.	SD	Gns.	SD	Gns.	SD
0,0	0,6	0,2	1,7	0,7	0,7	0,2	1,0	0,6
12,5	13,3	1,5	16,2	1,9	14,6	3,0	14,7	1,4
25,0	23,8	1,4	26,8	2,4	26,9	2,9	25,8	1,8
37,5	42,0	1,9	41,7	0,5	38,5	2,6	40,7	2,0
50,0	49,7	2,4	50,5	1,8	49,1	4,8	49,8	0,7

* Alle værdier er anført som procentenheder. SD: Standarddeviation.

[†] Baseret på OD₂₆₀ måling.

Værdierne for laboratorienøjagtighed (SD) var således 0,6–2,0 procentenheder over måleområdet for mutationsniveauet på 0–50 %.

Diagnostisk evaluering

therascreen KRAS Pyro-kittet blev vurderet i sammenligning med DxS KRAS Mutation-kittet. DNA blev ekstraheret fra 100 formalinfikserede, paraffinindstøbte (FFPE) prospektive kolorektale carcintumorprøver og analyseret for at påvise mutationer i codon 12 og 13.

DNA'et til testen blev isoleret ved hjælp af EZ1 DNA Tissue-kittet, og analysen blev udført ved hjælp af *therascreen* KRAS Pyro-kittet på PyroMark Q24-systemet og DxS KRAS Mutation-kittet på ABI PRISM[®] 7900HT SDS.

Af de 100 analyserede prøver kunne mutationsstatus bestemmes i de 91 med DxS KRAS Mutation-kit. Med *therascreen* KRAS Pyro-kittet var det muligt at bestemme mutationsstatus for 94 prøver.

Når prøver, der mislykkedes i et eller begge kit, udelukkes, viste *therascreen* KRAS Pyro-kittet og DxS KRAS Mutation-kittet 100% overensstemmende resultater.

Den diagnostiske følsomhed for *therascreen* KRAS Pyro-kittet var 100 %, og den diagnostiske specificitet var 100 % (tabel 13).

Tabel 13. Analyseresultater for prospektive tumorprøver af kolorektalcancer for codon 12 og 13

		DxS KRAS Mutation-kit			
		Mutant	Vildtype	Ukendt	I alt
<i>therascreen</i> KRAS Pyro- kit	Mutant	33	0	1	34
	Vildtype	0	57	3	60
	Ukendt	0	1	5	6
	I alt	33	58	9	100

Analyse af codon 61

De samme 100 prøver blev analyseret for mutationer i codon 61 ved hjælp af *therascreen* KRAS Pyro-kittet. Kvalitetsvurderingen for codon 61-analysen mislykkedes kun for én prøve. Denne prøve gav også mislykkede resultater under analyserne for codon 12 og 13 med både *therascreen* KRAS Pyro-kittet og DxS, hvilket indikerer, at DNA'ets kvalitet var for dårlig. Den større succesrate for codon 61-analysen indikerer, at den er mindre afhængig af DNA-kvalitet end både *therascreen* KRAS Pyro-kit- og DxS-analysen for codon 12 og 13. Da DxS-analysen ikke søger efter mutationer i codon 61, kan de to analyser ikke sammenlignes direkte.

Der blev påvist mutationer i codon 61 i 4 ud af de 99 prøver. Tre af dem indeholdt hyppige mutationer (CAC, CAT, CTA) i codon 61, mens den fjerde prøve indeholdt mutationer i både codon 60 (GGT→GGA) og codon 61 (CAA→AAA).

Bemærk: I samtlige kørsler, der blev brugt til bestemmelse af ydelseskarakteristika, var signalet over 60 RLU, der rutinemæssigt kan opnås med 10 ng DNA isoleret fra formalinfikseret, paraffinindstøbt (FFPE) væv.

Referencer

QIAGEN opretholder en stor, opdateret online-database over videnskabelige publikationer, der benytter QIAGENS produkter. Omfattende søgemuligheder gør det nemt at finde de artikler, der er brug for, enten ved en enkel søgning på nøgleord eller ved at specificere anvendelse, forskningsområde, titel, etc.

En fuldstændig referenceliste kan fås ved at besøge QIAGENS reference-database online på www.qiagen.com/RefDB/search.asp eller kontakte QIAGENS tekniske service eller den lokale forhandler.

Symboler



Indeholder tilstrækkelige reagenser til <N> prøvepræparationer

<N>



Anvendes inden



In vitro-diagnostisk medicinsk produkt



Katalognummer



Lot-nummer



Materialenummer



Komponenter



Indeholder



Antal



Globalt varenummer



Temperaturbegrænsning



Producent



Se de informationer, der er angivet i håndbogen

Kontaktoplysninger

For teknisk bistand og yderligere information henvises til vores tekniske supportcenter på www.qiagen.com/Support, eller ring til en af QIAGENS tekniske serviceafdelinger eller lokale forhandlere (se bagsiden eller besøg www.qiagen.com).

Bilag A: Opsætning af *therascreen* KRAS Pyro-analyser


I tilfælde af at KRAS Plug-in'en Report er blevet installeret, er der adgang til prædefinerede analyseopsætninger for codon 12 og 13 og codon 61 i genvejsbrowseren i PyroMark Q24-softwaren ved at følge stien "Example Files/PyroMark Setups/KRAS". Det er ikke nødvendigt at udføre følgende trin. KRAS Plug-in'en Report fås ved henvendelse via e-mail til pyro.plugin@qiagen.com.

Vi anbefaler på det kraftigste, at KRAS Plug-in Report bruges i stedet for manuel analyse. Efter installation af plug-in'en, og hver gang der installeres eller opgraderes software på computeren, skal det kontrolleres, at plug-in'en fungerer korrekt, som beskrevet i Plug-In Quick Guide.

Hvis KRAS Plug-in'en Report ikke er blevet installeret, skal analysefilen konfigureres manuelt, inden *therascreen* KRAS Pyro-analysen køres for første gang. Opsæt analysen for KRAS codon 12 og 13 og KRAS codon 61 ved hjælp af PyroMark Q24-softwaren som beskrevet nedenfor.

Procedure

KRAS-codon 12 og 13

1. Klik på  på værktøjslinjen, og vælg "New AQ Assay" (Ny AQ-analyse).
2. Angiv følgende sekvens i "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres).

GNTGRCGTAGGC


Bemærk: De hyppigste mutationer i codon 12 påvises i nucleotid 35 (anden position) ved hjælp af denne analysesekvens. For at analysere, om der er mutationer i nucleotid 34 (første position), skal "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) ændres til følgende sekvens.

NGTGRCGTAGGC


Bemærk: Kontrollér, at tærskelværdien for enkelt spidshøjde er indstillet til 30 RLU.

3. Indtast manuelt følgende "Dispensation Order" (Dispensationsrækkefølge):


TACGACTCAGATCGTAG

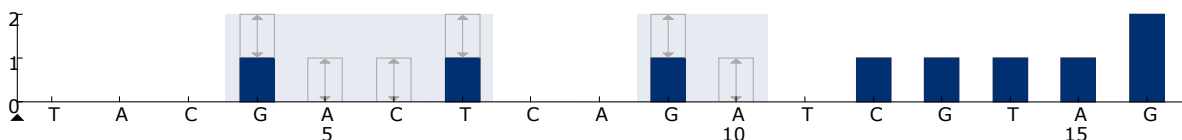


Figur 13. Histogram for codon 12 (nucleotid 35) og 13 (nucleotid 38) med "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) indstillet til GNTGRCGTAGGC.

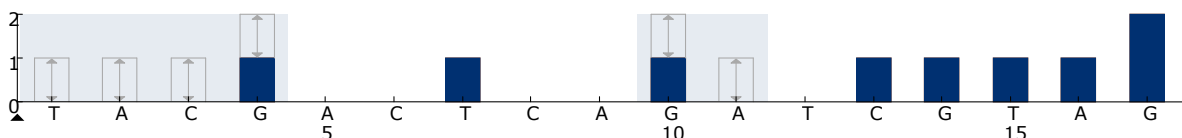

Figur 14. Histogram for codon 12 (nucleotid 34) og 13 (nucleotid 38) med "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) indstillet til NGTGRCGTAGGC.

4. Klik på fanen "Analysis Parameters" (Analyseparametre), og øg "Peak Height Threshold - Required peak height for Passed quality" (Tærskelværdi for spidshøjde – Påkrævet spidshøjde til godkendt kvalitet) til 30.
5. Klik på  på værktøjslinjen, og gem analysen under navnet "KRAScodon 12+13".

KRAS-codon 61

6. Klik på  på værktøjslinjen, og vælg "New AQ Assay" (Ny AQ-analyse).
7. Angiv følgende sekvens i "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres).
CTCDTGACCTG

Bemærk: De hyppigste mutationer i codon 61 påvises i nucleotid 183 (tredje position) ved hjælp af denne analysesekvens. For at analysere, om der er mutationer i nucleotid 182 (anden position), skal "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) ændres til følgende sekvens.


CTCTHGACCTG

For at analysere, om der er mutationer i nucleotid 181 (første position), skal "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) ændres til følgende sekvens.


CTCTTSACCTG

Bemærk: Kontrollér, at tærskelværdien for enkelt spidshøjde er indstillet til 30 RLU.


8. Tilføj manuelt følgende "Dispensation Order" (Dispensationsrækkefølge).
GCTCAGTCAGACT

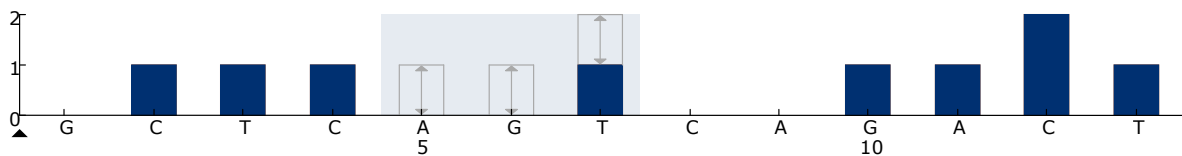


Figur 15. Histogram for codon 61 (nucleotid 183) med "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) angivet til CTCDTGACCTG.

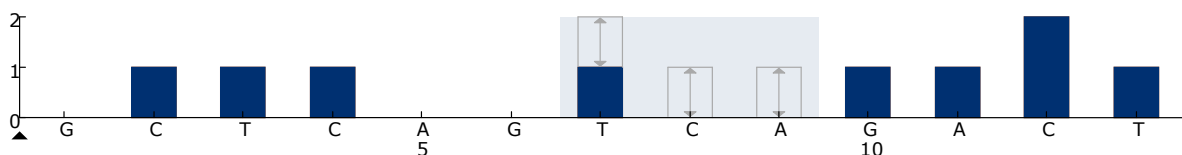


Figur 16. Histogram for codon 61 (nucleotid 182) med "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) angivet til CTCTHGACCTG.

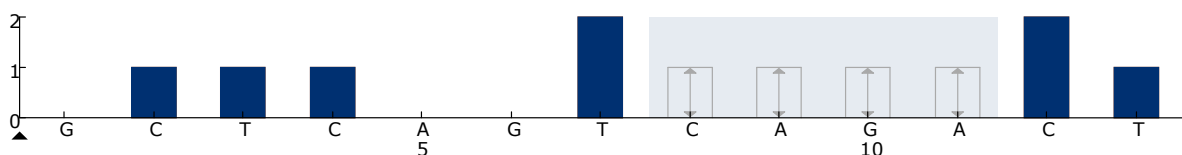

Figur 17. Histogram for codon 61 (nucleotid 182) med "Sequence to Analyze" (Sekvens, der skal analyseres) angivet til CTCTTSACCTG.

9. Klik på fanen "Analysis Parameters" (Analyseparametre), og øg "Peak Height Threshold - Required peak height for Passed quality" (Tærskelværdi for spidshøjde – Påkrævet spidshøjde til godkendt kvalitet) til 30.
10. Klik på  på værktøjslinjen, og gem analysen under navnet "KRAScodon 61".

Bilag B: Tømning af affaldsbeholder og beholdere

ADVARSEL 	Sundhedsfarlige kemikalier <p>Den denatureringsopløsning, der anvendes sammen med vakuum-arbejdsstationen, indeholder natriumhydroxid, som virker irriterende på øjne og hud.</p> <p>Brug altid sikkerhedsbriller, handsker og en laboratoriekittel.</p> <p>Den ansvarlige person (for eksempel laboratorielederen) skal træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at den omgivende arbejdsplads er sikker, og at de, der betjener udstyret, ikke udsættes for sundhedsfarlige niveauer af giftige stoffer (kemiske eller biologiske) som defineret i de relevante sikkerhedsdatablade (SDS'er) eller OSHA*-, ACGIH[†]- eller COSHH[‡]-dokumenter.</p> <p>Udluftning af gasser og bortskaffelse af affald skal ske ifølge alle gældende sundheds- og sikkerhedsregler og love.</p>
--	--

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Arbejdssikkerheds- og Sundhedsadministrationen, USA)

[†] ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikansk Konference for Statslige Industrihygiejnere, USA)

[‡] COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Kontrol af sundhedskadelige stoffer, UK)

Sørg for at overholde alle nationale, regionale og lokale miljøbestemmelser for bortskaffelse af laboratorieaffald.

Vigtig anvisning før start

- Denne protokol kræver rektificeret vand (Milli-Q 18,2 MΩ x cm, www.millipore.com, eller tilsvarende).

Procedure

- 1. Kontrollér, at der ikke sættes vakuum på vakuumværktøjet. Vakuumbkontakten skal være lukket (Off), og der skal være slukket for vakuumpumpen.**
- 2. Kasser eventuelle opløsninger, der er tilbage i beholderne.**
- 3. Skyl beholderne med rektificeret vand, eller udskift dem om nødvendigt.**
- 4. Tøm affaldsbeholderen.**
Bemærk: Hætten kan tages af uden at afbryde slangen.
- 5. Hvis vakuum-arbejdsstationen skal rengøres (f.eks. for støv eller spild), følges anvisningerne i *PyroMark Q24 User Manual*.**

Bestillingsinformation

Produkt	Indhold	Kat. nr.
<i>therascreen</i> KRAS Pyro Kit (24)	Til 24 reaktioner på PyroMark Q24-systemer: Sekvenseringsprimere, PCR-primere, umetyleret kontrol-DNA, PyroMark PCR-masterblanding, CoralLoad-koncentrat, PyroMark-bindingsbuffer, PyroMark-afhædningsbuffer, PyroMark-denatureringsopløsning, PyroMark-vaskebuffer, enzymblanding, substratblanding, dATP α S, dCTP, dGTP, dTTP og H ₂ O	971460
PyroMark Q24 MDx	Sekvensbaseret påvisningsplatform til parallel pyrosekvensering af 24 prøver	9001513
PyroMark Q24	Sekvensbaseret påvisningsplatform til parallel pyrosekvensering af 24 prøver	9001514
PyroMark Q24 MDx Vacuum Workstation*	Vakuumarbejdsstation (220 V) til parallel klargøring af 24 prøver fra PCR-produkt til enkeltstrenget skabelon	9001517* 9001515†
PyroMark Q24 Vacuum Workstation	Vakuumarbejdsstation (220 V) til parallel klargøring af 24 prøver fra PCR-produkt til enkeltstrenget skabelon	9001518
PyroMark Q24 MDx Software	Program	9019063
PyroMark Q24 Software	Analysesoftware	9019062
Tilbehør		
PyroMark Q24 Plate (100)	Sekvensreaktionsplade med 24 brønde	979301
PyroMark Q24 Cartridge (3)	Beholdere til dispensering af nucleotider og reagenser	979302

* Kun Storbritannien.

† Resten af verden.

Produkt	Indhold	Kat. nr.
PyroMark Vacuum Prep Filter Probe (100)	Genanvendelige filterprober til PyroMark-vakuumarbejdsstation Q96 og Q24	979010
PyroMark Control Oligo	Til installationskontrol af systemet	979303
PyroMark Q24 Validation Oligo	Til ydelseskontrol af systemet	979304
Relaterede produkter		
QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (50)	Til 50 DNA-forberedelser: 50 QIAamp MinElute®-kolonner, proteinase K, buffere og indsamlingsrør (2 ml)	56404
EZ1 DNA Tissue Kit (48)	Til 48 forberedelser: Reagensbeholdere (væv), engangsfilterspidser, engangsspidsholdere, prøverør (2 ml), vaskerør (1,5 ml), buffer G2, proteinase K	953034
QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit	Til 50 forberedelser: QIAamp Mini Spin-kolonner, buffere, reagenser, rør, VacConnectors	61104

For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN kit-håndbog eller brugermanual. QIAGEN kit-håndbøger og brugermanualer kan fås via www.qiagen.com eller kan rekvireres hos QIAGEN Technical Services eller den lokale distributør.

Denne side er tom med vilje

Denne side er tom med vilje

Denne side er tom med vilje

I lande, hvor det kan gøres gældende:

MED KØBET AF DETTE PRODUKT ERHVERVER BRUGEREN RET TIL AT BRUGE DET TIL UDFØRELSE AF DIAGNOSTISKE YDELSER I FORBINDELSE MED HUMAN IN VITRO-DIAGNOSTIK. KØBET GIVER INGEN GENERELLE PATENT- ELLER ANDRE LICENSRETTIGHEDER END DENNE SPECIFIKKE RET TIL BRUG.

Varemærker: QIAGEN[®], QIAamp[®], QIAxcel[®], BioRobot[®], CoralLoad[®], EZ1[®], HotStarTaq[®], MinElute[®], Pyro[®], Pyrogram[®], PyroMark[®], Pyrosequencing[®], *therascreen*[®] (QIAGEN Group); ABI PRISM[®] (Life Technologies Corporation); Analyse-it[®] (Analyse-it Software, Ltd.); Milli-Q[®] (Millipore Corporation); Sepharose[®] (GE Healthcare); Variomag[®] (Florida Scientific Services, Inc.); Windows[®] (Microsoft Corporation).

Aftale om begrænset licens

Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af *therascreen* KRAS Pyro-kittet accepterer følgende vilkår:

1. *therascreen* KRAS Pyro-kittet må kun bruges i overensstemmelse med håndbogen til *therascreen* KRAS Pyro-kittet og kun med de komponenter, der er i kittet. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkludere komponenterne i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i håndbogen til *therascreen* KRAS Pyro-kittet og yderligere protokoller, som fås på www.qiagen.com.
2. Udover de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit, og/eller brugen af det, ikke overtræder tredjeparts rettigheder.
3. Dette kit og dets komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, genoprettes eller videresælges.
4. QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet.
5. Køberen og brugeren af kittet indvilliger i ikke at tage, eller lade andre tage, skridt der kunne føre til, eller fremme, handlinger der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbuddene i denne begrænsede licensaftale ved enhver domstol og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med kittet og/eller komponenterne deri.

For opdaterede licensbetingelser henvises til www.qiagen.com.

© 2015 QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes.

www.qiagen.com

Australia ■ Orders 1-800-243-800 ■ Fax 03-9840-9888 ■ Technical 1-800-243-066

Austria ■ Orders 0800-28-10-10 ■ Fax 0800-28-10-19 ■ Technical 0800-28-10-11

Belgium ■ Orders 0800-79612 ■ Fax 0800-79611 ■ Technical 0800-79556

Brazil ■ Orders 0800-557779 ■ Fax 55-11-5079-4001 ■ Technical 0800-557779

Canada ■ Orders 800-572-9613 ■ Fax 800-713-5951 ■ Technical 800-DNA-PREP (800-362-7737)

China ■ Orders 86-21-3865-3865 ■ Fax 86-21-3865-3965 ■ Technical 800-988-0325

Denmark ■ Orders 80-885945 ■ Fax 80-885944 ■ Technical 80-885942

Finland ■ Orders 0800-914416 ■ Fax 0800-914415 ■ Technical 0800-914413

France ■ Orders 01-60-920-926 ■ Fax 01-60-920-925 ■ Technical 01-60-920-930 ■ Offers 01-60-920-928

Germany ■ Orders 02103-29-12000 ■ Fax 02103-29-22000 ■ Technical 02103-29-12400

Hong Kong ■ Orders 800 933 965 ■ Fax 800 930 439 ■ Technical 800 930 425

Ireland ■ Orders 1800 555 049 ■ Fax 1800 555 048 ■ Technical 1800 555 061

Italy ■ Orders 800-789-544 ■ Fax 02-334304-826 ■ Technical 800-787980

Japan ■ Telephone 03-6890-7300 ■ Fax 03-5547-0818 ■ Technical 03-6890-7300

Korea (South) ■ Orders 080-000-7146 ■ Fax 02-2626-5703 ■ Technical 080-000-7145

Luxembourg ■ Orders 8002-2076 ■ Fax 8002-2073 ■ Technical 8002-2067

Mexico ■ Orders 01-800-7742-639 ■ Fax 01-800-1122-330 ■ Technical 01-800-7742-436

The Netherlands ■ Orders 0800-0229592 ■ Fax 0800-0229593 ■ Technical 0800-0229602

Norway ■ Orders 800-18859 ■ Fax 800-18817 ■ Technical 800-18712

Singapore ■ Orders 1800-742-4362 ■ Fax 65-6854-8184 ■ Technical 1800-742-4368

Spain ■ Orders 91-630-7050 ■ Fax 91-630-5145 ■ Technical 91-630-7050

Sweden ■ Orders 020-790282 ■ Fax 020-790582 ■ Technical 020-798328

Switzerland ■ Orders 055-254-22-11 ■ Fax 055-254-22-13 ■ Technical 055-254-22-12

UK ■ Orders 01293-422-911 ■ Fax 01293-422-922 ■ Technical 01293-422-999

USA ■ Orders 800-426-8157 ■ Fax 800-718-2056 ■ Technical 800-DNA-PREP (800-362-7737)

