

2019 년 4 월

QIAstat-Dx[®] Respiratory Panel 사용 지침(안내서)



버전 2
체외 진단용

IVD

CE

REF



R1

691211

QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden

목차

- 용도 4
- 요약 및 설명 5
 - QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 설명 5
- 병원균 정보 7
- 절차의 원리 9
 - 과정 설명 9
 - 검체 수집 및 카트리지 로드 11
 - 검체 준비, 핵산 증폭, 검출 13
- 제공물 14
 - 키트 내용물 14
- 필요하지만 제공되지 않는 품목 15
- 경고 및 예방조치 15
 - 안전성 정보 15
- 시약 보관 및 취급 18
- 시료 취급, 저장 및 준비 18
- 절차 19
 - 내부 대조군 19
 - 프로토콜: 건식 먼봉 표본 검체 20
 - 프로토콜: 수송 배지 액체 검체 31
- 결과의 해석 44
 - 결과 보기 44
 - 결과 해석 53

| | |
|---------------------------|----|
| 내부 대조군 해석 | 54 |
| 정도 관리 | 55 |
| 제한 | 55 |
| 성능 특징 | 57 |
| 임상적 성능 | 57 |
| 분석 성능 | 64 |
| 부록 | 85 |
| 부록 A: 분석항목 정의 파일 설치 | 85 |
| 부록 B: 용어 | 88 |
| 부록 C: 보증 면책 조항 | 90 |
| 참고 문헌 | 91 |
| 기호 | 92 |
| 주문 정보 | 93 |
| 문서 개정 이력 | 94 |

용도

QIAstat-Dx® Respiratory Panel 은 바이러스 또는 박테리아 핵산의 존재에 대한 호흡기 감염이 의심되는 환자로부터 채취한 비인두암 면봉 표본(Nasopharyngeal Swab, NPS) 검체를 분석하기 위한 정성적 검사입니다. QIAstat-Dx Respiratory Panel 은 건식 면봉 표본 및 수송 배지 액체 검체를 모두 허용합니다. 분석항목은 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에서 통합된 핵산 추출 및 다중 실시간 RT-PCR 검출을 위해 사용하도록 설계되었습니다.

다음 병원체가* QIAstat-Dx Respiratory Panel 에서 검출 및 구별될 수 있습니다. 인플루엔자 A, 인플루엔자 A 아형 H1N1/2009, 인플루엔자 A 아형 H1, 인플루엔자 A 아형 H3, 인플루엔자 B, 코로나바이러스 229E, 코로나바이러스 HKU1, 코로나바이러스 NL63, 코로나바이러스 OC43, 파라인플루엔자 바이러스 1, 파라인플루엔자 바이러스 2, 파라인플루엔자 바이러스 3, 파라인플루엔자 바이러스 4, 호흡기 세포융합 바이러스 A/B, 인간 메타뉴모바이러스 A/B, 아데노바이러스, 보카바이러스, 리노바이러스/엔테로바이러스, *Mycoplasma pneumoniae*, *Legionella pneumophila* 및 *Bordetella pertussis*.

QIAstat-Dx Respiratory Panel 로부터의 결과는 모든 관련 임상 및 실험실 소견의 맥락에서 해석되어야 합니다.

분석항목 성능 특징은 호흡기 증상을 보인 사람들을 대상으로만 확립되었습니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel 은 전문가 전용이며 자체 검사용이 아닙니다.

체외 진단용.

* 엔테로바이러스와 리노바이러스는 둘 다 QIAstat-Dx Respiratory Panel 에서 검출되지만 구별되지 않습니다.

요약 및 설명

QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 설명

QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 는 호흡기 병원체 검출을 위한 완전 자동화 분자 분석이 가능한 성능을 제공하는 일회용 플라스틱 장치입니다. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 기본 기능에는 호흡기 건식 면봉 표본(Copan® FLOQSwabs®, 카탈로그 번호 503CS01) 및 수송 배지 액체 검체와의 호환성, 검사와 완벽한 무인 작업을 위해 필요한 사전 로드된 시약의 밀폐 차단이 포함되어 있습니다. 모든 검체 준비 및 분석항목 검사 단계는 카트리지 내에서 수행됩니다.

검사 실행 완료를 위해 필요한 모든 시약은 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 사전 로드되어 있으며 카트리지에 자체 내장됩니다. 사용자는 일체 시약과 접촉하거나 시약을 조제를 할 필요가 없습니다. 검사 동안, 시약은 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 분석 모듈 내 카트리지 내부에서 공압으로 작동하는 미세유체에 의해 처리되며 액추에이터와 직접적으로 접촉하지 않습니다. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 은 흡입 및 배출 공기 모두에 대해 공기 필터를 갖추고 있어, 환경을 보다 보호하고 있습니다. 검사 후, 카트리지는 항상 밀폐되어 닫힌 채로 유지되므로 안전한 폐기에 큰 도움이 됩니다.

카트리지 내에서, 이송 챔버를 통해 의도한 목적지로 검체 및 유체를 전달하기 위해 공압을 사용하여 여러 단계가 순차적으로 자동 수행됩니다.

검체가 들어 있는 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 삽입한 후, 다음 분석 단계가 자동으로 수행됩니다.

- 내부 대조군의 재부유
- 기계적 및/또는 화학적 방법을 사용한 세포 용해
- 막 기반 핵산 정제
- 정제된 핵산을 동결건조 마스터 혼합물 시약과 혼합
- 용출물/마스터 혼합물의 정해진 분취량을 다른 반응 챔버로 이송
- 각 반응 챔버 내 다중 실시간 RT-PCR 검사의 수행

참고: 표적 피분석물의 검출을 나타내는 형광성 증가가 각 반응 챔버 내에서 직접 검출됩니다.



그림 1. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 및 그 기능에 대한 개요

병원균 정보

급성 호흡기 감염은 박테리아 및 바이러스를 포함해 다양한 병원체에 의해 유발될 수 있으며, 일반적으로 거의 구별할 수 없는 임상 징후 및 증상을 동반합니다. 잠재적 병원체의 존재 또는 부재에 대한 빠르고 정확한 판별은 치료, 입원, 감염 관리 및 환자가 일과 가정으로 복귀하는 것과 관련하여 시의적절한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 또한 이는 항균제 관리 및 기타 중요한 공중 보건 이니셔티브 개선에 크게 기여할 수 있습니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 는 호흡기 증상을 유발하는 핵산 추출, 핵산 증폭 및 22 종의 박테리아 및 바이러스(또는 그 아형)의 검출을 위해 필요한 모든 시약이 포함되어 있는 일회용 카트리지입니다. 검사는 소량의 검체 용량 및 최소한의 직접 처리 시간을 필요로 하며 결과는 약 1 시간 이내에 이용 가능합니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel 에서 검출 및 식별 가능한 병원체(및 아형)는 표 1 에 나열되어 있습니다(다음 페이지).

표 1. QIAstat-Dx Respiratory Panel 으로 검출되는 병원체

| 병원체 | 분류(유전체 유형) |
|-------------------------------|----------------|
| 인플루엔자 A | 오르토믹소바이러스(RNA) |
| 인플루엔자 A, 아형 H1N1/2009 | 오르토믹소바이러스(RNA) |
| 인플루엔자 A 아형 H1 | 오르토믹소바이러스(RNA) |
| 인플루엔자 A 아형 H3 | 오르토믹소바이러스(RNA) |
| 인플루엔자 B | 오르토믹소바이러스(RNA) |
| 코로나바이러스 229E | 코로나바이러스(RNA) |
| 코로나바이러스 HKU1 | 코로나바이러스(RNA) |
| 코로나바이러스 NL63 | 코로나바이러스(RNA) |
| 코로나바이러스 OC43 | 코로나바이러스(RNA) |
| 파라인플루엔자 바이러스 1 | 파라믹소바이러스(RNA) |
| 파라인플루엔자 바이러스 2 | 파라믹소바이러스(RNA) |
| 파라인플루엔자 바이러스 3 | 파라믹소바이러스(RNA) |
| 파라인플루엔자 바이러스 4 | 파라믹소바이러스(RNA) |
| 호흡기 세포융합 바이러스 A/B | 파라믹소바이러스(RNA) |
| 인간 메타뉴모바이러스 A/B | 파라믹소바이러스(RNA) |
| 아데노바이러스 | 아데노바이러스(DNA) |
| 보카바이러스 | 파르보바이러스(DNA) |
| 리노바이러스/엔테로바이러스 | 피코르나바이러스(RNA) |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | 박테리아(DNA) |
| <i>Legionella pneumophila</i> | 박테리아(DNA) |
| <i>Bordetella pertussis</i> | 박테리아(DNA) |

참고: 엔테로바이러스와 리노바이러스는 둘 다 QIAstat-Dx Respiratory Panel 에서 검출되지만 구별되지 않습니다.

절차의 원리

과정 설명

QIAstat-Dx Respiratory Panel 을 이용한 진단 검사는 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에서 실행됩니다. 모든 검체 준비 및 분석 단계는 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 의해 자동으로 수행됩니다. 검체 유형에 따라 수동으로 수집되고 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 로드되는 검체들이 있습니다.

옵션 1: 건식 면봉 표본 검체 유형 사용 시 면봉 표본을 면봉 표본 포트에 삽입합니다(그림 2).

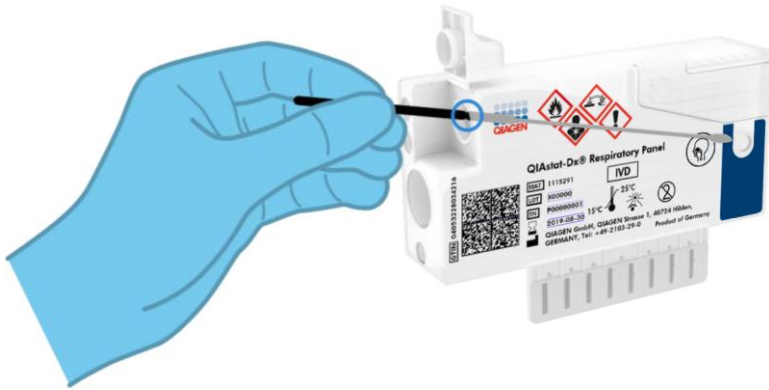


그림 2. 건식 면봉 표본 검체 유형을 면봉 표본 포트에 로드.

옵션 2: 수송 배지 액체 검체를 기본 포트에 분주하기 위해 이동 피펫을 사용합니다(그림 3).

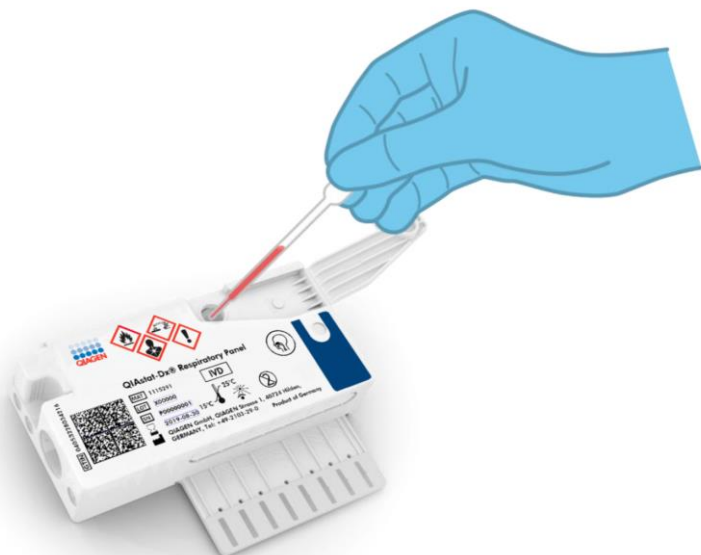


그림 3. 기본 포트에 수송 배지 액체 검체 분주.

검체 수집 및 카트리지 로드

검체 수집 및 이후 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 로의 로드는 생물학적 검체의 안전한 취급에 대해 교육을 받은 직원에 의해 수행되어야 합니다.

다음 단계는 사용자가 개입되며 반드시 사용자가 실행해야 합니다.

1. 비인두암 면봉 표본 검체를 수집합니다.
2. 수송 배지 액체 검체 유형인 경우에만 비인두암 면봉 표본을 수송 배지에 놓습니다.
3. 검체 정보를 수동으로 작성하거나 검체 라벨을 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 상단에 부착합니다.
4. 검체를 수동으로 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 로드합니다.
 - 건식 면봉 표본 검체 유형: 비인두암 면봉 표본 검체를 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 면봉 표본 포트에 삽입합니다.
 - 수송 배지 액체 검체 유형: 포함된 이동 피펫 중 하나를 사용해 검체 300 µl 를 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 기본 포트에 옮깁니다.

중요: 수송 배지 액체 검체를 로드할 때, 사용자는 검체 점검창(아래 이미지 참조)으로 육안 검사를 수행하여 액체 검체가 로드되어 있는지 확인합니다(그림 4, 다음 페이지).



그림 4. 검체 점검창(파란색 화살표).

5. 검체 바코드 및 QiAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 바코드가 QiAstat-Dx Analyzer 1.0 에서 스캔됩니다.
6. QiAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 가 QiAstat-Dx Analyzer 1.0 에 삽입됩니다.
7. QiAstat-Dx Analyzer 1.0 에서 검사가 시작됩니다.

검체 준비, 핵산 증폭, 검출

검체 내 핵산의 추출, 증폭, 검출이 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 의해 자동으로 수행됩니다.

1. 액체 검체는 균일화되고 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 내 용해 챔버에서 세포가 용해됩니다. 용해 챔버에는 고속으로 회전하는 로터가 들어 있습니다.
2. 카오트로픽 염과 알코올이 있는 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 정제 챔버 안에서 실리카 막과의 결합을 통해 핵산을 용해된 검체로부터 정제합니다.
3. 정제된 핵산은 정제 챔버 내 막에서 용출되고 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 건식 화학 챔버 내 동결건조 PCR 화학과 혼합됩니다.
4. 검체와 PCR 시약의 혼합물이 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge PCR 챔버로 분주되며, 이는 동결건조된 분석항목별 프라이머 및 프로브를 포함하고 있습니다.
5. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 은 효과적인 다중 실시간 RT-PCR 을 수행하기 위한 최적 온도 프로필을 생성하고 증폭 곡선을 생성하기 위한 실시간 형광성 측정을 수행합니다.
6. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 소프트웨어가 결과 데이터 및 과정 대조군을 해석하고, 검사 보고서를 제공합니다.

제공물

키트 내용물

| | |
|---|--------|
| QIAstat-Dx Respiratory Panel | |
| 카탈로그 번호 | 691211 |
| 검사 수 | 6 |
| QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge* | 6 |
| Transfer pipettes(이동 피펫)* | 6 |

* 검체 준비, 다중 실시간 RT-PCR 및 내부 대조군을 위해 필요한 모든 시약이 포함된 6 개의 개별 포장된 카트리지.
† QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 액체 검체를 분주하기 위한 6 개의 개별 포장된 이동 피펫.

필요하지만 제공되지 않는 품목

QIAstat-Dx Respiratory Panel 은 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 과 사용하도록 설계되었습니다. 검사를 시작하기 전에, 다음 사항을 이용할 수 있는지 확인합니다.

- 소프트웨어 버전 1.2 이상의 QIAstat-Dx Analyzer 1.0(하나 이상의 작동 모듈 및 하나의 분석 모듈)*
- QIAstat-Dx Analyzer 1.0 사용자 설명서(소프트웨어 버전 1.2 이상에서 사용)
- 작동 모듈에 설치된 Respiratory Panel 에 대한 QIAstat-Dx 최신 분석항목 정의 파일 소프트웨어

경고 및 예방조치

체외 진단용

QIAstat-Dx Respiratory Panel 은 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 사용에 대해 교육을 받은 실험실 전문가가 사용해야 합니다.

안전성 정보

화학물질로 작업할 때 항상 적합한 실험용 가운, 일회용 장갑 및 보안경을 착용합니다. 자세한 정보는 적절한 안전 보건 자료(Safety Data Sheets, SDS)를 참조하십시오. 안전 보건 자료는 www.qiagen.com/safety 에서 온라인 PDF 형식으로 사용할 수 있으며 여기에서 각 QIAGEN® 키트 및 키트 구성품에 대한 SDS 를 찾아서 보고 인쇄할 수 있습니다.

* QIAstat-Dx 소프트웨어 버전 1.2 이상을 실행하는 DiagCORE Analyzer 기기가 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 기기 대신 사용될 수 있습니다.

일회용 파우더 프리 장갑, 실험용 가운, 보안경을 포함하나 이에 국한하지 않고 항상 적절한 개인 보호 장비를 착용합니다. 피부, 눈, 점막을 보호합니다. 검체를 취급할 때는 자주 장갑을 교체합니다.

모든 검체, 사용한 카트리지 및 이송은 감염체를 전파할 수 있는 것으로 간주하고 취급합니다. 항상 Clinical and Laboratory Standards Institute®(CLSI) *직업적 감염으로부터 실험실 작업자 보호, 승인 지침*(Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections, Approved Guidelines)(M29), 또는 다음에 의해 제공되는 기타 적절한 문서와 같은 관련 지침에서 설명되어 있는 안전 주의사항을 준수해야 합니다.

- OSHA®: 산업안전보건청(Occupational Safety and Health Administration)(미국)
- ACGIH®: 미국산업위생사협회(American Conference of Government Industrial Hygienists)(미국)
- COSHH: 건강 유해물질 관리법(Control of Substances Hazardous to Health)(영국)

사용자가 속한 기관의 생물학적 검체 취급에 대한 안전 절차를 준수합니다. 적절한 규정에 따라 검체, QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges, 이동 피펫을 폐기합니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 는 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 안에 검체 준비 및 다중 실시간 RT-PCR 에 필요한 모든 시약이 들어 있는 폐쇄형, 일회용 장치입니다. 유효기간이 경과하였거나 손상된 것으로 보이거나 액체가 유출된 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 는 사용하면 안 됩니다. 사용했거나 손상된 카트리지는 모든 국가, 주 및 현지 보건 안전 규정 및 법률에 따라 폐기합니다.

작업 영역을 청결하고 오염이 없게 유지하기 위해 표준 실험실 절차를 준수합니다. 지침은 미국 질병통제예방센터 및 국립보건원(Centers for Disease Control and Prevention and the National Institutes of Health)의 *미생물학 및 생물의학 연구실의 생물안전*(Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories)과 같은 출판물에 설명되어 있습니다(www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosfty.htm).

다음과 같은 위험 및 예방조치 관련 문장은 QIAstat-Dx Respiratory Panel 의 구성요소에 적용됩니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge



포함: 에탄올, 구아니딘 염산, 구아니딘 티오시아네이트, 이소프로판올, 단백분해효소 K, t-옥틸페녹시폴리에톡시에탄올. 위험! 고인화성 액체 및 증기입니다. 삼키거나 흡입하는 경우 유해합니다. 피부 접촉 시 유해할 수 있습니다. 심각한 피부 화상 및 눈 손상을 야기합니다. 흡입 시 알레르기나 천식 증상 또는 호흡 곤란을 야기할 수 있습니다. 졸음이나 어지러움을 유발할 수 있습니다. 수생 생물에게 장기적으로 지속되는 영향을 미치며 해로울 수 있습니다. 산과 접촉 시 독성 가스를 방출합니다. 기도에 부식을 일으킵니다. 열/스파크/노출 화염/뜨거운 표면에 가까이 두지 않습니다. 흡연하지 않습니다. 먼지/연기/가스/분무/증기/비말을 흡입하지 않도록 합니다. 보호용 장갑/보호복/눈 보호/얼굴 보호대를 착용합니다. 호흡기 보호구를 착용합니다. 눈에 묻은 경우: 물로 몇 분 동안 주의하여 씻어냅니다. 콘택트 렌즈를 끼고 있으며 쉽게 뺄 수 있는 경우 빼냅니다. 계속 씻어냅니다. 노출 또는 우려 시: 즉시 독성 물질 센터 또는 의사에게 연락합니다. 신선한 공기가 있는 곳으로 사람을 옮기고 편히 호흡할 수 있는 상태로 유지합니다.

시약 보관 및 취급

QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 는 건조하면서 청결한 보관 장소에서 실온(15~25°C)에 보관합니다. 실제 사용 전까지 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 또는 이동 피펫을 개별 포장에서 꺼내지 않습니다. 이러한 조건하에서, QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 는 개별 포장에 인쇄된 유효기한까지 보관할 수 있습니다. 유효기한은 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 바코드에도 포함되어 있으며 검사 실행을 위해 기기에 카트리지를 삽입할 때 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 의해 판독됩니다.

시료 취급, 저장 및 준비

비인두암 면봉 표본 검체는 제조업체의 권고 절차에 따라 수집 및 취급해야 합니다.

UTM 시료에서 재부유된 비인두암 면봉 표본(nasopharyngeal swab, NPS)의 권장 보관 조건을 아래에 열거합니다.

- 15~25°C 실온에서 최대 4 시간
- 2~8°C 냉장으로 최대 3 일
- -15~-25°C 냉동으로 최대 30 일

절차

내부 대조군

QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 는 전체 과정 내부 대조군을 포함하고 있으며 이는 적정된 MS2 박테리오파지입니다. MS2 박테리오파지는 건조 형태로 카트리지 안에 들어 있는 단일 가닥 RNA 바이러스이며 검체 로드 시 다시 수화됩니다. 이 내부 대조군 물질은 검체 재부유/균질화, 용해, 핵산 정제, 역전사, PCR 을 포함해 분석 과정의 모든 단계를 검증합니다.

내부 대조군에 대한 양성 신호는 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 의해 수행되는 모든 처리 단계가 성공적임을 나타냅니다.

내부 대조군의 음성 신호는 검출 및 확인된 표적에 대한 모든 양성 결과는 무효화하지 않지만, 분석 내 모든 음성 결과를 무효화합니다. 따라서, 내부 대조군 신호가 음성이면 검사를 반복해야 합니다.

프로토콜: 건식 면봉 표본 검체

검체 수집, 운송 및 보관

Copan FLOQSwabs(카탈로그 번호 503CS01)를 사용해 제조업체의 권고 절차에 따라 비인두암 면봉 표본 검체를 수집합니다.

검체를 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 로드하기

1. 포장 옆면의 절취부를 이용해 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 포장을 개봉합니다(그림 5).

중요: 포장을 개봉한 후, 검체는 120 분 이내에 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 삽입되고 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 로드되어야 합니다.



그림 5. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 개봉.

2. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 포장에서 꺼내 라벨의 바코드가 사용자 방향을 향하도록 위치시킵니다.
3. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 상단에 손으로 검체 정보를 적거나 검체 정보 라벨을 붙입니다. 라벨이 적절한 위치에 있으며 뚜껑 개봉구를 막지 않는지 확인합니다(그림 6).



그림 6. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 상단에 검체 정보 배치.

4. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 왼쪽 옆면에 있는 면봉 표본 포트의 검체 뚜껑을 엽니다(그림 7).

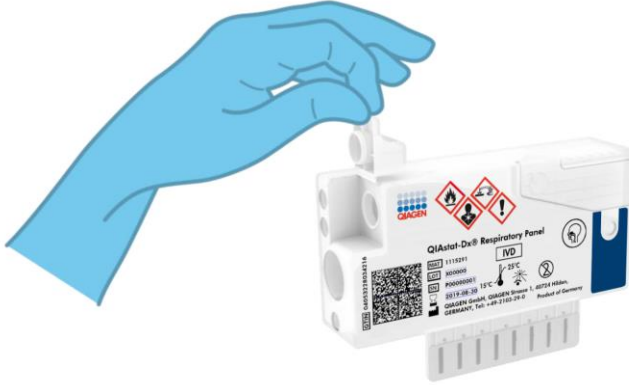


그림 7. 면봉 표본 포트의 검체 뚜껑 열기.

5. 절단점이 출입구와 평행이 될 때까지 면봉 표본을 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 삽입합니다(즉, 면봉 표본이 더 이상 진입할 수 없음)(그림 8).

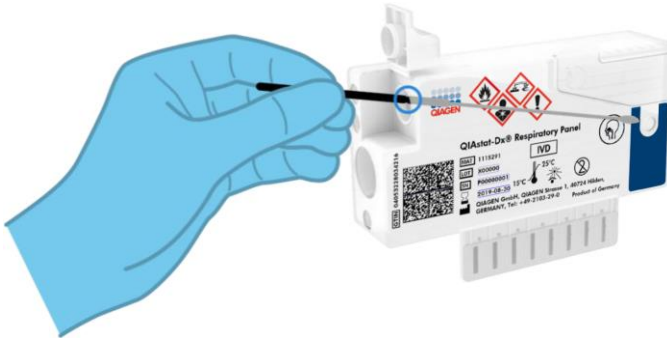


그림 8. 면봉 표본을 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 삽입.

6. 면봉 표본 막대를 절단점에서 부러뜨리고, 면봉 표본의 나머지 부분이 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 안에 남게 합니다(그림 9).

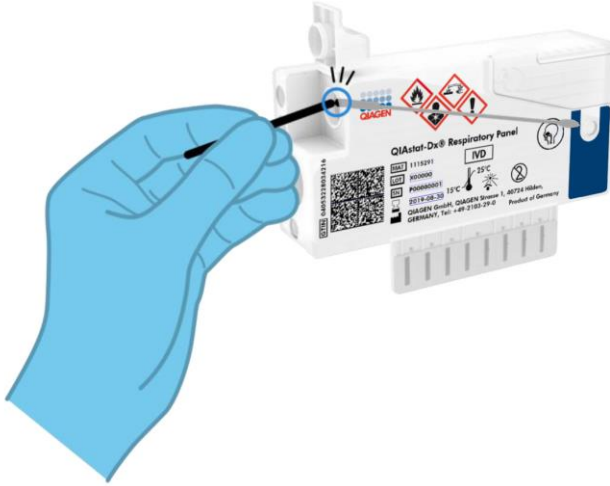


그림 9. 면봉 표본 막대 부러뜨리기.

7. 딸깍 소리가 날 때까지 면봉 표본 포트의 검체 뚜껑을 단단히 닫습니다(그림 10).

중요: 검체를 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 안에 배치했으면, 카트리지를 90 분 이내에 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 로드해야 합니다.

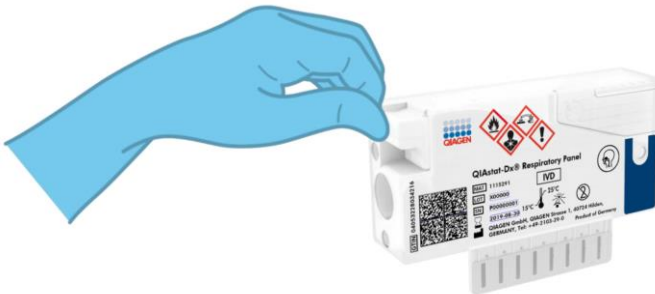


그림 10. 면봉 표본 포트의 검체 뚜껑 닫기.

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 시작하기

- 기기 전면의 ON/OFF(켜기/끄기) 버튼을 사용해 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 전원을 켭니다.

참고: 분석 모듈 후면의 전원 스위치가 "I" 위치로 설정되어 있어야 합니다. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 상태 표시등이 파란색이 됩니다.

- 기본** 화면이 나타나고 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 상태 표시등이 초록색으로 바뀌고 깜빡이지 않을 때까지 기다립니다.

- 사용자 이름과 암호를 입력해 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 로그인합니다.

참고: User Access Control(사용자 액세스 제어)이 활성화되어 있으면 Login(로그인) 화면이 나타납니다. User Access Control(사용자 액세스 제어)이 비활성화되어 있으며, 사용자 이름/암호에 대한 일체의 요구 없이 **기본** 화면이 나타납니다.

- 분석항목 정의의 파일 소프트웨어가 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 설치되어 있지 않은 경우, 검사를 실행하기 전에 설치 지침을 따릅니다(추가 정보에 대해서는 부록 A: 분석항목 정의 파일 설치, 페이지 85 참조).

검사 실행

- QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 터치스크린 상단 오른쪽 모서리에 있는 Run Test(검사 실행) 버튼을 누릅니다.

- 메시지가 표시되면, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 전면에 통합되어 있는 바코드 리더를 사용해 비인두암 면봉 표본 검체(면봉 표본 블리스터 포장 위에 위치해 있음)의 검체 ID 바코드를 스캔하거나, QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 상단에 위치한 시료 정보 바코드를 스캔합니다(3 단계 참조)(그림 11, 다음 페이지).

참고: Sample ID(검체 ID) 필드를 선택하여, 터치스크린의 가상 키보드를 사용해 검체 ID 를 입력할 수도 있습니다.

참고: 선택한 시스템 구성에 따라, 이 시점에 환자 ID 입력이 필요할 수도 있습니다.

참고: 터치스크린 하단의 **지침 표시줄**에 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 으로부터의 지침이 표시됩니다.



그림 11. 검체 ID 바코드 스캔.

14. 메시지가 표시되면, 사용할 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 바코드를 스캔합니다(그림 12, 다음 페이지). QIAstat-Dx Analyzer 1.0 은 카트리지 바코드에 따라 자동으로 실행할 분석항목을 인식합니다.

참고: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 은 유효기한이 경과한 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges, 이전에 사용한 카트리지 또는 장치에 설치되어 있지 않은 분석항목에 대한 카트리지를 허용하지 않습니다. 이러한 경우 오류 메시지가 표시되고 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 가 거절됩니다. 분석항목 설치 방법에 대한 추가 세부 정보에 대해서는 *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 사용자 설명서*를 참조합니다.



그림 12. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 바코드 스캔.

15. 목록에서 적절한 검체 유형을 선택합니다(그림 13).

administrator Run Test Module 1 14:43 2017-03-30

1 UI administrator Resp Panel

2 Not installed 3 Not installed 4 Not installed

TEST DATA

Sample ID
2430362

Assay Type
Resp Panel

Sample Type

SAMPLE TYPE

Swab

UTM

Cancel

Select Sample Type

그림 13. 검체 유형 선택.

16. Confirm(확인) 화면이 나타납니다. 입력된 데이터를 검토하고 필요 시 터치스크린에서 관련 필드를 선택하고 정보를 편집해 변경합니다.

17. 모든 표시된 데이터가 정확하면 Confirm(확인)을 누릅니다. 필요한 경우, 적절한 필드를 선택해 내용을 편집하거나 Cancel(취소)을 눌러 검사를 취소합니다(그림 14).

The screenshot shows a software interface titled 'Run Test Module 1' with a timestamp of '17:32 2019-02-06'. The user is logged in as 'administrator'. The interface is divided into sections. At the top, there are four numbered steps: '1 UI administrator RP', '2 Not installed', '3 Not installed', and '4 Not installed'. Below this, the 'TEST DATA' section contains three dropdown menus: 'Sample ID' with the value '2430362', 'Assay Type' with the value 'RP', and 'Sample Type' with the value 'Swab'. In the center of the interface is a large circular button with a blue center and a grey ring, labeled 'Confirm'. At the bottom right, there is a 'Cancel' button with a red 'X' icon. A footer bar at the bottom of the window reads 'Module 1 | Confirm TEST DATA or click any field to edit'.

그림 14. 데이터 입력 확인

18. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 면봉 표본 포트 및 기본 포트에서 두 검체 뚜껑이 단단히 닫혀 있는지 확인합니다. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 상단의 카트리지 입구 포트가 자동으로 열리면, 바코드가 왼쪽을 향하고 반응 챔버가 아래를 향하도록 하여 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 삽입합니다(그림 15, 다음 페이지).

참고: QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 안으로 밀어 넣지 않아도 됩니다. 카트리지 입구 포트에 올바르게 위치시키면 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 이 자동으로 카트리지를 분석 모듈 안으로 이동시킵니다.



그림 15. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 삽입.

19. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 감지하면, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 이 자동으로 카트리지 입구 포트의 뚜껑을 닫고 검사 실행을 시작합니다. 작업자는 실행 시작을 위해 다른 조치를 취할 필요가 없습니다.

참고: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 은 검사 설정 동안 사용되고 스캔된 것 이외의 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 허용하지 않습니다. 스캔된 것이 아닌 다른 카트리지가 삽입되는 경우, 오류가 발생하고 카트리지가 자동으로 배출됩니다.

참고: 이 시점까지는, 터치스크린 하단 오른쪽 모서리의 Cancel(취소) 버튼을 눌러 검사 실행을 취소할 수 있습니다.

참고: 시스템 구성에 따라, 작업자가 검사 실행을 시작하기 위해 암호를 다시 입력해야 할 수도 있습니다.

참고: QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 가 포트에 위치해 있지 않으면 30 초 후 자동으로 카트리지 입구 포트의 뚜껑이 닫힙니다. 이러한 일이 발생하면, 16 단계부터 절차를 반복합니다.

20. 검사가 실행되는 동안, 남은 실행 시간이 터치스크린에 표시됩니다.

21. 검사 실행이 완료된 후, Eject(배출) 화면이 나타나고(그림 16, 다음 페이지) 다음 옵션 중 한 가지로 모듈 상태 표시줄에 검사 결과가 표시됩니다.

- TEST COMPLETED(검사 완료): 검사가 성공적으로 완료됨
- TEST FAILED(검사 실패): 검사 중 오류가 발생함
- TEST CANCELED(검사 취소): 사용자가 검사를 취소했음

중요: 검사가 실패하면, 가능한 원인 및 처리 방법에 대한 지침에 대해 *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 사용자 설명서*의 “문제 해결” 섹션을 참조합니다.

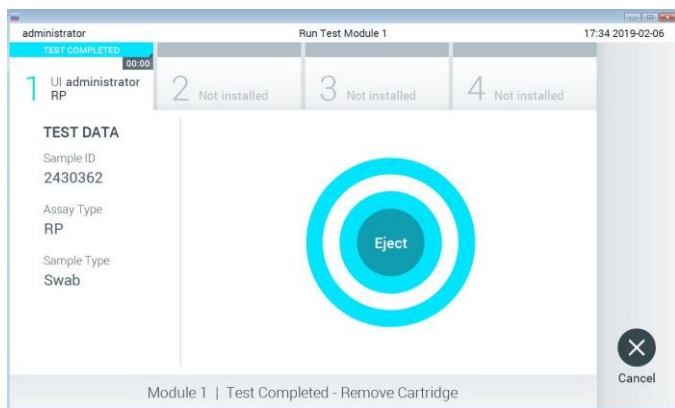



그림 16. Eject(배출) 화면 표시.

22. 터치스크린에서  Eject(배출) 를 눌러 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 꺼내고 모든 국가, 주 및 현지 보건 안전 규정 및 법률에 따라 생물학적 유해 폐기물을 처분합니다. 카트리지 입구 포트가 열리고 카트리지가 배출될 때 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 꺼내야 합니다. 30 초 후에도 카트리지를 꺼내지 않으면, 자동으로 뒤로 이동하여 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 안으로 들어가고 카트리지 입구 포트 뚜껑이 닫힙니다. 이러한 일이 발생하면, Eject(배출)를 눌러 카트리지 입구 포트의 뚜껑을 다시 열고 카트리지를 꺼냅니다.

중요: 사용한 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 는 반드시 폐기해야 합니다. 실행이 시작되었으나 이후 작업자에 의해 취소된 검사나 오류가 감지된 검사로부터의 카트리지를 재사용하는 것은 불가능합니다.

23. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 가 배출된 후, 결과 Summary(요약) 화면이 나타납니다. 추가 세부 정보에 대해서는 "결과 해석", 페이지 44 를 참조합니다. 다른 검사 실행 과정을 시작하려면, Run Test(검사 실행)을 누릅니다.

참고: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 사용에 대한 추가 정보는, *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 사용자 설명서*를 참조합니다.

프로토콜: 수송 배지 액체 검체

검체 수집, 운송 및 보관

면봉 표본 제조업체의 권고 절차에 따라 비인두암 면봉 표본 검체를 수집하고 면봉 표본을 Universal Transport Medium(UTM)에 배치합니다.

검체를 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 로드하기

1. 포장 옆면의 절취부를 이용해 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 포장을 개봉합니다(그림 17).

중요: 포장을 개봉한 후, 검체는 120 분 이내에 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 삽입되고 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 로드되어야 합니다.



그림 17. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 개봉.

2. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 포장에서 꺼내 라벨의 바코드가 사용자 방향을 향하도록 위치시킵니다.
3. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 상단에 손으로 검체 정보를 적거나 검체 정보 라벨을 붙입니다. 라벨이 적절한 위치에 있으며 뚜껑 개봉구를 막지 않는지 확인합니다(그림 18).



그림 18. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 상단에 검체 정보 배치.

4. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 전면에 있는 기본 포트의 검체 뚜껑을 엽니다(그림 19).

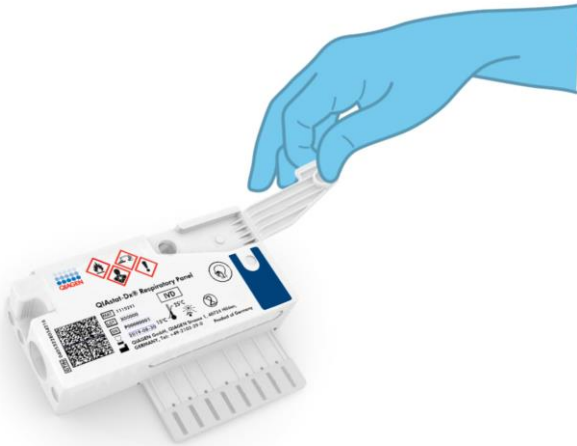


그림 19. 기본 포트의 검체 뚜껑 열기.

5. 검사할 검체가 있는 튜브를 엽니다. 제공된 이동 피펫을 사용해 액체를 세 번째 충전선(즉, 300 µl)까지 흡입합니다(그림 20, 다음 페이지).

중요: 피펫에 공기가 흡입되지 않도록 주의합니다. Universal Transport Medium, 즉, Copan UTM®을 수송 배지로 사용하며, 튜브 안에 존재하는 비즈를 흡입하지 않도록 주의합니다. 공기나 비즈가 피펫 안으로 흡입되면, 조심스럽게 피펫 내 검체 액체를 다시 검체 튜브로 배출시키고 액체를 다시 흡입합니다.

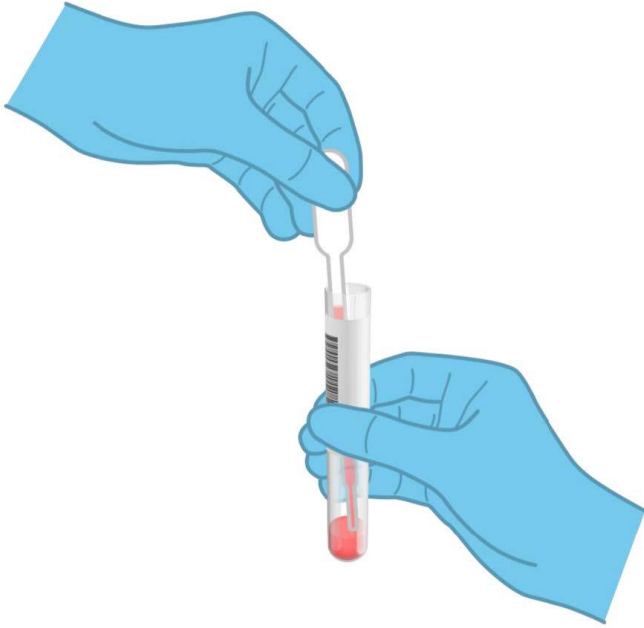


그림 20. 제공된 이동 피펫으로 검체 흡입.

- 제공된 일회용 이동 피펫을 사용해 조심스럽게 300 μ l 검체 용량을 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 기본 포트에 분주합니다(그림 21, 다음 페이지).

8. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 검체 점검창을 사용해 검체가 로드되어 있는지 육안으로 확인합니다(그림 23).

중요: 검체를 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 안에 배치했으면, 카트리지를 90 분 이내에 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 로드해야 합니다.

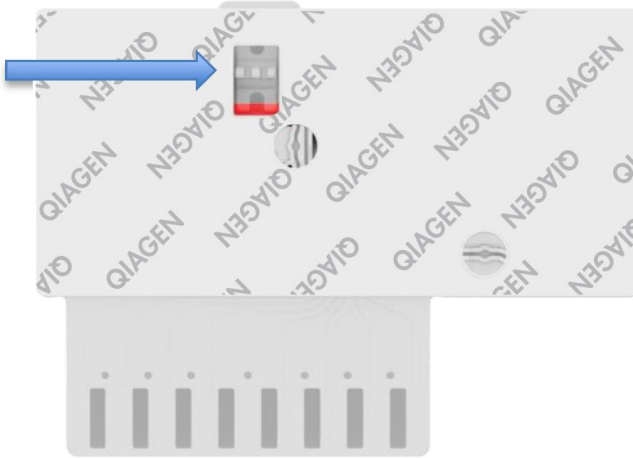


그림 23. 검체 점검창(파란색 화살표).

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 시작하기

9. 기기 전면의 ON/OFF(켜기/끄기) 버튼을 사용해 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 전원을 켭니다.

참고: 분석 모듈 후면의 전원 스위치가 "I" 위치로 설정되어 있어야 합니다. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 상태 표시등이 파란색이 됩니다.

10. 기본 화면이 나타나고 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 상태 표시등이 초록색으로 바뀌고 깜빡이지 않을 때까지 기다립니다.
11. 사용자 이름과 암호를 입력해 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 로그인합니다.

참고: User Access Control(사용자 액세스 제어)이 활성화되어 있으면 Login(로그인) 화면이 나타납니다. User Access Control(사용자 액세스 제어)이 비활성화되어 있으며, 사용자 이름/암호에 대한 일체의 요구 없이 **기본** 화면이 나타납니다.

12. 분석항목 정의 파일 소프트웨어가 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 설치되어 있지 않은 경우, 검사를 실행하기 전에 설치 지침을 따릅니다(추가 정보에 대해서는 부록 A: 분석항목 정의 파일 설치, 페이지 85 참조).

검사 실행

13. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 터치스크린 상단 오른쪽 모서리에 있는 Run Test(검사 실행) 버튼을 누릅니다.

14. 메시지가 표시되면, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 전면에 통합되어 있는 바코드 리더를 사용해 검체가 들어 있는 UTM 튜브의 검체 ID 바코드를 스캔하거나 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 상단에 위치한 시료 정보 바코드를 스캔합니다(3 단계 참조)(그림 24, 다음 페이지).

참고: Sample ID(검체 ID) 필드를 선택하여, 터치스크린의 가상 키보드를 사용해 검체 ID 를 입력할 수도 있습니다.

참고: 선택한 시스템 구성에 따라, 이 시점에 환자 ID 입력이 필요할 수도 있습니다.

참고: 터치스크린 하단의 **지침 표시줄**에 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 으로부터의 지침이 표시됩니다.



그림 24. 검체 ID 바코드 스캔.

15. 메시지가 표시되면, 사용할 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 바코드를 스캔합니다(그림 25, 다음 페이지). QIAstat-Dx Analyzer 1.0 은 카트리지 바코드에 따라 자동으로 실행할 분석항목을 인식합니다.

참고: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 은 유효기한이 경과한 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges, 이전에 사용한 카트리지 또는 장치에 설치되어 있지 않은 분석항목에 대한 카트리지를 허용하지 않습니다. 이러한 경우 오류 메시지가 표시되고 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 가 거절됩니다. 분석항목 설치 방법에 대한 추가 세부 정보에 대해서는 *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 사용자 설명서*를 참조합니다.



그림 25. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 바코드 스캔.

16. 목록에서 적절한 검체 유형을 선택합니다(그림 26).

| administrator | | Run Test Module 1 | | 20:58 2019-02-13 | |
|--------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 | UI administrator RP | 2 | Available | 3 | Available |
| TEST DATA | | SAMPLE TYPE | | | |
| Sample ID 12345 | | Swab | | | |
| Assay Type RP | | UTM | | | |
| Sample Type UTM | | | | | |
| Select Sample Type | | | | | |
| Cancel | | | | | |

그림 26. 검체 유형 선택.

17. Confirm(확인) 화면이 나타납니다. 입력된 데이터를 검토하고 필요 시 터치스크린에서 관련 필드를 선택하고 정보를 편집해 변경합니다.

18. 모든 표시된 데이터가 정확하면 Confirm(확인)을 누릅니다. 필요한 경우, 적절한 필드를 선택해 내용을 편집하거나 Cancel(취소)을 눌러 검사를 취소합니다(그림 27).

administrator Run Test Module 1 14:44 2017-03-30

1 UI administrator Resp Panel 2 Not installed 3 Not installed 4 Not installed

TEST DATA

Sample ID
2430362

Assay Type
Resp Panel

Sample Type
UTM

Confirm

Cancel

Module 1 | Confirm Test Data or click any field to edit

그림 27. 데이터 입력 확인.

19. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 면봉 표본 포트 및 기본 포트에서 두 검체 뚜껑이 단단히 닫혀 있는지 확인합니다. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 상단의 카트리지 입구 포트가 자동으로 열리면, 바코드가 왼쪽을 향하고 반응 챔버가 아래를 향하도록 하여 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 삽입합니다(그림 28, 다음 페이지).

참고: QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 안으로 밀어 넣지 않아도 됩니다. 카트리지 입구 포트에 올바르게 위치시키면 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 이 자동으로 카트리지를 분석 모듈 안으로 이동시킵니다.



그림 28. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 삽입.

20. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 감지하면, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 이 자동으로 카트리지 입구 포트의 뚜껑을 닫고 검사 실행을 시작합니다. 작업자는 실행 시작을 위해 다른 조치를 취할 필요가 없습니다.

참고: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 은 검사 설정 동안 사용되고 스캔된 것 이외의 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 허용하지 않습니다. 스캔된 것이 아닌 다른 카트리지가 삽입되는 경우, 오류가 발생하고 카트리지가 자동으로 배출됩니다.

참고: 이 시점까지는, 터치스크린 하단 오른쪽 모서리의 Cancel(취소) 버튼을 눌러 검사 실행을 취소할 수 있습니다.

참고: 시스템 구성에 따라, 작업자가 검사 실행을 시작하기 위해 암호를 다시 입력해야 할 수도 있습니다.

참고: QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 가 포트에 위치해 있지 않으면 30 초 후 자동으로 카트리지 입구 포트의 뚜껑이 닫힙니다. 이러한 일이 발생하면, 17 단계부터 절차를 반복합니다.

21. 검사가 실행되는 동안, 남은 실행 시간이 터치스크린에 표시됩니다.

22. 검사 실행이 완료된 후, Eject(배출) 화면이 나타나고(그림 29, 다음 페이지) 다음 옵션 중 한 가지로 모듈 상태 표시줄에 검사 결과가 표시됩니다.

- TEST COMPLETED(검사 완료): 검사가 성공적으로 완료됨
- TEST FAILED(검사 실패): 검사 중 오류가 발생함
- TEST CANCELED(검사 취소): 사용자가 검사를 취소했음

중요: 검사가 실패하면, 가능한 원인 및 처리 방법에 대한 지침에 대해 *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 사용자 설명서*의 “문제 해결” 섹션을 참조합니다.

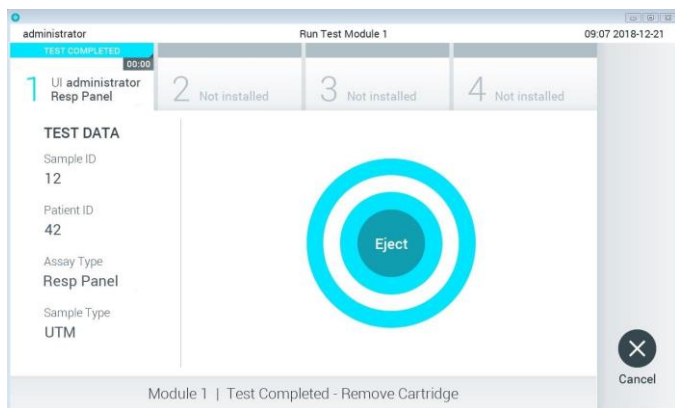



그림 29. Eject(배출) 화면 표시.

23. 터치스크린에서  Eject(배출) 를 눌러 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 꺼내고 모든 국가, 주 및 현지 보건 안전 규정 및 법률에 따라 생물학적 유해 폐기물을 처분합니다. 카트리지 입구 포트가 열리고 카트리지가 배출될 때 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 꺼내야 합니다. 30 초 후에도 카트리지를 꺼내지 않으면, 자동으로 뒤로 이동하여 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 안으로 들어가고 카트리지 입구 포트 뚜껑이 닫힙니다. 이러한 일이 발생하면, Eject(배출)를 눌러 카트리지 입구 포트의 뚜껑을 다시 열고 카트리지를 꺼냅니다.

중요: 사용한 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 는 반드시 폐기해야 합니다. 실행이 시작되었으나 이후 작업자에 의해 취소된 검사나 오류가 감지된 검사로부터의 카트리지를 재사용하는 것은 불가능합니다.

24. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 가 배출된 후, 결과 Summary(요약) 화면이 나타납니다. 추가 세부 정보에 대해서는 "결과 해석", 페이지 44 를 참조합니다. 다른 검사 실행 과정을 시작하려면, Run Test(검사 실행)을 누릅니다.

참고: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 사용에 대한 추가 정보는, *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 사용자 설명서*를 참조합니다.

결과의 해석

결과 보기

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 은 자동으로 검사 결과를 해석하고 저장합니다. QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 배출한 후, 결과 Summary(요약) 화면이 자동으로 표시됩니다(그림 30).

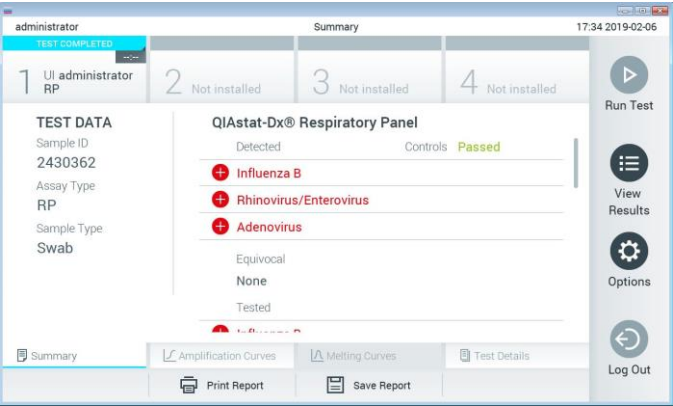




그림 30. Test Data(검사 데이터)를 왼쪽 패널에, 검사 Summary(요약)를 기본 패널에 보여주는 결과 Summary(요약) 화면 예.

화면의 기본 부분은 다음 세 가지 목록을 제공하고 색상 코딩과 기호를 사용해 결과를 표시합니다.

- 머리말 “Detected”(검출) 아래의 첫 번째 목록은 모든 검체에서 검출 및 확인된 병원체를 포함하며 앞에 + 표시가 있고 빨간색으로 표시됩니다.
- “Equivocal”(불확실)이라는 머리말의 두 번째 목록은 사용되지 않습니다.
“Equivocal”(불확실) 결과는 QIAstat-Dx Respiratory Panel 에 적용할 수 없습니다. 따라서, “Equivocal”(불확실) 목록은 항상 공백입니다.

- 머리말 “Tested”(검사됨) 아래의 세 번째 목록은 검체에서 검사한 모든 병원체를 포함합니다. 검체에서 검출 및 확인된 병원체는 앞에  표시가 있고 빨간색으로 표시됩니다. 검사했으나 검출되지 않은 병원체는 앞에  표시가 있고 초록색으로 표시됩니다.

참고: 검체에서 검출 및 확인된 병원체가 “Detected”(검출) 및 “Tested”(검사됨) 목록 모두에 표시됩니다.

검사를 성공적으로 완료하지 못하면, “Failed”(실패) 메시지가 표시되고 뒤에 구체적인 Error Code(오류 코드)가 나옵니다.

다음 Test Data(검사 데이터)가 화면 왼쪽에 표시됩니다.

- Sample ID(검체 ID)
- Assay Type(분석항목 유형)
- Sample Type(검체 유형)

작업자의 액세스 권한에 따라 화면 하단의 탭들로부터 분석항목에 대한 추가 데이터를 이용할 수 있습니다(예: 증폭 플롯 및 검사 세부 정보).

분석 데이터가 있는 보고서를 외부 USB 저장 장치로 내보낼 수 있습니다. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 USB 포트 중 하나에 USB 저장 장치를 삽입하고 화면 하단 표시줄에서 Save Report(보고서 저장)를 누릅니다. 이 보고서는 View Results (결과 보기) 목록에서 검사를 선택하여 언제든지 나중에 내보낼 수 있습니다.

또한 화면 하단 표시줄에서 Print Report(보고서 인쇄)를 눌러 프린터로 보고서를 전송할 수도 있습니다.

증폭 곡선 보기


검출된 병원체의 검사 증폭 곡선을 보려면,  Amplification Curves(증폭 곡선) 탭을 누릅니다(그림 31).



그림 31. Amplification Curves(증폭 곡선) 화면(PATHOGENS(병원체) 탭).

검사한 병원체 및 대조군에 대한 세부 정보가 왼쪽에 나타나고 증폭 곡선은 가운데에 표시됩니다.

참고: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에서 User Access Control(사용자 액세스 제어)이 활성화되어 있으면 액세스 권한이 있는 작업자만 Amplification Curves(증폭 곡선) 화면을 사용할 수 있습니다.

왼쪽의 PATHOGENS(병원체) 탭을 눌러 검사한 병원체에 해당하는 플롯을 표시합니다. 병원체 이름을 눌러 증폭 플롯에 어떤 병원체를 표시할지 선택합니다. 한 가지 또는 여러 병원체를 선택하거나 어떠한 병원체도 선택하지 않을 수 있습니다. 선택한 목록의 각 병원체가 병원체와 관련된 증폭 곡선에 해당하는 색상에 할당됩니다. 선택하지 않은 병원체는 회색으로 표시됩니다.

해당하는 C_T 및 종점 형광성(endpoint fluorescence, EP) 값이 각 병원체 이름 아래 표시됩니다.

증폭 플롯에서 대조군을 보려면 왼쪽의 CONTROLS(대조군) 탭을 누릅니다. 대조군 이름 옆의 원을 눌러 선택하거나 선택을 해제합니다(그림 32).



그림 32. Amplification Curves(증폭 곡선) 화면(CONTROLS(대조군) 탭).

증폭 플롯에 선택한 병원체 또는 대조군에 대한 데이터 곡선이 표시됩니다. Y 축을 대수 척도나 선형 척도로 변환하려면, 플롯의 하단 왼쪽 모서리에 있는 Lin(선형) 또는 Log(로그) 버튼을 누릅니다.

X 축 및 Y 축의 배율은 각 축의 **파란색 표시**를 이용해 조정할 수 있습니다. **파란색 표시**를 누른 채로 축에서 원하는 위치로 움직입니다. **파란색 표시**를 축 원점으로 옮기면 기본 값으로 돌아갑니다.

검사 세부 정보 보기

터치스크린 하단의 탭 메뉴 모음에서 Test Details(검사 세부 정보)를 눌러 결과를 더 자세히 검토합니다. 전체 보고서를 보려면 스크롤을 내립니다.

다음 Test Details(검사 세부 정보)가 화면 가운데에 표시됩니다(그림 33, 다음 페이지).

- User ID(사용자 ID)
- Cartridge SN(카트리지 SN)(일련 번호)
- Cartridge Expiration Date(카트리지 유효기한)
- Module SN(모듈 SN)(일련 번호)
- Test Status(검사 상태)(Completed(완료), Failed(실패) 또는 작업자에 의한 Canceled(취소))
- Error Code(오류 코드)(해당하는 경우)
- Test Start Date and Time(검사 시작 날짜 및 시간)
- Test Execution Time(검사 실행 시간)
- Assay Name(분석항목 이름)
- Test ID(검사 ID)
- Test Result(검사 결과):
 - Positive(양성)(최소 1 개의 호흡기 병원체가 검출됨/확인됨)
 - Negative(음성)(검출된 호흡기 병원체 없음)
 - Invalid(무효)
- 분석항목에서 검사한 List of analytes(피분석물 목록), 양성 신호가 있는 경우 C_T 및 종점 형광성 포함
- C_T 및 종점 형광성이 있는 내부 대조군

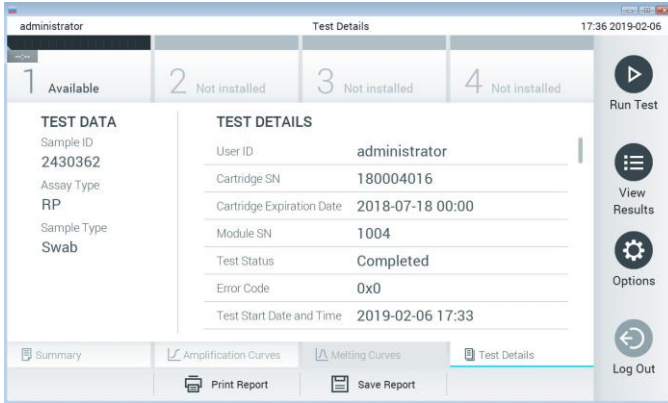



그림 33. Test Data(검사 데이터)를 왼쪽 패널에 Test Details(검사 세부 정보)를 기본 패널에 보여주는 화면 예.

이전 검사 결과 찾아보기

결과 저장소에 저장된 이전 검사 결과를 보려면, 기본 메뉴 모음에서  View Results (결과 보기)를 누릅니다(그림 34).

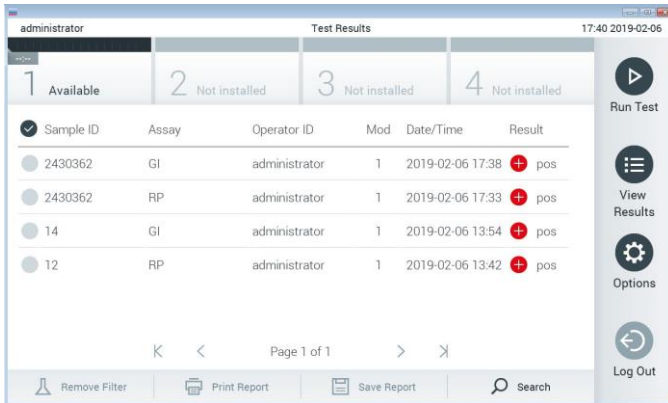


그림 34. View Results(결과 보기) 화면 예.

특정 검사에 대한 결과를 보려면 검사 열에서 아무 곳이나 누릅니다.

열 머리글(예: Sample ID(검체 ID))을 눌러 목록을 그 매개변수에 따라 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다. 목록은 한 번에 하나의 열에 따라서만 정렬이 가능합니다.

Result(결과) 열은 각 검사 결과를 보여줍니다(표 2).

표 2. 검사 결과 설명

| 결과 | 결과 | 설명 |
|----------------|--|---|
| Positive(양성) |  pos | 최소 하나의 병원체가 양성임 |
| Negative(음성) |  neg | 검출된 병원체가 없음 |
| Failed(실패) |  fail | 오류가 발생했거나 사용자가 작업을 취소하여 검사에 실패했음 |
| Successful(성공) |  suc | 검사가 양성이나 음성이지만, 사용자가 검사 결과를 볼 수 있는 액세스 권한이 없습니다 |

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 프린터가 연결되어 있고 적절한 드라이버가 설치되었는지 확인합니다. 선택한 결과를 인쇄하려면 Print Report(보고서 인쇄)를 누릅니다.

선택한 결과에 대한 보고서를 PDF 형식으로 외부 USB 저장 장치에 저장하려면 Save Report(보고서 저장)를 누릅니다.


보고서 유형 선택: List of Tests(검사 목록) 또는 Test Reports(검사 보고서).

검사 결과를 Sample ID(검체 ID), Assay(분석항목), Operator ID(작업자 ID)별로 검색하려면 Search(검색)를 누릅니다. 가상 키보드를 사용해 검색 문자열을 입력하고 Enter(입력)를 눌러 검색을 시작합니다. 검색 텍스트를 포함하고 있는 기록만 검색 결과에 표시됩니다.

결과 목록이 필터링되면, 검색이 필터링된 목록에만 적용됩니다.

그 매개변수에 따라 필터를 적용하려면 열 머리글을 길게 누릅니다. Sample ID(검체 ID)와 같은 일부 매개변수의 경우, 필터에 대한 검색 문자열을 입력할 수 있도록 가상 키보드가 표시됩니다.

Assay(분석항목)와 같은 기타 매개변수의 경우, 저장소에 저장된 분석항목 목록이 있는 대화상자가 열립니다. 하나 이상의 분석항목을 선택해 선택한 분석항목으로 실행된 검사만 필터링합니다.

열 머리글 왼쪽의  기호는 해당 열의 필터가 활성화되어 있음을 나타냅니다.

하위 메뉴 모음에서 Remove Filter(필터 제거)를 눌러 필터를 제거할 수 있습니다.

USB 드라이브로 결과 내보내기

검사 결과를 PDF 형식으로 USB 드라이브에 내보내고 사본을 저장하려면 View Results(결과 보기) 화면의 아무 탭에서, Save Report(보고서 저장)를 선택합니다. USB 포트는 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 전면에 위치해 있습니다.

결과 인쇄

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 프린터가 연결되어 있고 적절한 드라이버가 설치되었는지 확인합니다. Print Report(보고서 인쇄)를 눌러 검사 결과의 사본을 프린터로 전송합니다.

결과 해석

호흡기 생체에 대한 결과는 인플루엔자 A 를 제외하고 해당하는 PCR 분석항목이 양성인 경우, "Positive"(양성)으로 해석됩니다. QIAstat-Dx Respiratory Panel 내 인플루엔자 A 분석항목은 인플루엔자 A 뿐만 아니라 인플루엔자 A 아형 H1N1/2009, 인플루엔자 A 아형 H1 또는 인플루엔자 A 아형 H3 을 검출하도록 설계되었습니다. 특히, 이는 다음을 의미합니다.

- 계절성 인플루엔자 A H1 균주가 QIAstat-Dx Respiratory Panel 분석항목에 의해 검출되면, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 화면에 두 개의 신호가 생성되고 표시됩니다. 하나는 인플루엔자 A 에 대한 것이고 두 번째는 H1 균주에 대한 것입니다.
- 계절성 인플루엔자 A H3 균주가 QIAstat-Dx Respiratory Panel 분석항목에 의해 검출되면, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 화면에 두 개의 신호가 생성되고 표시됩니다. 하나는 인플루엔자 A 에 대한 것이고 두 번째는 H3 균주에 대한 것입니다.
- 감염병 인플루엔자 A/H1N1/2009 균주가 검출되면, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 화면에 두 개의 신호가 생성되고 표시됩니다. 하나는 인플루엔자 A 에 대한 것이고 두 번째는 H1N1/2009 에 대한 것입니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel 로 검출할 수 있는 기타 모든 병원체에 대해서는 해당 병원체가 검체에 존재하는 경우, 하나의 신호만 생성됩니다.

내부 대조군 해석

내부 대조군 결과는 표 3 에 따라 해석되어야 합니다.

표 3. 내부 대조군 해석 결과

| 대조군 결과 | 설명 | 동작 |
|------------|---------------------|---|
| Passed(통과) | 내부 대조군이 성공적으로 증폭되었음 | 실행이 성공적으로 완료되었습니다. 모든 결과가 검증되었으며 보고 가능합니다. 검출된 병원체는 "positive"(양성)으로, 검출되지 않은 병원체는 "negative"(음성)으로 보고됩니다. |
| Failed(실패) | 내부 대조군이 실패했음 | 양성으로 검출된 병원체는 보고되지만, 모든 음성 결과(검사했으나 검출되지 않은 병원체)는 무효입니다. 새로운 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 사용해 검사를 반복합니다. |

정도 관리

QIAGEN의 ISO 인증 품질 관리 시스템에 따라 QIAstat-Dx Respiratory Panel의 각 로트는 일관된 제품 품질을 보장하기 위해 사전 결정된 규격에 대해 검사됩니다.

제한

- QIAstat-Dx Respiratory Panel로부터의 결과는 진단, 치료 또는 기타 환자 관리 결정에 대한 단독 근거로서 사용하기 위한 것이 아닙니다.
- 양성 결과는 QIAstat-Dx Respiratory Panel에 포함되지 않은 생체의 동시 감염 가능성을 배제하지 않습니다. 검출된 병원체는 질병의 명확한 원인이 아닐 수 있습니다.
- 음성 결과는 상기도 감염의 가능성을 배제하지 않습니다. 모든 급성 호흡기 감염 병원체가 이 분석에 의해 검출되는 것은 아니며 일부 임상 환경에서는 민감도가 패키지 인서트에 설명되어 있는 것과 다를 수 있습니다.
- QIAstat-Dx Respiratory Panel의 음성 결과는 해당 증후군의 감염성 가능성을 배제하지 않습니다. 음성 분석 결과는 검체 취급 실수, 분석에서 표적화된 핵산 시퀀스 내 변동성, 분석항목에 포함되어 있지 않은 생체에 의한 감염, 분석 검출 한계 미만인 포함된 생체의 생체 수준 및 특정 약물, 요법 또는 제제의 사용을 포함하는 여러 요인 및 그 조합에 기인할 수 있습니다.
- QIAstat-Dx Respiratory Panel은 이 사용 지침에 설명되어 있는 것 이외의 검체를 검사하기 위한 용도가 아닙니다. 검사 성능 특징은 수송 배지에 수집된 급성 호흡기 증상이 있는 사람으로부터의 비인두암 면봉 표본 검체에 대해서만 확립되어 있습니다.
- QIAstat-Dx Respiratory Panel은 생체 회복, 혈청형 분석 및/또는 적용 가능한 경우 항균제 감수성 검사를 위한 표준 배양과 관련하여 사용하기 위한 것입니다.
- QIAstat-Dx Respiratory Panel로부터의 결과는 모든 관련 임상, 실험실 및 역학적 소견의 맥락에서 교육을 받은 의료 전문가에 의해 해석되어야 합니다.

- QIAstat-Dx Respiratory Panel 은 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 과만 함께 사용할 수 있습니다.*
- QIAstat-Dx Respiratory Panel 은 정성적 분석이며 검출된 생체에 대한 정량적 값은 제공하지 않습니다.
- 바이러스 및 박테리아 핵산은 생체가 생존성 또는 감염성이 아니더라도 체내에 존속할 수 있습니다. 표적 표지자의 검출은 해당하는 생체가 감염 또는 임상 증상의 병원체임을 의미하지 않습니다.
- 바이러스 및 박테리아 핵산의 검출은 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 로 적절한 검체를 수집, 취급, 운송, 저장, 로드하는지에 따라 좌우됩니다. 앞서 언급된 과정에서의 일체의 부적절한 작업은 위양성 및 위음성 결과를 포함하여 잘못된 결과를 발생시킬 수 있습니다.
- 특정 생체 및 모든 혼합된 생체에 대해, 분석 민감도 및 특이성은 해당 분석항목에 대한 고유한 성능 매개변수를 가지며 유병률에 따라 달라지지 않습니다. 이와 대조적으로, 검사 결과의 음성 및 양성 예상값은 질병/생체 유병률에 따라 다릅니다. 더 높은 유병률은 검사 결과의 양성 예상값에 유리하고, 반면 더 낮은 유병률은 검사 결과의 음성 예상값에 유리하다는 점을 유의해야 합니다.

* QIAstat-Dx 소프트웨어 버전 1.2 이상을 실행하는 DiagCORE Analyzer 기기가 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 기기 대신 사용될 수 있습니다.

성능 특징

임상적 성능

QIAstat-Dx Respiratory Panel 분석의 성능 특징은 다기관 임상시험에서 평가되었습니다. 비인두암 면봉 표본 시료의 범용 수송 배지(UTM) 및 건식 비인두암 면봉 표본 시료(FLOQSwabs, Copan 참조번호 503CS01)(SWAB)의 성능이 모두 평가되었습니다. 후자의 경우, 면봉 표본은 수집 후 바로 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 삽입되며, 액체 배지로 옮기지 않도록 합니다. 이러한 검사 접근법은 검체 관리를 안전하고 오류 없게 하는 데 큰 도움이 되며, 특히 현장 진료 환경에서 그렇습니다.

연구는 급성 호흡기 감염의 징후 및 증상이 있는 시험대상자로부터 획득한 잔여 검체를 사용한 관찰, 전향적·후향적 연구로 설계되었습니다. 참여 시험기관은 임상시험 계획서 및 시험기관의 특정 지침에 따라 신선 및/또는 냉동 임상 검체의 검사를 요청 받았습니다.

코펜하겐(덴마크), 본(독일) 및 파리(프랑스)에 위치한 세(3) 개의 병원 실험실이 연구에 참여했습니다. QIAstat-Dx Respiratory Panel 로 검사한 검체는 시험기관의 표준 치료(standard of care, SOC) 방법 결과와 다양한 검증 및 시판된 이용 가능한 분자생물학적 방법들과 비교되었습니다. 이러한 접근법은 SOC 에 의해 검출되지 않았고/않았거나 불일치 결과의 최종 불일치 해결에 고려되었던 병원체에 대한 결과를 제공했습니다. 그러므로, QIAstat-Dx Respiratory Panel 분석 결과는 FilmArray® Respiratory Panel 1.7 및 2 와 Allplex® Respiratory Panel 분석과 비교되었습니다.

총 578 개의 임상 UTM 환자 검체가 연구에 등록되었습니다. 한(1) 개의 검체가 QIAstat-Dx 와 비교 검사 간에 잘못 배치된 검체이므로 분석에서 배제되었습니다. 577 개의 검체 중 일곱(7) 개의 검체가 최초 검사에서 실패했으며, 그 결과 첫 번째 검사의 성공률은 98.8%이었습니다.

실패율은 0.17%였던 내부 대조군의 실패율을 포함합니다(1/577). 두(2) 개의 검체는 불충분한 남은 시료 용량으로 인해 재검사하지 못했습니다. 최초 내부 대조군 실패를 보였던 검체는 재검사에서 성공적이었습니다.

열다섯(15) 개의 병원체 결과는 SOC 결과가 없어서(10 개 결과) 또는 이용 가능한 해상도 방법이 없어서(5 개 결과) 해명되지 못했습니다. 이로 인해 2 개 검체가 제외되었고, 여러 검출된 병원체가 있는 검체(동시 감염 검체)에 해결 불가능한 상태로 남은 결과가 있었습니다.

임상 민감도 또는 양성 일치율(Positive Percent Agreement, PPA)은 $100\% \times (TP/[TP + FN])$ 로 계산되었습니다. 진양성(True Positive, TP)은 생체에 대해 QIAstat-Dx Respiratory Panel 과 비교 방법이 모두 양성 결과였음을 의미하고 위음성(False Negative, FN)은 QIAstat-Dx Respiratory Panel 결과는 음성이었지만 비교 방법 결과는 양성이었음을 의미합니다. 특이성 또는 음성 일치율(Negative Percent Agreement, NPA)은 $100\% \times (TN/[TN + FP])$ 로 계산되었습니다. 진음성(True Negative, TN)은 QIAstat-Dx Respiratory Panel 과 비교 방법이 모두 생체에 대해 음성 결과였음을 의미하고 위양성(False Positive, FP)은 QIAstat-Dx Respiratory Panel 결과는 양성이었지만 비교 방법 결과는 음성이었음을 의미합니다. 개별 병원체의 임상 특이성 계산의 경우, 전체 이용 가능한 결과가 관련된 진양성 및 위양성 생체 결과를 제외하고 사용되었습니다. 정확한 이항 양측 95% 신뢰 구간이 각 점 추정치에 대해 계산되었습니다.

총 698 개의 결과를 분석에 이용할 수 있었습니다.* 전체 임상 민감도 또는 PPA 는 475 개의 결과로부터 계산할 수 있었습니다. 전체 임상 특이성 또는 NPA 는 190 개의 전체 음성 검체로부터 계산되었습니다.

전체적으로, 462 개의 진양성 및 204 개의 진음성 QIAstat-Dx Respiratory Panel 결과와 함께 13 개의 위음성 및 17 개의 위양성 결과가 확인되었습니다.

* 7 개의 *Chlamydomydia pneumoniae* 병원체가 비교 방법에 의해 연구 검체에서 확인되었습니다. 이는 모두 QIAstat-Dx Respiratory Panel 에서도 정확하게 검출되었으나 이 CE 마크가 적용되지 않으므로, 따라서 민감도 성능이 보고되지 않습니다. 그러나 7 개의 결과는 개별 패널 병원체에 대한 특이성 계산에 포함됩니다.

표 4 는 95% 신뢰 구간의 QIAstat-Dx Respiratory Panel 임상 민감도(또는 양성 일치율) 및 임상 특이성(또는 음성 일치율)을 표시하고 있습니다.

표 4. QIAstat-Dx Respiratory Panel 성능 데이터

| | TP/(TP+FN) | 민감도/PPA | 95% CI | TN/(TN+FP) | 특이성/NPA | 95% CI |
|-------------------------|------------|---------|-------------|------------|---------|-------------|
| 전체 | 462/475 | 97.3% | 95.4%~98.4% | 187/190 | 98.4% | 95.5%~99.5% |
| 바이러스 | | | | | | |
| 아데노바이러스 | 35/36 | 97.2% | 85.8%~99.5% | 659/662 | 99.5% | 98.7%~99.8% |
| 보카바이러스 | 4/4 | 100% | 51.0%~100% | 693/694 | 99.9% | 99.2%~100% |
| 코로나바이러스 229E | 4/5 | 80.0% | 37.6%~96.4% | 693/693 | 100% | 99.4%~100% |
| 코로나바이러스 HKU1 | 8/8 | 100% | 67.6%~100% | 690/690 | 100% | 99.4%~100% |
| 코로나바이러스 OC43 | 10/10 | 100% | 72.2%~100% | 688/688 | 100% | 99.4%~100% |
| 코로나바이러스 NL63 | 22/24 | 91.7% | 74.2%~97.7% | 674/674 | 100% | 99.4%~100% |
| 인간 리노바이러스/엔테로바이러스 | 56/59 | 94.9% | 86.1%~98.3% | 629/639 | 98.4% | 97.1%~99.1% |
| 인간 메타뉴모바이러스 | 22/22 | 100% | 85.1%~100% | 676/676 | 100% | 99.4%~100% |
| 인플루엔자 A H3N2 | 36/36 | 100% | 90.4%~100% | 662/662 | 100% | 99.4%~100% |
| 인플루엔자 A H1N1 | 29/29 | 100% | 88.3%~100% | 669/669 | 100% | 99.4%~100% |
| 인플루엔자 A H1-2009 균주(감염병) | 11/12 | 91.7% | 64.5%~98.5% | 688/688 | 100% | 99.4%~100% |
| 인플루엔자 B | 55/56 | 98.2% | 90.6%~99.7% | 642/642 | 100% | 99.4%~100% |

(표 4 계속)

| | TP/(TP+FN) | 민감도/PPA | 95% CI | TN/(TN+FP) | 특이성/NPA | 95% CI |
|------------------------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|----------------|
| 바이러스(계속) | | | | | | |
| 파라인플루엔자 바이러스 1(PIV 1) | 19/19 | 100% | 83.2%~ 100% | 696/696 | 100% | 99.5%~ 100% |
| 파라인플루엔자 바이러스 2(PIV 2) | 3/3 | 100% | 43.8%~ 100% | 695/695 | 100% | 99.5%~ 100% |
| 파라인플루엔자 바이러스 3(PIV 3) | 9/9 | 100% | 70.1%~ 100% | 689/689 | 100% | 99.4%~ 100% |
| 파라인플루엔자 바이러스 4(PIV 4) | 5/6 | 83.3% | 43.6%~ 97.0% | 691/692 | 99.9% | 99.2%~ 100% |
| 호흡기 세 포 융 합 바이러스 | 100/103 | 97.1% | 91.8%~ 99.0% | 595/595 | 100% | 99.4%~ 100% |
| 박테리아 | | | | | | |
| <i>Bordetella pertussis</i> | 29/29 | 100% | 88.3%~ 100% | 693/693 | 100% | 99.4%~ 100% |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | 21/21 | 100% | 84.5%~ 100% | 676/677 | 99.8% | 99.2%~ 100% |

참고: *Legionella pneumophila* 에 대해 이용할 수 있는 평가 가능한 결과는 없습니다. 이는 이 병원체가 연구에서 적은 수로 확인되었기 때문이며(2 개 검출) 비교 방법 결과가 없기 때문입니다.

참고: 파라인플루엔자 바이러스 1(17/19 개 결과) 및 *Bordetella pertussis*(24/29 개 결과)에 대한 민감도 및 특이성 성능 결과는 이전 연구(DiagCORE[현재 QIAstat-Dx] Respiratory Panel 분석 연구라고 함)로부터의 결과를 포함합니다. 2 개의 분석 간에 병원체에 대한 설계나 기타 변경이 없었기 때문에 이러한 결과는 해당 병원체에 대한 성능을 제대로 반영하고 있습니다. 각 생체에 대한 민감도 및 특이성 계산을 제외하고, 41 개의 결과는 나머지 QIAstat-Dx Respiratory Panel 분석 병원체에 대한 특이성 성능을 계산하기 위해 사용된 698 개의 결과의 일부가 아니었습니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel 분석은 총 228 개의 생체 결과에 대해 101 개의 검체에서 여러 생체들을 검출했습니다. 이는 전체 양성 시료의 26.3%(101/385)로 나타납니다. 팔십이(82) 개의 검체가 이중 감염이었고, 15 개는 삼중 감염이었으며 나머지 동시 감염 검체는 4 개(3 개 검체) 또는 그 이상의 병원체(1 개 검체가 7 개 병원체 보유)를 보유했습니다.

건식 면봉 표본 시료

건식 면봉 표본으로서의 면봉 표본을 검사할 능력을 평가하기 위해, 그리고 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 바로 삽입 시 건식 면봉 표본 시료의 임상적 성능 특징을 평가하기 위해 총 448 개의 임상 검체가 검사되었습니다. 이 검사는 UTM 시료의 성능 평가에 참여한 3 개 시험기관 중 2 곳에서 수행되었습니다. 목적은 건식 면봉 표본과 UTM 시료의 성능 특징 간 등가성을 입증하는 것이었습니다.

한 임상 시험기관에서는 연구의 이 부분에 환자를 등록하기 위해 임상시험 심의위원회(Institutional Review Board, IRB) 승인을 요청 및 획득하였습니다. 연구 참여에 동의한 환자는 2 개의 비인두암 면봉 표본(각각의 비공으로부터 하나씩)을 제공했습니다. 한 면봉 표본은 UTM 으로 옮겼고 다른 하나의 면봉 표본은 바로 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 삽입되었습니다. 구십팔(98) 개의 면봉 표본 검체가 이후 이러한 방법으로 등록되었습니다. 건식 면봉 표본 결과의 수를 늘리고 모든 QIAstat-Dx Respiratory Panel 병원체가 건식 면봉 표본 검사에서 나타나도록 보장하기 위해, 추가로 350 개의 면봉 표본이 UTM 에 침지되었습니다. 각 면봉 표본이 침지 후 약 0.1 ml 의 액체를 보유하므로, 두(2) 개의 면봉 표본이 동시에 UTM 에 침지되었고 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 에 삽입되었습니다. 모든 면봉 표본 시료에 대해, 동시에 검사한 UTM 시료와 비교 방법으로 제공되었습니다.

최소 5 개의 건식 면봉 표본 결과를 각 QIAstat-Dx Respiratory Panel 병원체에 대해 이용할 수 있었습니다. 각각 3 개 및 2 개의 결과만 있었으므로 파라인플루엔자 바이러스 4 및 *Legionella pneumophila* 를 제외하고 이용할 수 있었습니다.

임상 민감도(또는 PPA)는 $100\% \times (TP/[TP + FN])$ 로 계산되었습니다. 진양성(TP)은 특정 생체에 대해 건식 면봉 표본과 UTM 시료가 모두 양성 결과였음을 의미하며 위음성(FN)은 건식 면봉 표본 결과가 음성이었던 반면 UTM 시료 결과는 양성이었음을 의미합니다. 특이성(또는 NPA)은 $100\% \times (TN/[TN + FP])$ 로 계산되었습니다. 진음성(TN)은 특정 생체에 대해 건식 면봉 표본과 UTM 시료가 모두 음성 결과였음을 의미하며 위양성(FP)은 건식 면봉 표본 결과가 양성이었던 반면 UTM 시료 결과는 음성이었음을 의미합니다. 정확한 이항 양측 95% 신뢰 구간이 각 점 추정치에 대해 계산되었습니다.

모든 건식 면봉 표본에 대해, 총 440 개의 결과를 분석에 이용할 수 있었습니다. 전체 임상 민감도(또는 PPA)는 244 개의 결과로부터 계산할 수 있었습니다. 전체 임상 특이성(또는 NPA)는 196 개 결과로부터 계산되었습니다. 전체적으로, 241 개의 진양성 및 188 개의 진음성 건식 면봉 표본 결과와 함께 3 개의 위음성 및 8 개의 위양성 건식 면봉 표본 결과가 확인되었습니다.

동일한 검체를 검사하기 때문에, 침지 면봉 표본은 건식 면봉 표본과 UTM 시료 성능의 등가성을 평가하는 데 있어서 가장 관련성이 높은 것으로 간주될 수 있습니다. 건식 면봉 표본의 검사는 동일한 환자로부터 2 개의 검체 수집을 포함하며, 한 쌍으로 수집함에도 불구하고 이러한 접근법으로 인해 편향이 발생할 수 있습니다. 또한 비인두암 면봉 표본 수집은 환자의 불편함 수준을 나타내므로, 획득된 산출은 두 수집 간에 다를 수 있습니다.

모든 침지 면봉 표본에 대해, 총 337 개의 결과를 분석에 이용할 수 있었습니다. 전체 임상 민감도(또는 PPA)는 178 개의 결과로부터 계산할 수 있었습니다. 전체 임상 특이성(또는 NPA)는 159 개 결과로부터 계산되었습니다. 전체적으로, 177 개의 진양성 및 156 개의 진음성 침지 면봉표본 결과와 함께 1 개의 위음성 및 3 개의 위양성 침지 면봉 표본 결과가 확인되었습니다.

다음 페이지의 표 5 는 건식 면봉 표본 시료에 대한 95% 신뢰 구간의 QIAstat-Dx Respiratory Panel 민감도 및 특이성 특성을 보여줍니다.

표 5. 건식 면봉 표본 시료에 대한 QIAstat-Dx Respiratory Panel 성능 데이터

| | TP/(TP+FN) | 민감도/ppA | 95% CI | TN/(TN+FP) | 특이성/NPA | 95% CI |
|-------------|------------|---------|-------------|------------|---------|-------------|
| 모든 건식 면봉 표본 | 241/244 | 98.8% | 96.4%~99.6% | 188/196 | 95.9% | 92.2%~97.9% |
| 침지 면봉 표본 | 177/178 | 99.4% | 96.9%~99.9% | 156/159 | 98.1% | 94.6%~99.4% |

결론

이 광범위한 다기관 연구는 QIAstat-Dx Respiratory Panel 분석에서 UTM 시료 성능으로 UTM 시료의 성능 및 건식 면봉 표본의 등가성을 평가하고자 했습니다.

UTM 시료의 전체 임상 민감도는 97.3%(95% CI, 95.4%~98.4%)인 것으로 확인되었습니다. 190 개의 전체 음성 검체에서 전체 임상 특이성은 98.4%(95% CI, 95.5%~99.5%)였습니다.

건식 면봉 표본 시료의 전체 임상 민감도는 98.8%(95% CI, 96.4%~99.6%)인 것으로 확인되었습니다. 건식 면봉 표본 시료에 대한 전체 임상 특이성은 95.9%(95% CI, 92.2%~97.9%)였습니다.

건식 면봉 표본 연구 결과는 건식 면봉 표본으로 바로 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 에 삽입되는 면봉 표본 검사 능력을 뒷받침합니다. 건식 면봉 표본 시료는 98.5%(95% CI, 97%~99.5%)였던 UTM 시료와 침지 면봉 표본 간의 전체 일치율로 입증된 바와 같이, UTM 시료와 탁월한 일치율을 보이는 것으로 확인되었습니다.

분석 성능

민감도(검출 한계)

분석 민감도 또는 검출 한계(Limit of Detection, LoD)는 최저 농도로 규정되어 있으며 검체의 $\geq 95\%$ 에서 검사한 양성 판정을 생성합니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel 의 LoD 는 QIAstat-Dx Respiratory Panel 로 검출 가능한 개별 병원체를 나타내는 선택된 균주를 사용해 피분석물별로 결정되었습니다. 시뮬레이션된 NPS 검체 매트릭스(Copan UTM 에서 배양된 인간 세포)는 한(1) 개 또는 그 이상의 병원체로 스파이크되었고 20 개의 복제물에서 검사되었습니다.

각 QIAstat-Dx Respiratory Panel 표적에 대한 개별 LoD 값은 표 6(다음 페이지)에 나와 있습니다.

표 6. QIAstat-Dx Respiratory Panel 로 검사한 여러 호흡기 표적 균주로부터 획득한 LoD 값

| 병원체 | 균주 | 소스 | 농도 | 검출률 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|
| 인플루엔자 A H1N1 | A/New Jersey/8/76 | ATCC® VR-897 | 28.1 CEID ₅₀ /ml | 20/20 |
| | A/Brisbane/59/07 | ZeptoMetrix® 0810244CFHI | 0.04 TCID ₅₀ /ml | 19/20 |
| | A/New Caledonia/20/99 | ZeptoMetrix 0810036CFHI | 4.6 TCID ₅₀ /ml | 19/20 |
| 인플루엔자 A H3N2 | A/Virginia/ATCC6/2012 | ATCC VR-1811 | 0.4 PFU/ml | 19/20 |
| | A/Wisconsin/67/2005 | ZeptoMetrix 0810252CFHI | 2.5 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| | A/Port Chalmers/1/73 | ATCC VR-810 | 791.1 CEID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 인플루엔자 A, 아형 H1N1/2009 | A/Virginia/ATCC1/2009 | ATCC VR-1736 | 2.6 PFU/ml | 20/20 |
| | A/SwineNY/03/2009 | ZeptoMetrix 0810249CFHI | 14.1 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 인플루엔자 B | B/Virginia/ATCC5/2012 | ATCC VR-1807 | 0.08 PFU/ml | 20/20 |
| | B/FL/04/06 | ATCC VR-1804 | 34.8 CEID ₅₀ /ml | 19/20 |
| | B/Taiwan/2/62 | ATCC VR-295 | 28.1 CEID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 코로나바이러스 229E | – | ATCC VR-740 | 0.3 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 코로나바이러스 OC43 | – | ATCC-1558 | 0.1 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 코로나바이러스 NL63 | – | ZeptoMetrix 0810228CFHI | 0.01 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 코로나바이러스 HKU1 | – | ZeptoMetrix NATRPV-IDI | 1/300* | 19/20 |
| 파라인플루엔자 바이러스 1(PIV 1) | C35 | ATCC VR-94 | 23.4 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 파라인플루엔자 바이러스 2(PIV 2) | Greer | ATCC VR-92 | 5.0 TCID ₅₀ /ml | 19/20 |
| 파라인플루엔자 바이러스 3(PIV 3) | C 243 | ATCC VR-93 | 15.8 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 파라인플루엔자 바이러스 4(PIV 4) | M-25 | ATCC VR-1378 | 2.8 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |

* 스톡 농도로부터 상대적 희석.

(표 6 계속)

| 병원체 | 균주 | 소스 | 농도 | 검출률 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------|
| 호흡기 세포융합 바이러스 A | A2 | ATCC VR-1540 | 2.8 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 호흡기 세포융합 바이러스 B | 9320 | ATCC VR-955 | 0.02 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 인간 메타뉴모바이러스 | Peru6-2003(유형 B2) | ZeptoMetrix 0810159CFHI | 1.1 TCID ₅₀ /ml | 19/20 |
| | hMPV-16, IA10-2003 | ZeptoMetrix 0810161CFHI | 3.0 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 아데노바이러스 | GB(아데노바이러스 B3) | ATCC VR-3 | 50.0 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| | R1-67(아데노바이러스 E4) | ATCC VR-1572 | 15.8 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| | 아데노이드 75 (아데노바이러스 C5) | ATCC VR-5 | 5.0 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| | 아데노이드 71 (아데노바이러스 C1) | ATCC VR-1 | 5.0 TCID ₅₀ /ml | 19/20 |
| | 아데노바이러스 C2 | ATCC VR-846 | 28.1 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| | 아데노바이러스 C6 | ATCC VR-6 | 505.6 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| 보카바이러스 | 임상 검체 | — | >1.0 copies/ml | 20/20 |
| 엔테로바이러스 | /US/IL/14-18952 (엔테로바이러스 D68) | ATCC VR-1824 | 50.0 TCID ₅₀ /ml | 19/20 |
| | 에코바이러스 6(D-1(Cox)) | ATCC VR-241 | 0.001 TCID ₅₀ /ml | 19/20 |
| 리노바이러스 | 1059(리노바이러스 B14) | ATCC VR-284 | 28.1 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| | HGP(리노바이러스 A2) | ATCC VR-482 | 0.3 TCID ₅₀ /ml | 19/20 |
| | 11757(리노바이러스 A16) | ATCC VR-283 | 8.9 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| | 유형 1A | ATCC VR-1559 | 5.0 TCID ₅₀ /ml | 20/20 |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | M129-B7 | ATCC 29342 | 0.1 CFU/ml | 20/20 |
| <i>Legionella pneumophila</i> | CA1 | ATCC 700711 | >0.01 CFU/ml | 20/20 |
| <i>Bordetella pertussis</i> | 1028 | ATCC BAA-2707 | >0.001 CFU/ml | 20/20 |
| | A639 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI | 1/10000* | 19/20 |

* 스톱 농도로부터 상대적 희석.

분석 강건성

임상 비인두암 면봉 표본 검체에서 내부 대조군 성능을 분석함으로써, 강건한 분석항목 성능에 대한 검증이 평가되었습니다. 검출 가능한 모든 병원체에 대해 음성인 삼십(30)개의 개별 비인두암 면봉 표본 검체가 QIAstat-Dx Respiratory Panel 로 분석되었습니다.

검사한 모든 검체가 QIAstat-Dx Respiratory Panel 의 내부 대조군에 대해 양성 결과 및 유효한 성능을 보였습니다.

배타성(분석 특이성)

배타성 연구는 인실리코 분석 및 체외 검사로 호흡기 또는 이 패널에서 다뤄지지 않는 비호흡기 생체에 대한 QIAstat-Dx Respiratory Panel 의 분석 특이성을 평가했습니다. 이러한 생체는 호흡기 패널 생체와 관련이 있으나 구별되는 시료를 포함하거나 의도한 검사 모집단으로부터 수집된 시료에 존재할 수 있는 시료를 포함합니다. 선택한 생체는 임상적으로 관련이 있고(상기도에서 군집화하거나 호흡기 증상을 유발함), 흔한 피부 상재균 또는 실험실 오염물질이거나 모집단에서 많이 감염되었을 수 있는 미생물입니다.

검체는 잠재적 교차 반응 생체를 생체 스톱을 기준으로 가능한 최고 농도에서 시뮬레이션된 비인두암 면봉 표본 검체 매트릭스에 스파이크하여 준비되었으며, 바이러스 표적에 대해 10^5 TCID₅₀/ml 및 박테리아 표적에 대해 10^6 CFU/ml 이 선호됩니다.

보르데텔라 종과의 특정 수준의 교차 반응성이 예비 시퀀스 분석에서 예측되었고 높은 농도의 *보르데텔라 홀메시*를 검사했을 때 관찰되었습니다. 높은 농도의 *Bordetella bronchiseptica* 및 *Bordetella parapertussis*에서는 교차 반응성이 관찰되지 않았습니다. *Bordetella pertussis* 검출(삽입 인자 IS481)에 사용된 표적 유전자는 트랜스포존으로 기타 보르데텔라 종에도 존재합니다. 표 7(다음 페이지)에는 이 연구에서 검사한 병원체의 목록이 나와 있습니다.

표 7. 검사한 분석 특이성 병원체 목록

| 유형 | 병원체 |
|------|-------------------------------------|
| 박테리아 | <i>Bordetella bronchiseptica</i> |
| | <i>Bordetella holmesii</i> |
| | <i>Bordetella parapertussis</i> |
| | <i>Chlamydia trachomatis</i> |
| | <i>Enterobacter aerogenes</i> |
| | <i>Escherichia coli</i> (O157) |
| | <i>Haemophilus influenzae</i> |
| | <i>Klebsiella oxytoca</i> |
| | <i>Klebsiella pneumoniae</i> |
| | <i>Lactobacillus acidophilus</i> |
| | <i>Moraxella catarrhalis</i> |
| | <i>Mycoplasma genitalium</i> |
| | <i>Mycoplasma hominis</i> |
| | <i>Neisseria elongata</i> |
| | <i>Neisseria gonorrhoeae</i> |
| | <i>Neisseria meningitidis</i> |
| | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> |
| | <i>Serratia marcescens</i> |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> |
| | <i>Staphylococcus epidermidis</i> |
| | <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> |
| | <i>Streptococcus agalactiae</i> |
| | <i>Streptococcus pneumoniae</i> |
| | <i>Streptococcus pyogenes</i> |
| | <i>Streptococcus salivarius</i> |
| 바이러스 | 사이토메갈로바이러스 |
| | 엡스타인 바 바이러스 |
| | 단순 헤르페스 바이러스 1 |
| | 단순 헤르페스 바이러스 2 |
| | 홍역 바이러스 |
| 진균 | 멤프스 |
| | <i>Aspergillus fumigatus</i> |
| | <i>Candida albicans</i> |
| | <i>Cryptococcus neoformans</i> |
| | |

검사한 모든 병원체는 음성 결과를 보였으며 QIAstat-Dx Respiratory Panel 에서 검사한 생체에 대해 관찰된 교차 반응성은 없었습니다(상기 설명된 바와 같이 *보르데텔라 홀매시*는 예외).

QIAstat-Dx Respiratory Panel 에 포함된 모든 프라이머/프로브 설계에 대해 인실리코 분석이 수행되어, 교차 반응성이 없는 표적에 대한 특이적인 증폭 및 검출을 입증했습니다.

포용성(분석 반응성)

각 호흡기 패널 표적 생체의 유전적 다양성을 나타내는 다양한 균주("포용성 균주")의 검출을 분석하기 위해 포용성 연구가 수행되었습니다. 모든 피분석물에 대한 포용성 균주가 연구에 포함되었고, 여러 생체에 대한 종/유형을 대표했습니다(예: 여러 지리적 영역으로부터, 여러 역년에 동정된 다양한 인플루엔자 A 균주가 포함됨). 표 8(다음 페이지)에는 이 연구에서 검사한 호흡기 병원체의 목록이 나와 있습니다.

표 8. 분석 반응성 검사 병원체 목록

| 병원체 | 아형/혈청형 | 균주 | 소스 |
|--------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 인플루엔자 A | H1N1 | A/PR/8/34 | ATCC VR-1469 |
| | | A/New Jersey/8/76 | ATCC VR-897 |
| | | A/Brisbane/59/07 | ZeptoMetrix 0810244CFHI |
| | | A/New Caledonia/20/99 | ZeptoMetrix 0810036CFHI |
| | H3N2 | A/Virginia/ATCC6/2012 | ATCC VR-1811 |
| | | A/Wisconsin/67/2005 | ZeptoMetrix 0810252CFHI |
| | | A/Port Chalmers/1/73 | ATCC VR-810 |
| | | A/Victoria/3/75 | ATCC VR-822 |
| | | A/Brisbane/10/07 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| | H1N1(감염병) | A/Virginia/ATCC2/2009 | ATCC VR-1737 |
| | | A/Virginia/ATCC3/2009 | ATCC VR-1738 |
| | | A/Virginia/ATCC1/2009 | ATCC VR-1736 |
| | | A/SwineNY/03/2009 | ZeptoMetrix 0810249CFHI |
| 인플루엔자 B | 사용 불가능 | H1N1/NY/02/09 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| | | B/Virginia/ATCC5/2012 | ATCC VR-1807 |
| | | B/FL/04/06 | ATCC VR-1804 |
| | | B/Taiwan/2/62 | ATCC VR-295 |
| | | B/Panama/45/90 | ZeptoMetrix NATFLUB-ERCM |
| | | B/Florida/02/06 | ZeptoMetrix 810037CFHI |
| | | B/Maryland/1/59 | ATCC VR-296 |
| 코로나바이러스 229E | 사용 불가능 | 사용 불가능 | ATCC VR-740 |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| 코로나바이러스 OC43 | 사용 불가능 | 사용 불가능 | ATCC-1558 |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix 0810024CFHI |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| 코로나바이러스 NL63 | 사용 불가능 | 사용 불가능 | ZeptoMetrix 0810228CFHI |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| 코로나바이러스 HKU1 | 사용 불가능 | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |

(표 8 계속)

| 병원체 | 아형/혈청형 | 균주 | 소스 |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------|
| 파라인플루엔자 1 | 사용 불가능 | C35 | ATCC VR-94 |
| | | 해당 없음 | ZeptoMetrix NATPARA1-ST |
| | | 해당 없음 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| 파라인플루엔자 2 | 사용 불가능 | Greer | ATCC VR-92 |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix 0810015CFHI |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| 파라인플루엔자 3 | 사용 불가능 | C 243 | ATCC VR-93 |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATPARA3-ST |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| 파라인플루엔자 4 | A | M-25 | ATCC VR-1378 |
| | B | CH 19503 | ATCC VR-1377 |
| | B | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| RSV A | 사용 불가능 | A2 | ATCC VR-1540 |
| | | Long | ATCC VR-26 |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| RSV B | 사용 불가능 | 9320 | ATCC VR-955 |
| | | 18537 | ATCC VR-1580 |
| | | WV/14617/85 | ATCC VR-1400 |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATRSVB-ST |
| 인간 메타뉴모바이러스 | B1 | Peru2-2002 | ZeptoMetrix 0810156CFHI |
| | B1 | IA18-2003 | ZeptoMetrix 0810162CFH |
| | B1 | Peru3-2003 | ZeptoMetrix 0810158CFHI |
| | B2 | Peru6-2003 | ZeptoMetrix 0810159CFHI |
| | B2 | Peru1-2002 | ZeptoMetrix 0810157CFHI |
| | A1 | hMPV-16, IA10-2003 | ZeptoMetrix 0810161CFHI |
| | A1 | IA3-2002 | ZeptoMetrix 0810160CFHI |
| | A2 | IA14-2003 | ZeptoMetrix 0810163CFH |

(표 8 계속)

| 병원체 | 아형/혈청형 | 균주 | 소스 |
|-----------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 아데노바이러스 B | B21 | AV-1645[128] | ATCC VR-256 |
| | B7 | Gomen | ATCC VR-7 |
| | B3 | GB | ATCC VR-3 |
| | B3 | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATADV3-ST |
| 아데노바이러스 C | C1 | 아데노이드 71 | ATCC VR-1 |
| | C2 | 사용 불가능 | ATCC VR-846 |
| | C5 | 아데노이드 75 | ATCC VR-5 |
| | C6 | 사용 불가능 | ATCC VR-6 |
| 아데노바이러스 E | E4 | RI-67 | ATCC VR-1572 |
| 보카바이러스 | 사용 불가능 | 사용 불가능 | ZeptoMetrix 0601178NTS |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix MB-004 |
| 엔테로바이러스 A | EV-A71 | EV-A71 | ZeptoMetrix 0810236CFHI |
| 엔테로바이러스 B | E-11 | Gregory | ATCC VR-41 |
| | E-30 | Bastianni | ATCC VR-1660 |
| | CV-A9 | Griggs | ATCC VR-1311 |
| | CV-B1 | Conn-5 | ATCC VR-28 |
| | CV-B2 | Ohio-1 | ATCC VR-29 |
| | CV-B3 | Nancy | ATCC VR-30 |
| | E-17 | CHHE-29 | ATCC VR-47 |
| | 사용 불가능 | 에코바이러스 6(D-1(Cox)) | ATCC VR-241 |
| 엔테로바이러스 C | CV-A21 | Kuykendall[V-024-001-012] | ATCC VR-850 |
| 엔테로바이러스 D | D68 | US/IL/14-18952 | ATCC VR-1824 |
| | EV-D68 | US/MO/14-18947 | ATCC VR-1823 |

(표 8 계속)

| 병원체 | 아형/혈청형 | 균주 | 소스 |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 리노바이러스 A | A1 | 사용 불가능 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| | 1A | 사용 불가능 | ATCC VR-1559 |
| | A2 | HGP | ATCC VR-482 |
| | A16 | 11757 | ATCC VR-283 |
| | HRV-1B | B632 | ATCC VR-1645 |
| | HRV-A39 | 209 | ATCC VR-340 |
| 리노바이러스 B | B14 | 1059 | ATCC VR-284 |
| <i>M. pneumoniae</i> | 1 | PI 1428 | ATCC 29085 |
| | 사용 불가능 | M129 | ZeptoMetrix NATMPN(M129)-ERCM |
| | 사용 불가능 | M129-B7 | ATCC 29342 |
| | 사용 불가능 | 이튼 인자의 FH 균주[NCTC 10119] | ATCC 15531 |
| <i>L. pneumophila</i> | 사용 불가능 | CA1 | ATCC 700711 |
| | | <i>Legionella pneumophila</i> 아종 | ATCC 43703 |
| | | <i>Pneumophila</i> /169-MN-H | |
| | | 사용 불가능 | ZeptoMetrix 0601645NTS |
| <i>B. pertussis</i> | 사용 불가능 | 아종 <i>Pneumophila/Philadelphia-1</i> | ATCC 33152 |
| | | I028 | ATCC BAA-2707 |
| | | A639 | ZeptoMetrix NATRVP-IDI |
| | | 18323[NCTC 10739] | ATCC 9797 |

검사한 모든 병원체가 검사한 농도에서 양성 결과를 보였습니다.

동시 감염

하나의 비인두암 면봉 표본 검체에 포함된 여러 QIAstat-Dx Respiratory Panel 피분석물이 QIAstat-Dx Respiratory Panel 로 검출될 수 있음을 입증하기 위해 동시 감염 연구가 수행되었습니다.

여러 생체가 고농도 및 저농도로 하나의 검체에서 조합되었습니다. 생체의 선택은 관련성, 유병률 및 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 배치(여러 반응 챔버 내 표적 분포)를 기준으로 이루어졌습니다.

피분석물은 고농도(50x LoD 농도) 및 저농도(5x LoD 농도)에서 시뮬레이션된 NPS 검체 매트릭스(UTM 에서 배양된 인간 세포)로 스파이크되었고 여러 조합으로 검사되었습니다. 표 9 에는 이 연구에서 검사한 동시 감염의 조합이 나와 있습니다.

표 9. 검사한 동시 감염 조합 목록

| 병원체 | 균주 | 농도 |
|----------------------|-----------------------|---------|
| 인플루엔자 A/H3N2 | A/Virginia/ATCC6/2012 | 50x LoD |
| 아데노바이러스 C5 | 아데노이드 75 | 5x LoD |
| 인플루엔자 A/H3N2 | A/Virginia/ATCC6/2012 | 5x LoD |
| 아데노바이러스 C5 | 아데노이드 75 | 50x LoD |
| 파라인플루엔자 3 | C243 | 50x LoD |
| 인플루엔자 A/H1N1/2009 | NY/03/09 | 5x LoD |
| 파라인플루엔자 3 | C243 | 5x LoD |
| 인플루엔자 A/H1N1/2009 | NY/03/09 | 50x LoD |
| 호흡기 세포융합 바이러스 A | A2 | 50x LoD |
| 인플루엔자 B | B/FL/04/06 | 5x LoD |
| 호흡기 세포융합 바이러스 A | A2 | 5x LoD |
| 인플루엔자 B | B/FL/04/06 | 50x LoD |
| 아데노바이러스 C5 | 아데노이드 75 | 50x LoD |
| 리노바이러스 B, 유형 HRV-B14 | 1059 | 5x LoD |
| 아데노바이러스 C5 | 아데노이드 75 | 5x LoD |
| 리노바이러스 B, 유형 HRV-B14 | 1059 | 50x LoD |

(표 9 계속)

| 병원체 | 균주 | 농도 |
|----------------------|------------|---------|
| 호흡기 세포융합 바이러스 A | A2 | 50x LoD |
| 리노바이러스 B, 유형 HRV-B14 | 1059 | 5x LoD |
| 호흡기 세포융합 바이러스 A | A2 | 5x LoD |
| 리노바이러스 B, 유형 HRV-B14 | 1059 | 50x LoD |
| 호흡기 세포융합 바이러스 B | 9320 | 50x LoD |
| 보카바이러스 | 사용 불가능 | 5x LoD |
| 호흡기 세포융합 바이러스 B | 9320 | 5x LoD |
| 보카바이러스 | 사용 불가능 | 50x LoD |
| 코로나바이러스 OC43 | 사용 불가능 | 50x LoD |
| 리노바이러스 B, 유형 HRV-B14 | 1059 | 5x LoD |
| 코로나바이러스 OC43 | 사용 불가능 | 5x LoD |
| 리노바이러스 B, 유형 HRV-B14 | 1059 | 50x LoD |
| 인간 메타뉴모바이러스 B2 | Peru6-2003 | 50x LoD |
| 파라인플루엔자 1 | C-35 | 5x LoD |
| 인간 메타뉴모바이러스 B2 | Peru6-2003 | 5x LoD |
| 파라인플루엔자 1 | C-35 | 50x LoD |
| 코로나바이러스 229E | 사용 불가능 | 50x LoD |
| 호흡기 세포융합 바이러스 A | A2 | 5x LoD |
| 코로나바이러스 229E | 사용 불가능 | 5x LoD |
| 호흡기 세포융합 바이러스 A | A2 | 50x LoD |
| 호흡기 세포융합 바이러스 B | 9320 | 50x LoD |
| 코로나바이러스 NL63 | 사용 불가능 | 5x LoD |
| 호흡기 세포융합 바이러스 B | 9320 | 5x LoD |
| 코로나바이러스 NL63 | 사용 불가능 | 50x LoD |

검사한 모든 동시 감염이 저농도 및 고농도에서 조합된 두 병원체에 대해 양성 결과가 나왔습니다. QIAstat-Dx Respiratory Panel 로 검사한 검체에서 동시 감염의 존재로 인한 결과에서의 영향은 관찰되지 않았습니다.

간섭 물질

이 연구에서는 QIAstat-Dx Respiratory Panel 의 성능에 대한 잠재적 간섭 물질의 영향을 평가했습니다. 간섭 물질은 각각 비인두에서 일반적으로 발견되거나 시료 수집 중 NPS 시료에 유입될 수 있는 내인성 및 외인성 물질을 포함합니다.

패널로부터의 호흡기 병원체 모두에 대한 일습의 선택한 검체가 간섭 물질 검사에 사용되었습니다. 간섭 물질은 기준 비인두암 면봉 표본 시료에서 확인될 가능성이 높은 물질의 농도를 상회할 것으로 예상되는 수준에서 선택한 검체로 스파이크되었습니다. 선택한 검체는 직접 검체 대 검체 비교를 위해 잠재적 억제 물질을 추가하거나 추가 하지 않은 상태에서 검사되었습니다. 또한, 병원체 음성 검체가 잠재적 억제 물질로 스파이크되었습니다.

검사한 물질 중 내부 대조군 또는 통합된 검체에 들어 있는 병원체에 간섭을 보인 것은 없었습니다.

표 10, 11, 12(아래 및 다음 페이지)에는 QIAstat-Dx Respiratory Panel 에 대해 검사된 간섭 물질의 농도가 나와 있습니다.

표 10. 검사한 내인성 물질

| 물질 | 농도 |
|------------|----------|
| 인간 유전체 DNA | 50 ng/μl |
| 인간 전혈 | 10% v/v |
| 인간 유신 | 0.5% v/v |

표 11. 검사한 경쟁 미생물

| 미생물(소스) | 농도 |
|---|---------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC CRM-6538) | 1.70E+08 CFU/ml |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> (ATCC 6303) | 1.25E+07 CFU/ml |
| <i>Haemophilus influenzae</i> (ATCC 49766) | 6.20E+08 CFU/ml |
| <i>Candida albicans</i> (ATCC CRM-10231) | 1.00E+06 CFU/ml |
| 단순 헤르페스 바이러스 1 (ATCC VR-1789) | 1.60E+07 TCID ₅₀ /ml |
| 인간 사이토메갈로바이러스 (ATCC NATCMV-0005) | 2.0E+04 TCID ₅₀ /ml |

표 12. 검사한 외인성 물질

| 물질 | 농도 |
|--------------------------|----------|
| Utabon® 코 분무기(충혈 완화제) | 10% v/v |
| Rhinomer® 코 분무기(염수용액) | 10% v/v |
| 토브라마이신 | 6 mg/ml |
| 무피로신 | 2.5% w/v |

캐리오버

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에서 QIAstat-Dx Respiratory Panel 사용 시 연속 실행 간 교차 오염의 발생 가능성을 평가하기 위해 캐리오버 연구가 수행되었습니다.

고양성 및 고음성 검체로 교대하며 시뮬레이션된 NPS 매트릭스의 검체를 하나의 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에서 수행했습니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel 에서 관찰된 검체 간 캐리오버는 없었습니다.

재현성

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 대한 QIAstat-Dx Respiratory Panel 의 재현 가능한 성능을 입증하기 위해, 저농도 피분석물(3x LoD 및 1x LoD) 및 음성 검체로 구성된 일습의 선택한 검체를 검사했습니다. 검체는 여러 로트의 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 를 사용한 복제물에서 검사되었고 다른 날짜에 다른 작업자가 다른 QIAstat-Dx Analyzers 1.0 에서 검사를 실행했습니다.

표 13. 성능 재현성에 대해 검사한 호흡기 병원체 목록

| 병원체 | 균주 |
|------------------|-----------------------|
| 인플루엔자 A H1 | A/New Jersey/8/76 |
| 인플루엔자 A H3 | A/Virginia/ATCC6/2012 |
| 인플루엔자 A H1N1 pdm | A/SwineNY/03/2009 |
| 인플루엔자 B | B/FL/04/06 |
| 코로나바이러스 229E | 사용 불가능 |
| 코로나바이러스 OC43 | 사용 불가능 |
| 코로나바이러스 NL63 | 사용 불가능 |
| 코로나바이러스 HKU1 | 사용 불가능 |

(표 13 계속)

| 병원체 | 균주 |
|---------------------------------|------------------------------|
| 파라인플루엔자 바이러스 1 | C35 |
| 파라인플루엔자 바이러스 2 | Greer |
| 파라인플루엔자 바이러스 3 | C 243 |
| 파라인플루엔자 바이러스 4a | M-25 |
| 리노바이러스 | A16 |
| 엔테로바이러스 | /US/IL/14-18952(엔테로바이러스 D68) |
| 아데노바이러스 | RI-67(아데노바이러스 E4) |
| RSV B | 9320 |
| hMPV | Peru6-2003(유형 B2) |
| 보카바이러스 | 임상 검체 |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | M129-B7(유형 1) |
| <i>Chlamydophila pneumoniae</i> | TW183 |
| <i>Legionella pneumophila</i> | CA1 |
| <i>Bordetella pertussis</i> | I028 |

표 14. 재현성 검사에 대한 양성/음성 일치율 요약

| 농도 | 병원체 | 예상 결과 | 검출률 | 예상 결과와의 일치율 % |
|--------|--------------|-------|-------|---------------|
| 3x LoD | 인플루엔자 A H1 * | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 코로나바이러스 HKU1 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | PIV-2 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | RSVB | 양성 | 20/20 | 100% |
| 1x LoD | 인플루엔자 A H1 * | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 코로나바이러스 HKU1 | 양성 | 19/20 | 95% |
| | PIV-2 | 양성 | 19/20 | 95% |
| | RSVB | 양성 | 20/20 | 100% |
| 음성 | 인플루엔자 A H1 * | 음성 | 80/80 | 100% |
| | 코로나바이러스 HKU1 | 음성 | 80/80 | 100% |
| | PIV-2 | 음성 | 80/80 | 100% |
| | RSVB | 음성 | 80/80 | 100% |

* 검출률은 두 표적, 인플루엔자 A 및 H1 에 모두 적용됩니다.

(표 14 계속)

| 농도 | 병원체 | 예상 결과 | 검출률 | 예상 결과와의 일치율 % |
|--------|--------|-------|-------|---------------|
| 3x LoD | 보카바이러스 | 양성 | 20/20 | 100% |
| 1x LoD | 보카바이러스 | 양성 | 20/20 | 100% |
| 음성 | 보카바이러스 | 음성 | 80/80 | 100% |

(표 14 계속)

| 농도 | 병원체 | 예상 결과 | 검출률 | 예상 결과와의 일치율 % |
|--------|---------------------|-------|-------|---------------|
| 3x LoD | 인플루엔자 B | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 코로나바이러스 229E | 양성 | 20/20 | 100% |
| | PIV-4a | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 엔테로바이러스 D68 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | hMPV B2 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | <i>B. pertussis</i> | 양성 | 20/20 | 100% |
| 1x LoD | 인플루엔자 B | 양성 | 19/20 | 95% |
| | 코로나바이러스 229E | 양성 | 20/20 | 100% |
| | PIV-4a | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 엔테로바이러스 D68 | 양성 | 19/20 | 95% |
| | hMPV B2 | 양성 | 19/20 | 95% |
| | <i>B. pertussis</i> | 양성 | 20/20 | 100% |
| 음성 | 인플루엔자 B | 음성 | 80/80 | 100% |
| | 코로나바이러스 229E | 음성 | 80/80 | 100% |
| | PIV-4a | 음성 | 80/80 | 100% |
| | 엔테로바이러스 D68 | 음성 | 80/80 | 100% |
| | hMPV B2 | 음성 | 80/80 | 100% |
| | <i>B. pertussis</i> | 음성 | 80/80 | 100% |

(표 14 계속)

| 농도 | 병원체 | 예상 결과 | 검출률 | 예상 결과와의 일치율 % |
|--------|------------------------------|-------|-------|---------------|
| 3x LoD | 인플루엔자 H1N1(pdm) [†] | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 코로나바이러스 OC43 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | PIV-3 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 리노바이러스 A16 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | <i>M. pneumoniae</i> | 양성 | 20/20 | 100% |
| 1x LoD | 인플루엔자 H1N1(pdm) [†] | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 코로나바이러스 OC43 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | PIV-3 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 리노바이러스 A16 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | <i>M. pneumoniae</i> | 양성 | 20/20 | 100% |
| 음성 | 인플루엔자 H1N1(pdm) [†] | 음성 | 80/80 | 100% |
| | 코로나바이러스 OC43 | 음성 | 80/80 | 100% |
| | PIV-3 | 음성 | 80/80 | 100% |
| | 리노바이러스 A16 | 음성 | 80/80 | 100% |
| | <i>M. pneumoniae</i> | 음성 | 80/80 | 100% |

[†] 검출률은 두 표적, 인플루엔자 A 및 H1/감염병에 모두 적용됩니다.

(표 14 계속)

| 농도 | 병원체 | 예상 결과 | 검출률 | 예상 결과와의 일치율 % |
|--------|-----------------------|-------|-------|---------------|
| 3x LoD | 인플루엔자 A H3* | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 코로나바이러스 NL63 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | PIV-1 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 아데노바이러스 E4 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | <i>L. pneumophila</i> | 양성 | 20/20 | 100% |
| 1x LoD | 인플루엔자 A H3* | 양성 | 19/20 | 95% |
| | 코로나바이러스 NL63 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | PIV-1 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | 아데노바이러스 E4 | 양성 | 20/20 | 100% |
| | <i>L. pneumophila</i> | 양성 | 20/20 | 100% |
| 음성 | 인플루엔자 A H3* | 음성 | 80/80 | 100% |
| | 코로나바이러스 NL63 | 음성 | 80/80 | 100% |
| | PIV-1 | 음성 | 80/80 | 100% |
| | 아데노바이러스 E4 | 음성 | 80/80 | 100% |
| | <i>L. pneumophila</i> | 음성 | 80/80 | 100% |

* 검출률은 두 표적, 인플루엔자 A 및 H3 에 모두 적용됩니다.

검사한 모든 검체가 QIAstat-Dx Respiratory Panel 의 재현 가능한 성능을 나타내는 예상 결과(95~100% 일치율)를 생성했습니다.

재현성 검사는 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에서 실행하는 QIAstat-Dx Respiratory Panel 이 동일한 검체를 여러 실행에서, 여러 날짜에, 다양한 작업자가 다른 QIAstat-Dx Analyzers 1.0 및 여러 로트의 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 를 사용해서 검사할 때 매우 재현성 높은 검사 결과를 제공함을 입증했습니다.

검체 안정성

QIAstat-Dx Respiratory Panel 로 검사할 임상 검체의 보관 조건을 분석하기 위해 검체 안정성 연구가 수행되었습니다. 시뮬레이션된 NPS 검체 매트릭스(Copan UTM 에서 배양된 인간 세포)가 저농도(예: 3x LoD)의 바이러스 또는 박테리아 배양 물질로 스파이크되었습니다. 검체는 검사를 위해 다음 조건에서 보관했습니다.

- 15°C~25°C 에서 4 시간
- 2°C~8°C 에서 3 일
- -15°C~-25°C 에서 30 일
- -70°C~-80°C 에서 30 일

모든 병원체는 여러 저장 온도 및 기간에서 성공적으로 검출되었고, 검체가 지시된 보관 조건 및 기간에서 안정적인 것으로 나타났습니다.

부록

부록 A: 분석항목 정의 파일 설치

QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 로 검사하기 전에 QIAstat-Dx Respiratory Panel 의 분석항목 정의 파일을 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 설치해야 합니다.

참고: QIAstat-Dx Respiratory Panel 분석항목의 새로운 버전이 공개되면, 검사 전에 새로운 QIAstat-Dx Respiratory Panel 분석항목 정의 파일을 설치해야 합니다.

참고: 분석항목 정의 파일은 www.qiagen.com 에서 이용할 수 있습니다. 분석항목 정의 파일(.asy 파일 유형)은 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 설치하기 전에 USB 드라이브에 저장해야 합니다. 이 USB 드라이브는 FAT32 파일 시스템으로 포맷되어야 합니다.

USB 에서 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 로 새로운 분석항목을 가져오려면 다음 단계를 진행합니다.

1. 분석항목 정의 파일이 들어 있는 USB 스틱을 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 의 USB 포트 중 하나에 삽입합니다.
2. Options(옵션) 버튼을 누른 뒤 Assay Management(분석항목 관리)를 선택합니다. Assay Management(분석항목 관리) 화면이 디스플레이의 내용 영역에 표시됩니다(그림 36, 다음 페이지).

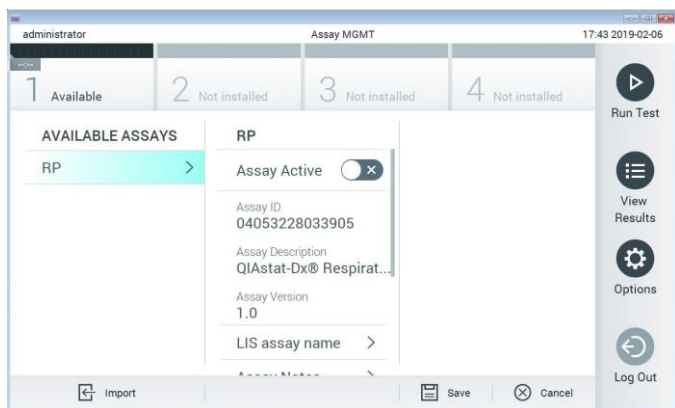


그림 36. Assay Management(분석항목 관리) 화면.

3. 화면 왼쪽 하단의 Import(가져오기) 아이콘을 누릅니다.
4. USB 드라이브로부터 가져올 분석항목에 해당하는 파일을 선택합니다.
5. 파일 업로드를 확인하는 대화상자가 표시됩니다.
6. 현재 버전을 새로운 버전으로 덮어쓰기 할지를 묻는 대화상자가 표시될 수도 있습니다. yes(예)를 눌러 덮어씁니다.
7. Assay Active(분석항목 활성화)를 선택하여 분석항목을 활성 상태로 만들 수 있습니다(그림 37).

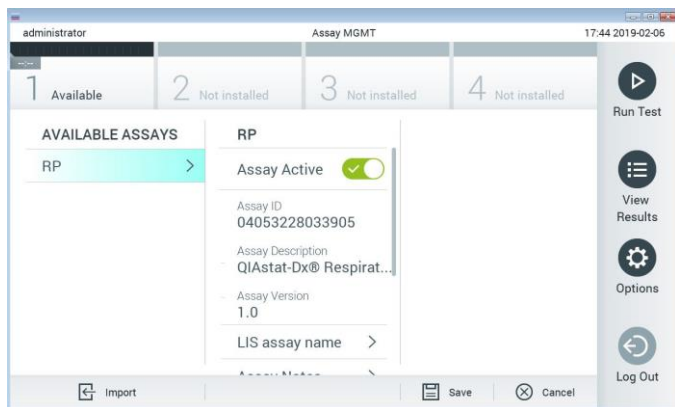


그림 37. 분석항목 활성화.

8. Options(옵션) 버튼을 누른 뒤 User Management(사용자 관리) 버튼을 눌러 사용자에게 활성 분석항목을 할당합니다. 분석 실행을 허용해야 하는 사용자를 선택합니다. 그런 다음, "User Options"(사용자 옵션)에서 Assign Assays(분석항목 할당)를 선택합니다. 분석항목을 활성화하고 Save(저장) 버튼을 누릅니다(그림 38).

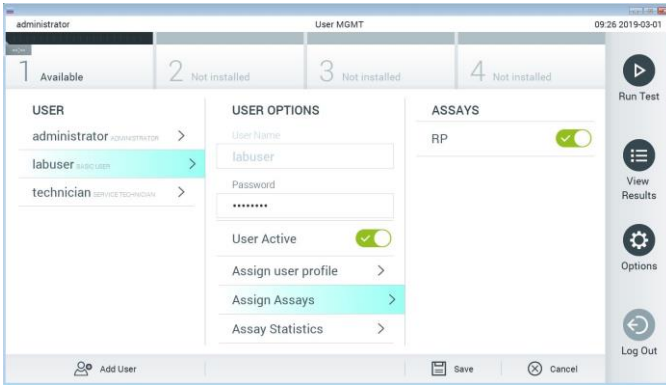


그림 38. 활성 분석항목 할당.

부록 B: 용어

증폭 곡선: 다중 실시간 RT-PCR 증폭 데이터의 그래픽 표현.

분석 모듈(Analytical Module, AM): QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 에 대한 검사 실행을 담당하는 기본 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 하드웨어 모듈. 작동 모듈로 제어됩니다. 여러 분석 모듈을 하나의 작동 모듈에 연결할 수 있습니다.

QIAstat-Dx Analyzer 1.0: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 은 작동 모듈과 분석 모듈로 구성됩니다. 작동 모듈은 분석 모듈과의 연결을 제공하고 사용자가 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 에 개입할 수 있도록 하는 요소를 포함하고 있습니다. 분석 모듈은 검체 검사 및 분석을 위한 하드웨어와 소프트웨어를 포함합니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge: 호흡기 병원체 검출을 위한 완전 자동화된 분자 분석의 완전한 실행을 위해 필요한 시약이 모두 사전 로드되어 있는 자체 내장형 일회용 플라스틱 장치.

IFU: Instructions for use(사용 지침).

기본 포트: QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 내 수송 배지 액체 검체 주입구.

핵산: 생물 고분자 물질 또는 뉴클레오티드로 구성된 소형 생체 물질로 5 탄당, 인산군 및 질소염기라는 3 개의 구성 요소로 이루어진 단량체.

작동 모듈(Operational Module, OM): 1~4 개 분석 모듈(AM)에 대한 사용자 인터페이스를 제공하는 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 전용 하드웨어.

PCR: Polymerase Chain Reaction(중합효소 연쇄 반응)

RT: Reverse Transcription(역전사)

면봉 표본 포트: QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 내 건식 면봉 표본 주입구.

User(**사용자**): QIAstat-Dx Analyzer 1.0/QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 를 의도된 방식으로 작동하는 사람.

부록 C: 보증 면책 조항

QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 판매에 대한 QIAGEN 약관에서 제시된 경우를 제외하고, 종류를 불문하고 어떠한 책임도 지지 않으며 판매적격성, 특정 목적에의 적합성 또는 일체의 특허, 저작권 또는 전 세계 모든 지역의 기타 지적재산권 침해와 관련한 책임이나 보증을 포함하여 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge 의 사용과 관련한 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.

참고 문헌

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD). Division of Viral Diseases (DVD) web site.
2. World Health Organization. WHO Fact Sheet No. 221, November 2016. Influenza (seasonal). www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/index.html. Accessed November 2016.
3. Flu.gov web site. About Flu. www.cdc.gov/flu/about/index.html
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Human Parainfluenza Viruses (HPIVs). www.cdc.gov/parainfluenza/index.html
5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV). www.cdc.gov/rsv/
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Adenoviruses. www.cdc.gov/adenovirus/index.html
7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Non-polio Enterovirus. www.cdc.gov/non-polio-enterovirus/about/index.html
8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: *Mycoplasma pneumoniae* Infection. www.cdc.gov/pneumonia/atypical/mycoplasma/index.html
9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Pertussis (Whooping Cough). www.cdc.gov/pertussis/
10. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline* (M29).
11. BLAST: Basic Local Alignment Search Tool. <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>
12. Schreckenberger, P.C. and McAdam, A.J. (2015) Point-counterpoint: large multiplex PCR panels should be first-line tests for detection of respiratory and intestinal pathogens. *J Clin Microbiol* 53(10), 3110–3115.

기호

다음 표에는 라벨이나 본 문서에 나올 수 있는 기호가 설명되어 있습니다.



<N>회 반응에 충분한 시약 포함



사용 기한



체외 진단용 의료 기구



카탈로그 번호



로트 번호



재료 번호(즉, 구성품 라벨링)



상부 호흡기 애플리케이션

Rn

R 은 안내서의 개정 버전이며 n 은 개정 버전 번호입니다.



온도 제한



제조업체



사용 지침 참조



주의



유럽 적합성에 대한 CE 마크



일련 번호



재사용하지 말 것



직사광선을 피할 것



포장이 손상된 경우 사용하지 말 것



국제 거래 단위 번호

주문 정보

| 제품 | 목차 | 카탈로그 번호 |
|------------------------------|---|---------|
| QIAstat-Dx Respiratory Panel | 6 회 검사용: 6 개의 개별 포장된 QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridges 및 6 개의 개별 포장된 이동 피펫 | 691211 |
| 관련 제품 | | |
| QIAstat-Dx Analyzer 1.0 | 1 개 QIAstat-Dx Analytical Module, 1 개 QIAstat-Dx Operational Module 및 분자 진단 QIAstat-Dx 분석항목 카트리지를 실행하기 위한 관련 하드웨어 및 소프트웨어 | 9002824 |

최신 라이선스 정보 및 제품별 면책 사항은 각 QIAGEN 키트 안내서 또는 사용자 설명서를 참조하십시오. QIAGEN 키트 안내서와 사용자 설명서는 www.qiagen.com 에서 확인하거나 QIAGEN 기술 서비스 또는 현지 배포자에게 요청할 수도 있습니다.

문서 개정 이력

| 문서 개정 이력 | |
|------------------|--------|
| 개정판 1 04/2019 | 최초 배포. |

등록 상표: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstatDx®, DiagCORE®(QIAGEN 그룹), ACGIH®(American Conference of Government Industrial Hygienists, Inc.), ATCC®(American Type Culture Collection), Copan®, FLOQSwabs®, UTM®(Copan Italia S.P.A.), Clinical and Laboratory Standards Institute®(Clinical and Laboratory Standards Institute, Inc.), OSHA®(미국 노동부 산업안전보건청), FilmArray®(BioFire Diagnostics, LLC), Allplex®(Seegene, Inc.), Rhinomer®(Novartis Consumer Health, S.A), Utabon®(Uriach Consumer Healthcare, S.L.), ZepitoMetrix®(ZepitoMetrix Corporation).

이 문서에 사용된 등록된 이름, 상표 등은 별도로 표시되지 않은 경우에도 법적 보호를 받는 것으로 간주됩니다.

QIAstat-Dx Respiratory Panel 에 대한 제한된 라이선스 계약

본 제품을 사용함으로써 다음 품목에 대한 모든 제품 구입자 또는 제품 사용자의 협약을 준수합니다.

1. 이 제품은 오로지 제품과 함께 제공된 프로토콜과 안내서에 따라 사용될 수 있으며 키트에 포함되어 있는 구성품과만 사용할 수 있습니다. QIAGEN 은 제품과 함께 제공된 프로토콜 및 본 안내서, www.qiagen.com 에 제공되어 있는 추가 프로토콜에서 설명한 경우를 제외하고 지적 재산권 하에서 본 키트의 동봉된 구성요소를 본 키트에 포함되지 않은 구성요소와 통합하거나 사용하도록 라이선스를 부여하지 않습니다. QIAGEN 사용자를 위해 QIAGEN 사용자가 이 추가 프로토콜의 일부를 제공하였습니다. QIAGEN 에서 이 프로토콜을 철저히 검사하거나 최적화하지 않았습니다. QIAGEN 은 이를 보장하지 않으며 제 3 자의 권한을 침해하지 않는다는 것도 보증하지 않습니다.
2. 명시적으로 설명한 라이선스 이외에 QIAGEN 은 본 키트 및/또는 본 키트의 사용이 제 3 자의 권한을 침해하지 않음을 보증하지 않습니다.
3. 본 키트 및 해당 구성품은 1 회용으로 라이선스가 부여되며 재사용, 재정비 또는 재판매할 수 없습니다.
4. QIAGEN 은 명시적으로 설명한 경우 이외에 명시 또는 암시한 다른 라이선스는 명확히 부인합니다.
5. 키트 구입자 및 사용자는 위에서 금한 행위를 유도하거나 촉진할 수 있는 단계를 취하거나 이를 허용하지 않는데 동의합니다. QIAGEN 은 모든 법정에서 이와 같은 제한된 라이선스 협약의 금지를 시행할 수 있으며, 키트 및/또는 해당 구성요소에 관련하여 본 제한된 라이선스 협약 또는 지적 재산권을 시행하기 위한 어떤 행동에서든 변호사 비용을 포함하여 조사 및 법정 비용을 회수할 수 있습니다.

라이선스 조항의 업데이트에 대해서는 www.qiagen.com 을 참조합니다.

HB-2638-001 R1 04/2019

© 2019 QIAGEN, 모든 권한 보유.

